

ACTIVESHOP[®]

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Elegante platinum T6 ķermeņa novājēšanas sistēmas ierīce




Importētājs:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Ierīces konstrukcija

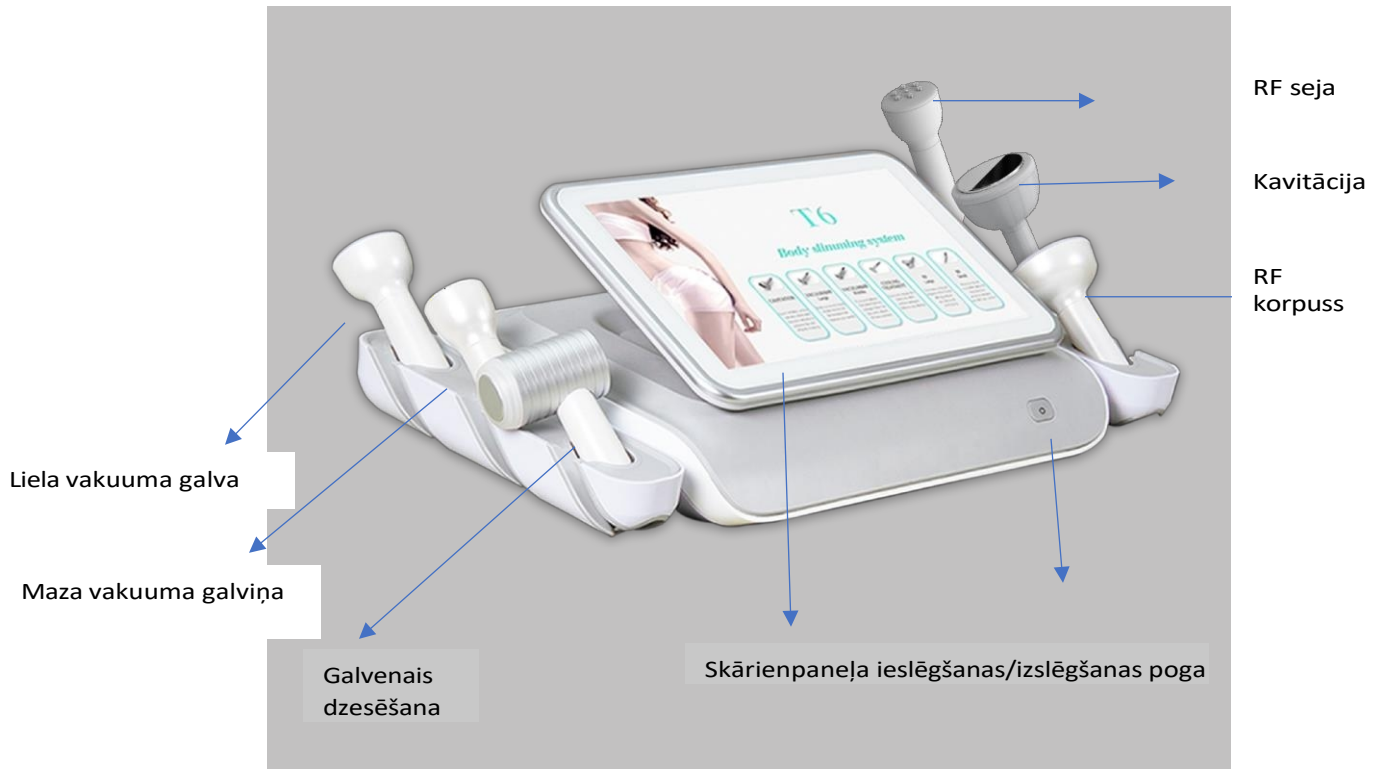

Galvas

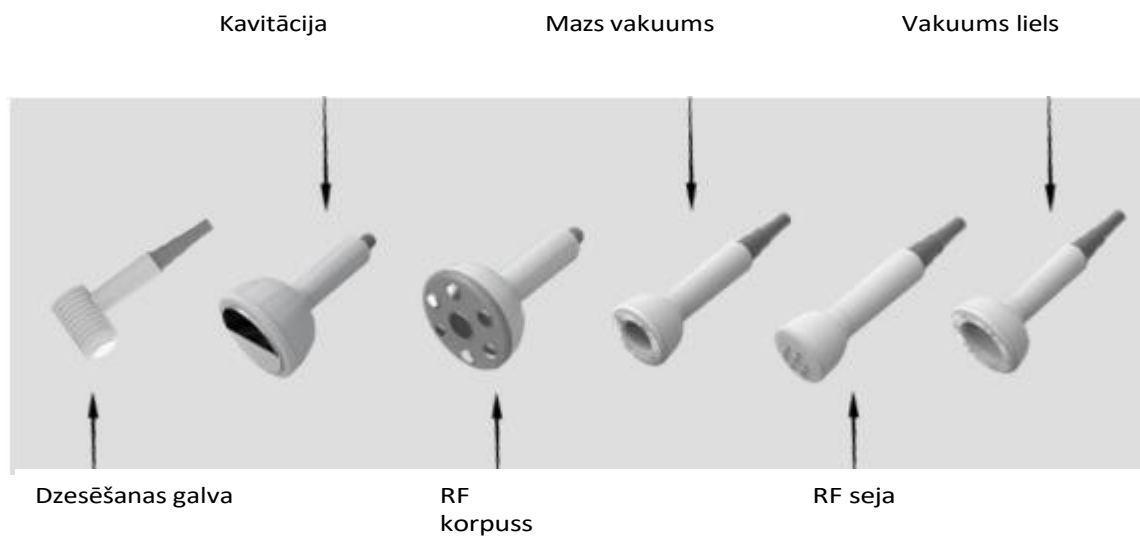

Savienotājgalviņas

1. Dzesēšanas galva



2. Liela vakuuma galva



3. Maza vakuuma galviņa



4. Kavitācija



5. RF korpuss



6. RF seja



Tehniskie dati

Spriegums	220-240V
Power	95W
Pašreizējā intensitāte	2A
Bruto svars	15 kg

Izmēri




Lietošanas instrukcija:

1. Pievienojiet galviņas ierīcei un pēc tam pievienojiet ierīci barošanas avotam.
2. Ieslēdziet ierīci, izmantojot O/I pogu aizmugurē, un nospiediet slēdzi priekšpusē.
3. Tiks parādīta šāda izvēlne.

4. Nospiediet uz attiecīgās galvas ikonas.



5. Tiks parādīta šāda izvēlne

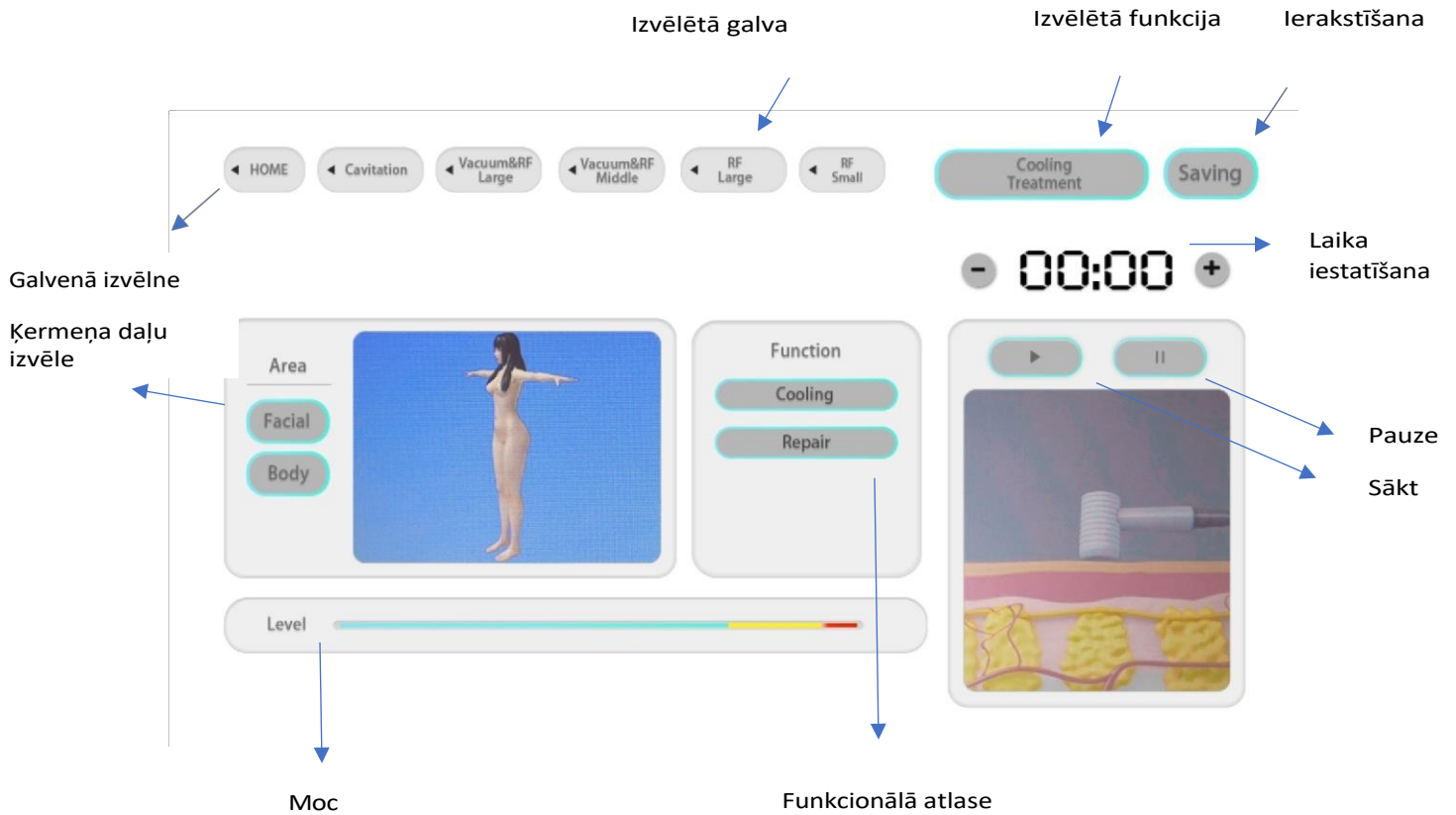

6. Izvēlieties atbilstošo galvu, ķermeņa daļu, funkciju, jaudu un apstrādes laiku un nospiediet pogu Start. Jauda un apstrādes laiks ir individuāli jāpielāgo atbilstoši jūsu vajadzībām.
7. Ja vēlaties saglabāt dotos iestatījumus konkrētai ķermeņa daļai, nospiediet Saglabāt un pēc tam Jā.
8. Pārvietojiet galvu virs izvēlētās ķermeņa daļas.

Uzmanību!

Lai izvairītos no traumām, neturiet galvu pārāk ilgi vienā vietā, bet kustiniet to ap ķermeni.

Ieteicamais ārstēšanas ilgums:

1. **Kavitācija** - samazina tauku daudzumu, padara ādu slaidāku un tvirtāku.
 - Rokas 10-15 minūtes,
 - Tālija 15-20 minūtes,
 - Kājas 10-15 minūtes,
2. **Vakuums un RF** (RF procedūrām jālieto speciāls gels) - nostiprina ādu, stimulē kolagēna šķiedru reģenerāciju.
 - Tālija 15-20 minūtes,
 - Kājas 10-15 minūtes,
 - Atpakaļ 10-15 minūtes,
 - Rokai 10-15 minūtes,
3. **Dzesēšanas galva** - sašaurina asinsvadus, samazina ādas apsārtumu.
 - Sejas 10-15 minūtes,
4. **RF lielais** (RF procedūrām jālieto speciāls gels) - grumbu mazināšana, asinsrites uzlabošana, kolagēna šķiedru stimulācija reģenerācijai.
 - Tālija 15-20 minūtes,
 - Kājas 10-15 minūtes,
 - Rokai 10-15 minūtes,
5. **Mazā RF** (RF procedūrām jālieto speciāls gels) - grumbu mazināšana, asinsrites uzlabošana, kolagēna šķiedru stimulācija reģenerācijai.
 - Sejas 15-20 minūtes,
 - Plecu daļas 10-15 minūtes.

Ierīces apkope

1. Uzturiet ierīci tīru. Ja nepieciešams, noslaukiet to ar mīkstu, mitru drānu.
2. Pirms un pēc apstrādes galviņas jādezinficē. Pārāk augsta dezinfekcijas līdzekļa koncentrācija var izraisīt galviņu bojājumus.
3. Nelietojiet skārienpaneli ar pildspalvu vai citiem priekšmetiem, kas var sabojāt virsmu.
4. Ierīce pēc izslēgšanas atdziest aptuveni 15 minūtes. Ļaujiet sastāvdaļām atdzist.

Kontrindikācijas ārstēšanai:

1. elektrokardiostimulators vai implantēts defibrilators.
2. Ādas vēzis vai pirmsvēža stadijas.
3. Metāla implantīti organismā.
4. Hipertensija, diabēts un sirds slimības.
5. Grūtniecība un barošana ar krūti.

6. Atklātas brūces vai infekcijas.
7. Ķermeņa daļu dziedināšana

Pamata problēmu risināšana

Problēma	Risinājuma metode
Ierīce netiek ieslēgta	Pārbaudiet, vai strāvas padeves savienojums ir pareizs Pārbaudiet, vai pogas ir ieslēgtas.
Galva nedarbojas	Pārbaudiet, vai galviņa ir pareizi savienota
Ierīce pārkarsta	Pārtrauciet darbu un ļaujiet ierīcei atdzist
Nav barošanas avota	Pārbaudiet drošinātāju

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta medicīnas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādi un nelietojiet ierīci šķidrums tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
 - a) Ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) no ierīces izdalās neparasta smaka, dūmi vai tā izdveš neparastus trokšņus, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzta vai tās korpuss ir bojāts.
5. Uz kabeļiem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādi ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos ikreiz, kad beidzat darbu ar ierīci, izņemiet kabeli no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermeņi, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv ierīces darbības traucējumu, bojājumu vai pat nodegšanas risks.

PIEZĪME

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.

4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt veselības apdraudējumu vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīci turiet bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar

Īstenošanas direktīva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ir jābūt atsevišķi un jānodod elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos. Tāpēc nolietotās un vecās ierīces, kas satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, būtu jānosūta pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, un tās var nodot arī uzņēmumam ACTIVESHOP Sp. z o.o..

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.