


# ACTIVESHOP®

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

YOSHIDA 5 в 1 хидрочиста почистваща  
Модел - H5020

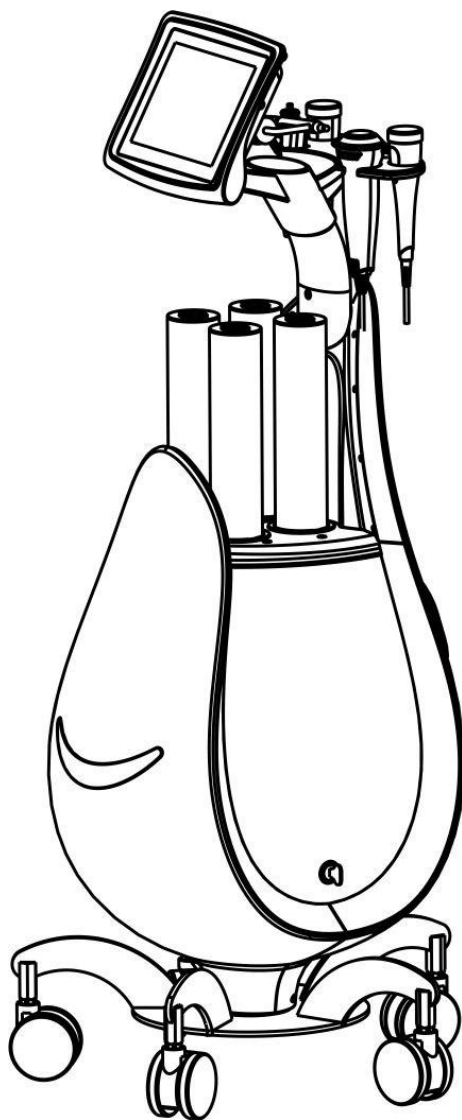

### Вносител:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.  
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-610  
Вроцлав, Полша  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)



Това не е медицински продукт, моля, не го използвайте за лечение!

Спецификации и технически данни:

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта              | 5 IN Водородно обелване на Yoshida                                                   |
| Номер на артикула.           | H5020                                                                                |
| Характеристики               | Оксибразия и водороден пилинг,<br>Ултразвук, RF, спрей, нагряване с чук -<br>студено |
| Номинално напрежение/мощност | AC 100-120V ~                                                                        |
|                              | AC 220-240V ~                                                                        |
| Работна честота              | 50/60Hz                                                                              |
| Номинална мощност            | 190W                                                                                 |
| Размери (LXWXH)              | 61*41*90,1 см                                                                        |
| N.W.                         | 50Kg                                                                                 |


Списък на опаковките:

| Име                                    | Външен вид на елемента                                                              | Количество |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Машина                                 |  | 1 комплект |
| Захранващ кабел                        |  | 1 бр.      |
| RF глава                               |  | 1 бр.      |
| Глава ултразвук                        |  | 1 бр.      |
| Топлина на чука - студено              |  | 1 бр.      |
| Аерограф за пръскане                   |  | 1 бр.      |
| Оксибразия и пилинг на главата водород |  | 1 бр.      |
| Шлайфаща глава                         |  | 1 комплект |

|                               |                                                                                   |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Твърда пластмаса<br>глава     |  | 1 комплект |
| Силиконова глава              |  | 1 комплект |
| Инструкции за<br>експлоатация |  | 1 копие    |

Инструкции за експлоатация на устройството:

1. Екран на дисплея
2. Аксесоари
3. Бутилки (A,B,C,D)
4. Ключ
5. Преден панел
6. Държач за аксесоари
7. Гнезда за свързване
8. Бутон за включване/изключване
9. Предпазител
10. Мрежово гнездо

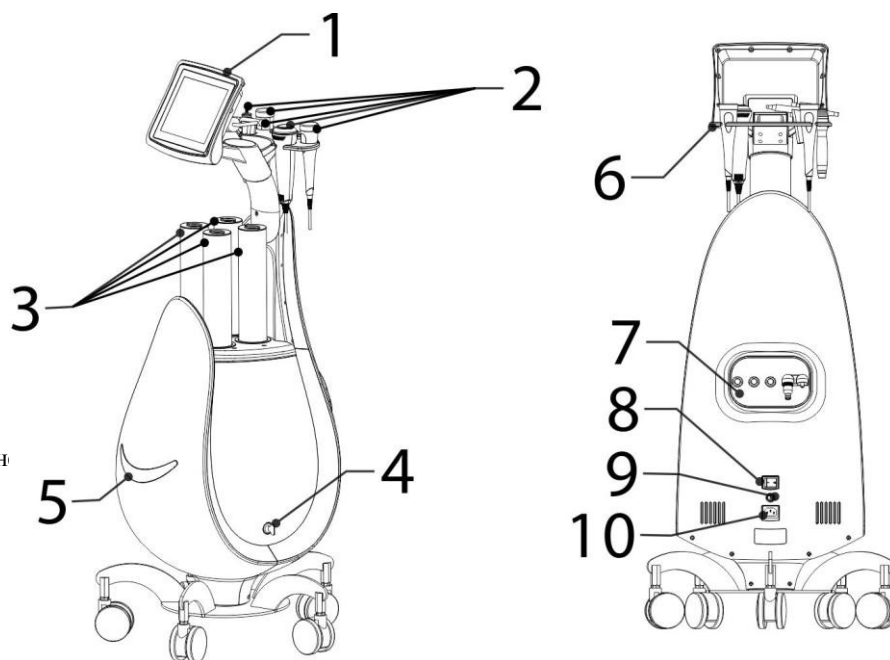


Инструкции и коментари :

1. Следвайте инструкциите, за да инсталирате аксесоарите.
2. **Напълнете контейнера с минерална вода или друга течност във водна форма, след което отворете горния бутон.**
3. Включете превключвателя на захранването отстрани на основната рамка. Светлината на превключвателя за захранване ще се включи.
4. Повдигнете леко екрана на дисплея
5. Работа с дисплея и екрана: Включване на захранването Избор на функция - различни функции

6. Докоснете екрана на дисплея, за да изберете необходимите функции Избор на функция:

1. Aqua Clean пречистване на вода и водород)
2. Ултразвук
3. Спрей
4. Настройки
5. RF
6. Чук за топлина и студ

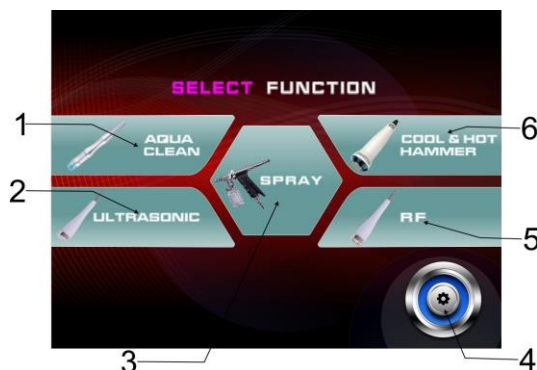

Функции на устройството

1. Aqua Clean (дълбоко почистване)
2. Спрей (нанасяне на активните вещества дълбоко в кожата) .
3. RF (Повдигане на кожата. ) .
4. Ултразвук (прилагане на активни вещества дълбоко в кожата)
5. Топлина-студ (стимулиране на кожата, порите и кръвоносните съдове) .

Оперативни стъпки:


Функция Aqua Clean

Чрез създаването на вакуум свръхмалките мехурчета и хранителните течности се комбинират напълно. Специално проектираните малки спираловидни смукателни глави работят директно върху кожата, като поддържат контакт на ултрамалките мехурчета с кожата за дълго време, увеличавайки ефекта на пилинга. Те почистват кожата в дълбочина и отстраняват стареещите кератинови клетки, като премахват себума. Задълбочено премахва всички замърсявания, акари и остатъци от себум от космените фоликули и снабдява кожата с хранителни вещества. Кожата е хидратирана, мека и блестяща.

Подготовка за употреба



Добавете специална течност или минерална вода в бутилката

1. Натиснете бутона в средата на бутилката...
2. Отвийте горния капак по посока на стрелката.

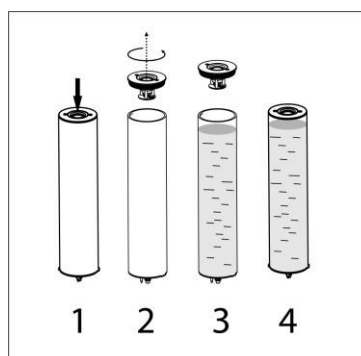

3. Добавете специална течност или минерална вода в бутилката
4. Затегнете горния капак в обратна посока и натиснете средния бутон (вижте дясното изображение).
5. Поставете бутилките в съответните слотове за хостове. (вижте изображението по-долу)

Забележка: Преди поставяне проверете дали долният уплътнителен пръстен е цял (вж. чертеж по-долу). Липсващ или повреден уплътнителен пръстен ще доведе до теч! Когато поставяте, проверете малкия и големия отвор от двете страни, за да се уверите, че пасват, няма да можете да го поставите. Поставете 4-те бутилки за вода в съответните отвори.

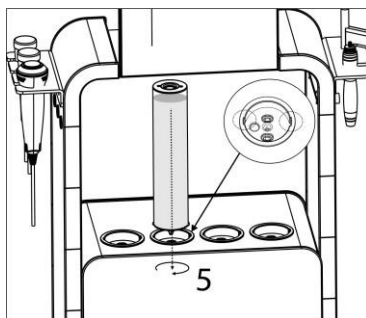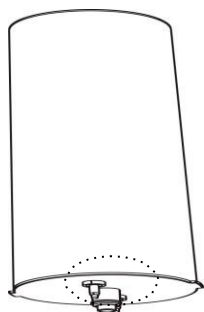


Указания за употреба

(1) Изберете функцията Aqua екран.

МЕНЮ

1. Намаляване на времето
2. Таймер
3. Увеличаване на времето
4. Връщане към главното меню
5. Намаляване на енергията
6. Енергиен бар

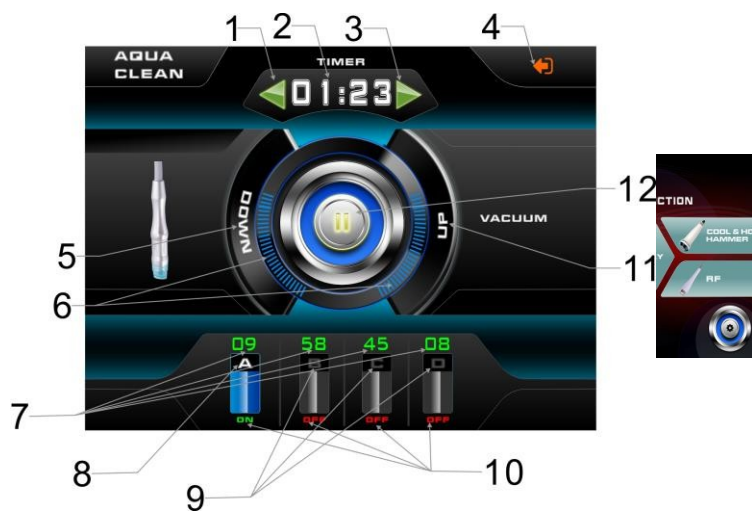

на

## 7. Процент на използваните бутилки за вода

### 8. Бутилка А

(Активира функцията за богата на водород вода)

### 9. Бутилка B,C,D

### 10. Работно състояние на бутилката

### 11. Увеличаване на енергията

### 12. Бутон Старт

(2). натиснете бутона на център капак бутилки

(в противен случай може да изтече вода), след което натиснете Намалване на времето



или

Увеличаване на времето  регулирайте времето на използване в зависимост от извършваното лечение (предлага се 15-20 мин.), натиснете бутони UP и DOWN, за да регулирате силата на засмукване според нуждите (предложено увеличение от ниво 2), изберете бутилката, от която се нуждаете, можете да изберете една или всички, ABCD бутилки се показват на екрана, в долната част се показват активните бутилки.



като ВКЛЮЧЕН , неактивен се показва като ИЗКЛЮЧЕН , В бутилката А също така е възможно да се

активира



функция за водородна вода, когато е във функцията , кликнете отново върху иконата на бутилката  това означава, че функцията за водородна вода е активирана, когато искате да деактивирате тази,



просто щракнете отново върху иконата на цилиндъра  това ще го затвори. (Забележка: само цилиндър А има тази функция, B,C,D нямат тази функция).

Обяснение: (Водородна вода) е научно доказано неразтворима във вода, като се използва технология за смесване на течност и газ в нанометричен мащаб и се използват физически методи за равномерно обграждане на водородни молекули около молекула вода, за да се постигне стабилна комбинация от водород и вода. Той се характеризира с висока концентрация на водород и добра стабилност. Водородът е безцветен, нетоксичен и без мирис газ. Уникалната природа на водорода определя, че водородът има много предимства в биологията. Най-очевидната характеристика силното му проникване които могат лесно да навлязат във всяка част на клетката, като например ядрото и

Митохондрии, так что богатая на водород вода имеет много сильную антиоксидантную функцию.

Настройте процент воды в бутылке, Просто нажмите на число на экране **45**, число появится в верхней части.

1. Прозорец за избор на ПИН код
2. Клавиатура за избор на ПИН код
3. Анулиране на ПИН код
4. Потвърждаване на ПИН кода и излизане



В интерфейса за въвеждане на числа шракнете върху процента, необходим за въвеждане на горното число, например въведете 23, което означава, че са използвани 23% от водата в бутилката.

натиснете , системата запазва стойността и излиза от интерфейса. Ако въведените данни са грешни,

Натиснете отново  enter.




След като зададете необходимия номер, натиснете  Започнете работа.

### (3) функции

Изберете желаната шлифовъчна глава и я монтирайте на патронника



, Три шлифовъчни глави за избор

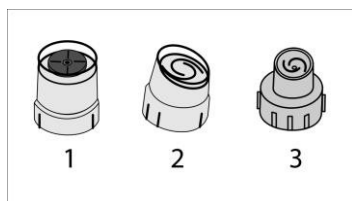

1. Шлайфаща глава
2. Глава от твърда пластмаса
3. Силиконова глава

Шлайфащата глава е подходяща за ексфолиране на мъртвата кожа. Главите от твърда пластмаса са подходящи за редовна употреба върху кожата. Различните модели се използват за почистване на цялата повърхност или на част от лицето.

Силиконовата глава е подходяща за чувствителна кожа и не дразни.

**Цялото измиване на лицето отнема 15-20 минути.**

Бележки относно операциите:


1. Когато бутилка на използван течност е пълна, на екран се появява се появява на екрана лого предупредително лого



след това приключете работата , отворете задната врата на машината, извадете мръсната вода от бутилката. Следвайки посоката на стрелката, почистете мръсната вода и поставете бутилката обратно, а след това продължете да го използвате.

- 2, Уплътнителният пръстен на бутилката за вода е повреден, което може да доведе до теч. Ако

случайно изтече, незабавно изключете захранването, вода, подсушете водата със суха кърпа и я поставете в проветриво място, докато устройството изсъхне. рестартирайте системата. Не отваряйте устройството, изтичане на вода! в противен случай устройството ще бъде унищожени!

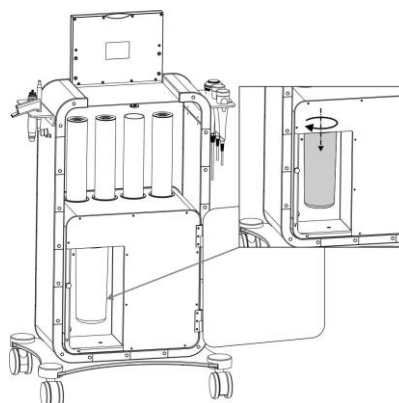

извадете  
сухо,  
Опитайте  
когато има

назад, за


3. когато премествате устройството, натиснете бутона да държите бутилката с вода затворена, за да предотвратите разливане.
- 4, Поддържайте главата за смилане чиста, почиствайте сондата след всяка употреба и използвайте алкохол или други дезинфекциращи средства, за да стерилизирате или замените новата глава.
- 5, Времето на лечение не трябва да надвишава 15 минути. Хора с малък участък от кожата на лицето трябва да се прилага по-кратко лечение. Прекалено дългата процедура може да доведе до прекалено силно екسفолане или нарушено усвояване на активните вещества; наконечникът не трябва да остава в едно положение за дълги периоди от време, за да не се увреди кожата.
- 6, При твърде продължителна екسفолация кожата може да се увреди.

Функция за пръскане с кислородна вода

Ефективност: вода или друго вещество, което се инжектира, улеснява абсорбцията на кожата, насищането ѝ с кислород, активирането на кожните клетки и подхранването ѝ.

### Въведение в услугата

1. Дренаж (контрол на обема на изхвърляне на кислород)
2. бутилка
3. дръжка

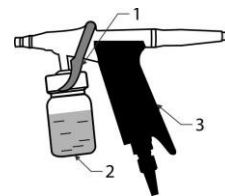


### Подготовка преди употреба



Добавете чиста вода или есенция в

### Инструкции:

- (1) Избор Иконата SPRAY при избор на функция превключва към интерфейса за пръскане

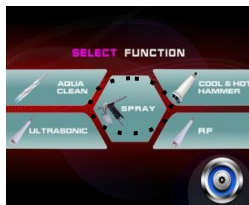

### Въвеждане на интерфейса

1. време за настройка
2. активиране на клавиша за пауза
3. Излизане от текущия функционален клавиш



- (2) Увеличете или намалете до правилното време (препоръчва се 15 минути) След като всички настройки са завършени, натиснете бутона за стартиране.

## Как да използвате

- След като активирате съответната функция на дисплея, задръжте дръжката и внимателно натиснете спусъка. От накрайника ще излезе мъгла, в която се наливат различни видове течности; След смяна с друга течност главата първо се спира, почиства се за да поставите нея друга течност. След напръскване функцията трябва да се спре След това с помощта на памучен тампон или мека хартия отстранете излишната течност от лицето на клиента.

## Бележки за употреба:

- По-добре е да издърпате спусъка до средното положение, за да контролирате обема на мъглата, Ако издърпате спусъка докрай, лесно може да предизвикате твърде голямо изтичане на вода. Връщане Обърнете по-голямо внимание на важните места, като , носа и очите, когато извършвате лечението, Помолете клиентите да затворят очите и устата си, Разпръснете мъглата от челото на клиента, за да навлизането на течността в ноздрите му. Винаги се дръжте на подходящо разстояние от лицето на клиента.

## RF (радиочестота)


Функции: загряване на тъканите, отваряне на порите, скъсяване на дължината на колагеновите влакна, подобрява фините линии и бръчките, възстановява еластичността на кожата и подобрява контурите на лицето.

## Инструкции:

- (1) Натиснете RF в интерфейса за избор на функции, за да влезете

### Въвеждане на интерфейса

1. Регулиране на времето
2. Енергийна лента (Показва енергийната мощност)
3. Намаляване на енергията
4. Увеличаване на енергията
5. Избор на изходна форма на вълната
6. Излизане от текущия функционален клавиш
7. Бутон Старт / Пауза

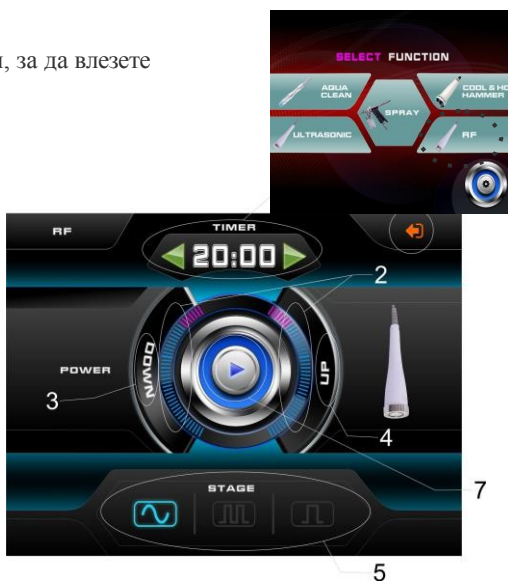

енергия)

- (2) увеличете  или намалете  до правилното време (препоръчително 30 минути) ,

След това натиснете намаляване на енергията или увеличаване на енергията до правилното ниво, Обикновено започвате да избирате енергията на второто ниво, трябва да я тествате на ръката си, преди да започнете лечението на клиента. Клиентът може да почувства лека топлина.

Състоянието на изходната вълна може да се избира от три режима:



състояние на непрекъсната вълна,



състояние

смесено вълново изходно състояние ,



широко импулсно изходно състояние. Ако е необходимо, изходно

вълново състояние, обикновено започнете да набирате.



(2) Увеличете или намалете до правилното време (препоръчва се 30 минути), След това натиснете намаляване на енергията или увеличаване на енергията до правилното количество, Обикновено започнете да набирате енергията на второто ниво, трябва да я тествате на ръката си, преди да започнете лечението на клиента. Клиентът може да почувства леко затопляне.

#### Бележки за употреба:

1. Нанесете гел или радиочестотен препарат върху кожата преди лечението, Не използвайте радиочестотната глава директно върху суха кожа, радиочестотната глава трябва да е близо до кожата, Не позволявайте да оставете кожата.
2. Ако температурата е твърде висока, когато се използва, просто я преместете към други части и се движете в кръг по-бързо, това ще намали температурата; Ако температурата не е достатъчно висока, за да се движи RF главата в кръга по-бавно, Температурата бавно ще се повиши.
3. Не се препоръчва за употреба по време на бременност или кърмене. Не се препоръчва за чувствителни зони, кожа с травми, зачервявания, възпаления, алергии или други кожни състояния.
4. Отстранете металните аксесоари преди започване на лечението.

#### Ултразвукова

производителност:

- 1, Стимулиране на кръвоносните съдове, елиминиране на зачервяването: прилагане на импулсна терапия Ултразвукът, работещ с подходящ продукт за активиране на кръвоносните съдове и клетъчния метаболизъм и в резултат на механичното действие на ултразвука, постигайки топлинен ефект и физическо и химическо действие, за подходяща стимулация и масаж, вазодилатация, стимулиране на кръвния поток и метаболитната функция, може да стимулира кръвоносните съдове да се съживят, премахва ефекта на еритема.
- 2, Антиакне терапия със силен ефект върху акнето: има много форми на акне, то е един от най-често срещаните случаи с гнойни черни точки, докосването е много болезнено, при неправилно боравене се образуват твърди белези. Ултразвукът може да повлияе на лимфните възли, циркулацията на кръвта и лимфата, да ускори лигавицата от възпалителни клетки.

- 3, Премахване на лунички и изсветляване на петна: ултразвукът може да премахне луничките и хиперпигментацията, да предотврати образуването им, да ги отслаби и да ги премахне с помощта на метаболизма. Ултразвукът може да увеличи усвояването на продуктите за грижа за кожата (като кремове, маски, ампули с изсветляващ ефект и др.), Ефект Премахването на хиперпигментацията е видимо след серия от процедури.
- 4, Деконтаминация и абсорбция: механичната масажна функция на ултразвука служи за регулиране на подкожните клетки и увеличаване на пропускливостта на клетъчната мембрана, от една страна, и за подобряване на кръвообращението и метаболизма, от друга. В комбинация с правилното кръвообращение и включването на продукти за грижа ефектът е задоволителен.
- 5, премахване на тъмните кръгове и подпухналостта на очите, благодарение на ефекта на механичния ултразвуков масаж, може да ускори циркулацията на кръвта и лимфата, и ефекта на нагряване на тъканта, може да разбие мазнините, да ускори абсорбцията на активните съставки от кожата, прекомерната влага и натрупването на мазнини се разсейват, подпухналостта и тъмните кръгове под очите изчезват.

Инструкции:

- (1) Натиснете ултразвуковия бутон на интерфейса за избор на функции, за да вл



Въвеждане на интерфейса

1. Регулиране на времето
2. Енергия (показва произведената енергия)
3. Намаляване на потреблението на енергия
4. Увеличаване на енергията
5. Избор на състоянието на изходната вълна
6. Излизане от текущия функционален клавиш
7. Бутон Старт / Пауза



- (2) За да увеличите  или да намалите  до правилното време ( препоръчителните 20 минути) , след това натиснете намаляване на енергията или увеличаване на енергията до правилното

стойности, Обикновено изберете второто ниво ,  Изходното състояние на вълната има три режима избор ,



състояние на изхода на непрекъсната вълна ,



състояние на изхода на широк импулс. Изберете

състоянието на изходната вълна, от което се нуждаем, обикновено изберете съответния параметър. 

Поставете лосиона или ампулата върху кожата, преди да използвате ултразвуковата сонда. Движете ултразвуковата сонда в кръг отдолу нагоре.

Бележки:

- 1, Поддържайте ултразвуковата сонда чиста, почиствайте я след всяка употреба и я стерилизирайте със спирт или

с друг дезинфектант.

2, Не поставяйте ултразвуковата сонда върху очната ябълка.

3, сте приложили правилното количество активно вещество върху кожата по време на лечението.

4, По принцип времето за лечение не трябва да надвишава 15 минути. Лицата с малка площ на кожата трябва да намалят съответно времето за лечение. Сондата не трябва да остава в определена позиция дълго време, за да се избегне увреждане на кожната тъкан.

5, В процеса на лечение избягвайте продължително използване на ултразвук в състояние на максимален разход на енергия, което не само ще повлияе на абсорбцията на кожата, но може дори да увреди кожната тъкан.

#### Чук топлина студ

Performance : Студена

терапия

1, Терапията е добра за , запечатване на капилярите.

2, Укрепва еластините влакна, прави кожата стегната и еластична, изглажда бръчките, премахва "краката на врана".

3, кръвоносните съдове се свиват, като ефективно намаляват еритема и рециркулацията на вените - по-лесно се почистват и детоксикират.

4, Намаляване на нервната чувствителност, успокояващ ефект, успокояване на кожата, подуване, болка, особено алергична кожа има добър поддържащ ефект.

5, студено лечение+ синята светлина може да облекчи зачервяването на кожата, има противовъзпалителен ефект

Топлинна терапия


1, Лека топлина, прави, отпуска мускулите, балансира нервната самодисциплина, облекчава болката. 2, Стимулира кръвообращението, увеличава количеството кислород в кръвта, отваря порите, разширява кръвоносните съдове и така хранителните вещества се усвояват по-бързо.

3, Ускорява метаболизма на кожата, увеличава естественото елиминиране на токсините.

Инструкции:

(1) Изберете функцията на чука топло-студено на дисплея натиснете Enter н

дисплея

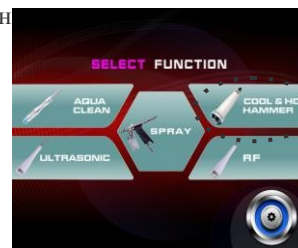

Въвеждане на интерфейса

1. Настройка на температурата

2. Стартиране / спиране

3. Охлаждане на чука

4. Отопление с чука

5. Показва текущия

чук

6. Излизане от текущия функционален клавиш



температура

(2) Ефекти върху

изпълнението

Коментари:

1. Почистете лицето си с препарат за премахване на грим за най-добри резултати.
  2. Не позволявайте горещото и студеното чукче намокрят. Той трябва да се избърсва със суха кърпа.
  3. Поддържайте правилното излъчване на топлина, не блокирайте отворите за излъчване на топлина
  4. Този уред не е предназначен за използване от хора с ниска физическа подготовка, забавени реакции или психически разстройства (включително деца), освен ако не се използва безопасно под ръководството или с помощта на лица, отговорни за безопасното изпълнение на процедурата.
  5. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с оборудването.
- Трябва да се обърне внимание на използването на цялата машина:

1. Когато работите, обръщайте внимание на закрепването и свързването към компютъра и не прекомерно кабелите.
2. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени със специален кабел или специални компоненти, закупени от производителя или от неговия отдел за поддръжка.
3. Ако в процеса на работа на хоста възникнат , незабавно изключете захранването и Изключете щепсела, свържете се с вашия дилър за проверка, моля, не отваряйте корпуса без разрешение.
4. и използвайте във влажни помещения.
5. Не поставяйте запалими или взривоопасни предмети в близост до него.

В случай на несъответствия между чертежите в настоящото ръководство и действителните елементи, действителните елементи имат предимство. Компанията си запазва правото непрекъснато да актуализира и подобрения на продукта. Горното съдържание може да бъде променено без предварително уведомление.

#### МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го използвате за цели, различни от посочените в тези инструкции.

обслужване. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - така че да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIV Tomasz Pacholczyk, в следните случаи:
  - а) в уреда е попаднала течност, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. в отвора чужд предметизвадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



#### ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в дружеството ACTIV Tomasz Pacholczyk.

#### СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява в добре вентилирано помещение с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се подлага на механични удари или да се излага на атмосферни влияния.