


ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

YOSHIDA 5 v 1 HYDROCLEAN ČISTÍČÍ
Model - H5020

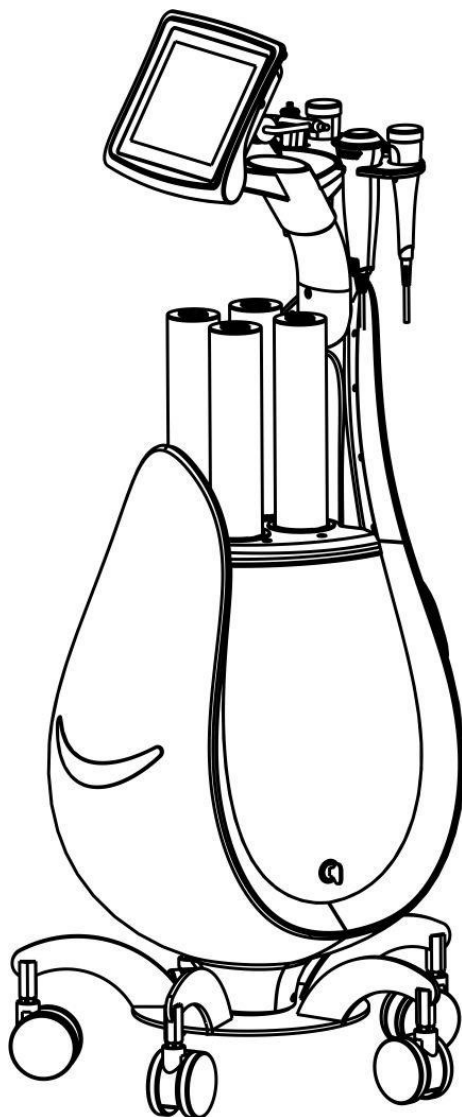

Dovozce:

ACTIV Tomasz
Pacholczyk ul. Graniczna
8b, bud. DC 1 54-610
Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl




Nejedná se o lékařský výrobek, nepoužívejte jej k léčbě!

Specifikace a technické údaje:

Název produktu	5 IN 1 Vodíková slupka Yoshida
Položka č.	H5020
Funkce	Oxybraze a vodíkový peeling, Ultrazvuk, RF, sprej, teplo kladivem - studené
Jmenovité napětí/výkon	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Provozní frekvence	50/60Hz
Jmenovitý výkon	190W
Rozměry (DXŠXV)	61*41*90,1 cm
N.W.	50 kg


Balicí seznam:

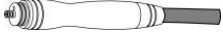Název	Vzhled prvku	Množství
Stroj		1 sada
Napájecí kabel		1 ks
RF hlava		1 ks
Hlava ultrazvuk		1 ks
Teplo kladiva - studené		1 ks
Airbrush pro stříkání		1 ks
Oxybraze a peelingová hlava vodík		1 ks
Brusná hlava		1 sada

Tvrký plast hlava		1 sada
Silikonová hlava		1 sada
Návod k obsluze		1 kopie

Návod k použití přístroje:

1. Obrazovka displeje
2. Příslušenství
3. Láhve (A,B,C,D)
4. Klíč
5. Přední panel
6. Držák příslušenství
7. Připojovací zásuvky
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
9. Pojistka
10. Síťová zásuvka

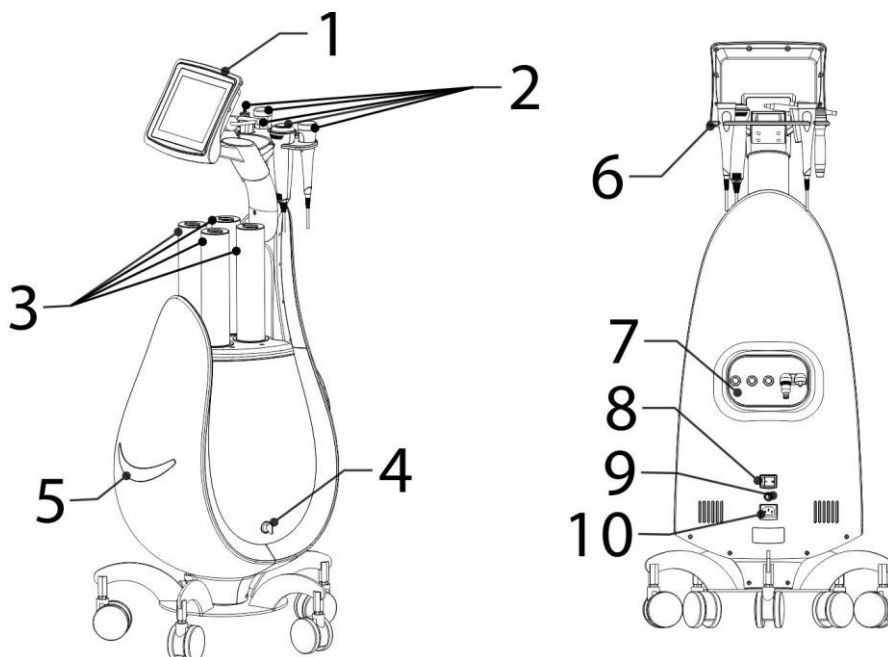

Pokyny a komentáře :

1. Při instalaci příslušenství postupujte podle pokynů.
- 2. Naplňte nádobu minerální vodou nebo jinou kapalinou ve vodní formě a otevřete horní tlačítko.**
3. Zapněte vypínač na boku hlavního rámu. Rozsvítí se kontrolka vypínače.
4. Mírně zvedněte displej
5. Ovládání displeje a obrazovky: Volba funkcí - různé funkce

6. Dotykiem na obrazovku displeje vyberte požadované funkce

Výběr funkce:

1. Aqua Clean (úprava vody a vodíku)


2. Ultrazvuk

3. Sprej

4. Nastavení

5. RF

6. Tepelně-studené kladivo

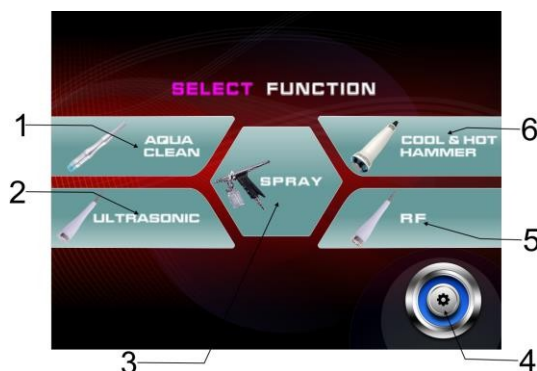

Funkce zařízení

1. Aqua Clean (hloubkové čištění)

2. Sprej (aplikace účinných látek hluboko do pokožky) .

3. RF (Lifting kůže.) .

4. Ultrazvuk (aplikace účinných látek hluboko do kůže)

5. Tepelně-studené kladivo (stimulace kůže, pórů a cév) .

Provozní kroky:

Funkce Aqua Clean


Vytvořením podtlaku dojde k úplnému spojení velmi malých bublinek a živných tekutin. Speciálně navržené malé spirálové sací hlavice působí přímo na pokožku a udržují ultra malé bublinky v kontaktu s pokožkou po dlouhou dobu, čímž zvyšují peelingový účinek. Hloubkově čistí pokožku a odstraňují stárnoucí keratinové buňky a odstraňují kožní maz. Důkladně odstraňují z vlasových folikulů všechny nečistoty, roztoče a zbytky kožního mazu a dodávají pokožce živiny. Pokožka je hydratovaná, jemná a lesklá.

Příprava na použití

Přidejte láhve speciální tekutinu nebo minerální vodu

1. Stiskněte tlačítko uprostřed láhve...



2. Odšroubujte horní kryt ve směru šipky.

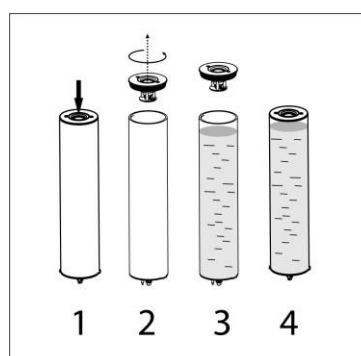

3. Přidejte do láhve speciální tekutinu nebo minerální vodu
4. Utáhněte horní kryt v opačném směru a stiskněte prostřední tlačítko (viz obrázek vpravo).
5. Vložte lahve do příslušných slotů hostitele. (viz obrázek níže)

Poznámka: Před vložením zkontrolujte, zda je spodní těsnicí kroužek neporušený (viz. kresba níže). Chybějící nebo poškozený těsnicí kroužek způsobí netěsnost! Při vkládání zkontrolujte malý a velký otvor na obou stranách, zda do sebe zapadají nebo nebudou možné vložit.

Vložte 4 láhve s vodou do příslušných otvorů.

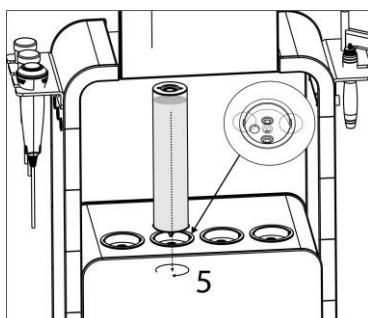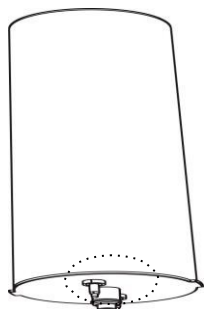


Návod k použití

(1) Vyberte funkci Aqua obrazovky.

MENU

1. Zkrácení času
2. Časovač
3. Prodloužení času
4. Zpět do hlavní nabídky
5. Snížení spotřeby energie
6. Energetická tyčinka

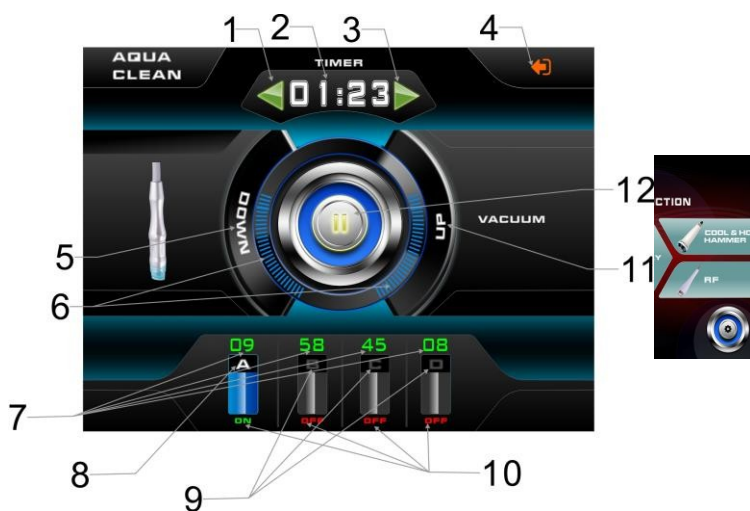

na

7. Procento použitých lahví na vodu

8. Láhev A

(Umožňuje funkci vody bohaté na vodík)

9. Láhev B,C,D

10. Pracovní stav láhve

11. Zvyšování energie

12. Tlačítko Start

(2). stiskněte tlačítko na uprostřed víko láhve

(jinak by mohlo dojít k úniku vody), poté stiskněte tlačítko Redukovat čas.



ne
bo

Zvyšte čas  upravte dobu použití v závislosti na prováděném ošetření (doporučuje se 15-20min), stisknutím tlačítek UP a DOWN upravte sací výkon podle potřeby.

(doporučené zvýšení od úrovně 2), vyberte potřebnou láhev, můžete vybrat jednu nebo všechny, na obrazovce se zobrazí láhve ABCD, dole se zobrazí aktivní láhve.



jako ON , neaktivní jsou zobrazeny jako OFF , V láhvi A je také možné povolit



funkce vodíková voda, když je ve funkci , znovu klikněte na ikonu láhve , znamená to, že je funkce hydrogenace povolena., když chcete tuto zakázat,



stačí znovu kliknout na ikonu válce , čímž se zavře. (Poznámka: Tuto funkci má pouze válec A , B,C,D tuto funkci nemají) .

Vysvětlení: (vodíková voda) je podle vědeckých poznatků nerozpustná ve vodě pomocí technologie míchání kapaliny a plynu v nanometrovém měřítku a využívá fyzikálních metod k rovnoměrnému obklopení molekul vodíku kolem molekuly vody, aby se podpořila stabilita vody.

kombinace vodíku a vody. Vyznačuje se vysokou koncentrací vodíku a dobrou stabilitou. Vodík je bezbarvý, nejedovatý plyn bez zápachu. Jedinečná povaha vodíku

určuje, že vodík má v biologii mnoho výhod. Nejzřetelnější vlastností jeho silný průnik vrstvy kůže, které mohou snadno proniknout do kterékoli části buňky, jako je jádro a

mitochondrie, takže voda bohatá na vodík má velmi silnou antioxidační funkci.

Upravte procento vody na láhev, stačí kliknout na číslo na obrazovce , číslo se zobrazí v horní části.

1. Okno pro výběr kódu PIN
2. Klávesnice pro volbu PIN kódu
3. Zrušení PIN kódu
4. Potvrzení PIN kódu a výstup



V rozhraní pro zadávání čísel klikněte na procento požadované pro zadání výše uvedeného čísla, například zadejte 23, což znamená, že je použito 23 % vody v láhvi.

stiskněte , systém uloží hodnotu a ukončí rozhraní. Pokud je zadání chybné,

Znovu stiskněte  enter.




Po zadání požadovaného čísla stiskněte tlačítko  Zahájit práci.

(3) funkce

Zvolte požadovanou brusnou hlavu a nasad'te ji na sklíčidlo.



Tři brusné hlavy na výběr

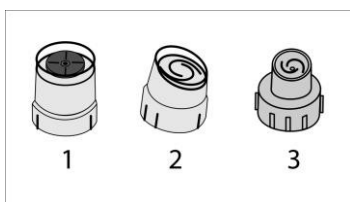

1. Brusná hlava
2. Hlava z tvrdého plastu
3. Silikonová hlava

Brusná hlava je vhodná k exfoliaci odumřelé kůže. Hlavice z tvrdého plastu jsou vhodné pro pravidelné používání na pokožce. Různé modely slouží k čištění celého povrchu nebo části obličeje. Silikonová hlavice je vhodná pro citlivou pokožku a nedráždí ji.

Celé mytí obličeje trvá 15-20 minut.

Poznámky k operacím:

1. Když láhev na použité kapalina je plná, na obrazovka se objeví se na obrazovce objeví logo varovné logo




poté dokončete práci , otevřete zadní dvířka přístroje a vyjměte špinavou vodu z láhve. Podle směru šipky vyčistěte špinavou vodu a nainstalujte láhev zpět, a a pak jej dále používejte.

- 2, těsnicí kroužek láhve na vodu je poškozený, což může způsobit únik vody. Pokud náhodně unikne, okamžitě vypněte napájení, vodu, vysušte ji suchým hadříkem a vložte do nádoby na vodu na větraném místě, dokud jednotka nevyschne.

te

restartovat systém. Jednotku neotvírejte, uniká voda! jinak dojde k poškození jednotky zničena!

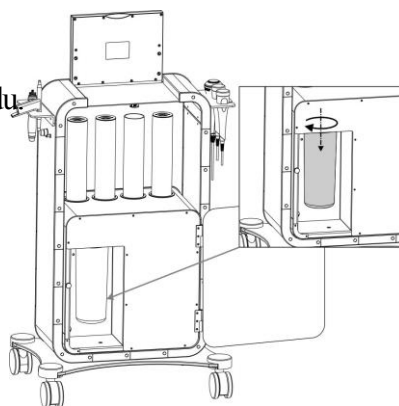

vytáhněte

suché,

Vyzkoušej

když

3. při přemísťování jednotky stiskněte tlačítko

láhev

zpět, aby byla láhev s vodou uzavřena a nedošlo k jejímu vylití.

- 4, Udržujte brusnou hlavu čistou, po každém použití sondu očistěte a ke sterilizaci nebo výměně nové hlavy použijte alkohol nebo jiné dezinfekční prostředky.

- 5, Doba ošetření by neměla přesáhnout 15 minut. Lidé s malou plochou kůže na obličeji by měla být léčba kratší. Příliš dlouhé ošetření může mít za následek přílišnou exfoliaci nebo zhoršenou absorpci účinných látek; ruční hlavice by neměla zůstat v jedné poloze po dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození pokožky.


- 6, Příliš dlouhá exfoliační kúra může pokožku poškodit.

Funkce rozprašování kyslíkové vody

Účinnost: voda nebo jiná látka, která se má vstříknout, usnadňuje vstřebávání do kůže, okysličení kůže, aktivaci kožních buněk, výživu kůže.

Úvod do služby

1. vypouštění (kontrola objemu vypouštěného kyslíku)
2. láhev
3. rukojeť

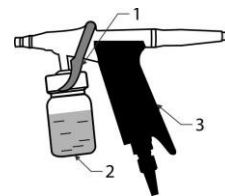


Příprava před použitím



Přidejte do čistou vodu nebo esenci

Pokyny:

- (1) Výběr Ikona SPRAY při výběru funkce přepne na rozhraní sprejování.

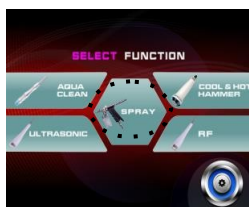

Zavedení rozhraní

1. doba přizpůsobení
2. aktivovat tlačítko pauzy
3. Ukončení aktuální funkční klávesy



- (2) Zvyšte nebo snižte čas na správnou hodnotu (doporučuje se 15 minut)

Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko pro spuštění.

Jak používat

- Po aktivaci příslušné funkce na displeji přidržíte rukojeť a jemně stisknout spoušť. Z trysky bude vycházet mlha, do které nalijte různé druhy tekutin; Po výměně za jinou kapalinu se hlava nejprve zastaví, vyčistí se. láhev, abyste do ní mohli nalít jinou tekutinu. Po postřiku by se měla funkce zastavit. Poté pomocí vatového tamponu nebo měkkého papíru odstraňte přebytečnou tekutinu z obličeje klienta.

Poznámky k použití:

- Pro kontrolu objemu mlhy je lepší stisknout spoušť do střední polohy, pokud stisknete spoušť až na doraz, snadno dojde k úniku příliš velkého množství vody. Návrat na
Při ošetření věnujte zvýšenou pozornost důležitým místům, jako jsou ústa, nos a oči, požádejte klienty, aby zavřeli oči a ústa, stříkejte mlhu z čela klienta, abyste vniknutí tekutiny do nosních dírek klienta. Vždy udržujte přiměřenou vzdálenost od obličeje klienta.

RF (rádiová frekvence)

Funkce: zahřívání tkáně, otevírání pórů, zkracování délky kolagenových vláken, zlepšuje jemné linky a vrásky, obnovuje pružnost pokožky a zlepšuje kontury obličeje.

Pokyny:

- (1) Stisknutím tlačítka RF v rozhraní pro výběr funkcí vstoupíte do



Zavedení rozhraní

- Úprava času
- Energetická lišta (Ukazuje energetický výkon
- Snížení spotřeby energie
- Zvyšování energie
- Výběr výstupního průběhu
- Ukončení aktuální funkční klávesy
- Tlačítko Start/Pauza



energie)

- (2) zvýšit  nebo snížit  na správný čas (doporučených 30 minut) ,

Poté stiskněte snížení energie nebo zvýšení energie na správnou výšku, Obvykle začněte vybírat výkon na druhé úrovni, měli byste jej vyzkoušet na ruce před zahájením léčby na klientovi. Klient může cítit mírné teplo.

Výstupní vlnový stav má na výběr ze tří režimů:  kontinuální vlnový výstupní stav ,  stav

smíšený vlnový výstup ,  široký pulzní výstupní stav . v případě potřeby výstupní vlnový stav, obecně začít vytáčet.  .

(2) Zvyšte nebo snižte na správnou dobu (doporučuje se 30 minut), poté stiskněte snížení energie nebo zvýšení energie na správnou hodnotu, Obvykle začněte vytáčet výkon na druhou úroveň, měli byste jej vyzkoušet na ruce před zahájením ošetření na klientovi. Klient může cítit mírné teplo.

Poznámky k použití:

1. Před ošetřením naneste na kůži gel nebo radiofrekvenční přípravek, nepoužívejte RF hlavici přímo na suchou kůži, RF hlavice musí být blízko kůže, nenechávejte ji ponechat kůži.
2. Pokud je teplota během používání příliš vysoká, jednoduše ji přesuňte na jiné části a pohybujte se rychleji v kruzích, čímž se teplota sníží; pokud teplota není dostatečně vysoká, aby se RF hlava pohybovala v kruhu pomaleji, teplota se bude pomalu zvyšovat.
3. Nedoporučuje se užívat v těhotenství nebo během kojení. Nedoporučuje se na citlivé oblasti, pokožku s traumatem, zarudnutím, zánětem, alergií nebo jinými kožními onemocněními.
4. Před zahájením ošetření odstraňte kovové příslušenství.

Ultrazvukový výkon:

- 1, Stimulace , odstranění zarudnutí: aplikace pulzní terapie

Ultrazvuk ve spolupráci s vhodným přípravkem aktivuje cévy a buněčný metabolismus a v důsledku mechanického působení ultrazvuku získává tepelný účinek a fyzikální a chemické působení, pro vhodnou stimulaci a masáž, rozšíření cév, stimulaci průtoku krve a metabolické funkce, může stimulovat krevní cévy k revitalizaci, odstraňuje efekt erytému.

- 2, Anti-akné terapie se silným účinkem na akné: existuje mnoho forem akné, je to jeden z častějších případů s hnisavými černými tečkami, dotek velmi bolestivý, nesprávná manipulace má tendenci vytvářet tvrdé jizvy. Ultrazvuk může ovlivnit lymfatické uzliny, krevní a lymfatický oběh, urychlit vystýlání zánětlivých buněk.

3, odstranění pih a zesvětlení skvrn: ultrazvuk dokáže odstranit pihy a hyperpigmentace, zabránit jejich vzniku, oslabit je a odstranit je pomocí metabolismu. Ultrazvuk dokáže zvýšit vstřebávání přípravků péče o pleť (jako jsou krémy, masky, ampule s rozjasňujícím účinkem atd.), Účinek Odstranění hyperpigmentace je viditelné po sérii ošetření.

4, Dekontaminace a absorpce: mechanická masážní funkce ultrazvuku slouží k regulaci podkožních buněk a zvýšení propustnosti buněčných membrán na jedné straně a ke zlepšení krevního oběhu a metabolismu na straně druhé. V kombinaci se správným prokrvením a zahrnutím produktů péče je účinek uspokojivý.

5, odstranění tmavých kruhů a otoků očí, díky účinku mechanické ultrazvukové masáže, může urychlit krevní a lymfatický oběh a účinek zahřívání tkáně, může rozbít tuk, urychlit vstřebávání účinných látek pokožkou, nadměrnou vlhkost a hromadění tuku. se rozptýlí, zmizí otoky a tmavé kruhy pod očima.

Pokyny:

(1) Stisknutím ultrazvukového tlačítka na rozhraní pro výběr funkcí v



Zavedení rozhraní

1. Úprava času
2. Energie (ukazuje energetický výkon)
3. Snížení spotřeby energie
4. Zvýšení energie
5. Výběr stavu výstupní vlny
6. Ukončení aktuální funkční klávesy
7. Tlačítko Start/Pauza



(2) Chcete-li zvýšit  nebo snížit  na správnou dobu (doporučených 20 minut) , stiskněte snížení energie nebo zvýšení energie na správnou

hodnoty, obvykle zvolte druhou úroveň ,  Výstupní vlnový stav má tři režimy na výběr ,  kontinuální vlnový výstupní stav ,  široký pulzní výstupní stav. Zvolte stav výstupní vlny, který potřebujeme, zpravidla vyberte odpovídající parametr. .

Před použitím ultrazvukové sondy naneste na kůži pleťovou vodu nebo ampuli a pohybujte ultrazvukovou sondou v kruhu zdola nahoru.

Poznámky:

1, Ultrazvukovou sondu udržíte v čistotě, po každém použití ji vyčistíte a sterilizujete alkoholem nebo jiným přípravkem.

jiným dezinfekčním prostředkem.

2, Nepřikládejte ultrazvukovou sondu na oční bulvu.

3, během ošetření aplikujete na pokožku správné množství účinné látky.

4, Doba ošetření by obecně neměla přesáhnout 15 minut. Osoby s malou plochou kůže by měly dobu ošetření odpovídajícím způsobem zkrátit. Sonda by neměla zůstat v určité poloze po dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození kožní tkáně.

5, V procesu léčby se vyhněte dlouhodobému používání ultrazvuku ve stavu maximální výdej energie, což nejen ovlivní vstřebávání pokožky, ale může dokonce poškodit kožní tkáň.

Kladivo teplo zima

Performance :

Terapie chladem

1, Terapie vhodná pro , kapilární těsnění.

2, Posiluje elastinová vlákna, dodává pleti napětí a pružnost, vyhlazuje vrásky, odstraňuje vrásky.

3, krevní cévy se zúží, čímž se účinně sníží erytém a recirkulace žil - snadněji se očistí a detoxikují.

4, Snižují nervovou citlivost, mají uklidňující účinek, zklidňují pokožku, otoky, bolest, zejména alergické pokožky mají dobrý podpurný účinek.

5, léčba chladem+ modré světlo může zmírnit zarudnutí kůže, má protizánětlivé účinky.


Tepelná terapie

1、 Mírně zahřívá, uvolňuje svaly, vyrovnává nervovou sebekázeň, zmírňuje bolest. 2、 Stimuluje krevní oběh, zvyšuje množství kyslíku v krvi, otevírá póry, rozšiřuje cévy, a tak se rychleji vstřebávají živiny.

3、 Zvyšuje rychlost metabolismu pokožky, zvyšuje přirozené vylučování toxinů.

Pokyny:

(1) Na displeji zvolte funkci kladiva hot-cold stiskněte enter na displeji

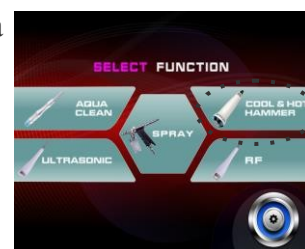

Zavedení rozhraní

1. Nastavení teploty

2. Start / stop

3. Chlazení kladiva

4. Kladívkový ohřev

5. Zobrazí aktuální

kladivo

6. Ukončení aktuální funkční klávesy



(2) Účinky na

výkon Komentáře:

1. Pro dosažení nejlepších výsledků očistěte obličej odličovacím přípravkem.
2. Nedovolte, aby horké a studené kladivo namočilo. Mělo by otírat suchým hadříkem.
3. Udržujte správné vyzařování tepla, neblokuje otvory pro vyzařování tepla.
4. Tento přístroj není určen pro osoby se špatnou fyzickou kondicí, pomalými reakcemi nebo duševními poruchami (včetně dětí), pokud nejsou bezpečně používány pod vedením nebo s pomocí osob odpovědných za bezpečné provedení postupu.
5. Děti by měly být pod dohledem, aby si s vybavením nehrály. Je třeba věnovat pozornost používání celého zařízení:
 1. Při práci dávejte pozor na upevnění a připojení k počítači a netahejte příliš za kabely.
 2. Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba jej nahradit speciálním kabelem nebo speciálními součástkami zakoupenými u výrobce nebo v jeho oddělení údržby.
 3. Pokud v průběhu provozu hostitele dojde k abnormálním situacím, okamžitě vypněte napájení a Odpojte síťovou zástrčku, obraťte se na prodejce a požádejte ho o kontrolu, bez povolení kryt neotvírejte.
 4. nepoužívejte ve vlhkých prostorách.
 5. Do blízkosti neumísťujte hořlavé nebo výbušné předměty.

V případě rozporů mezi výkresy v této příručce a skutečnými položkami mají přednost skutečné položky. Společnost si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat a vylepšení produktu. Výše uvedený obsah se může změnit bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu.

služby. Veškerý servis a opravy musí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk:

a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, s přístrojem skončíte.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. se do otvoru dostane cizí předmět vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto

typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro elektroodpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.