


ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

YOSHIDA 5-in-1 HYDROCLEAN-REINIGUNGSGERÄT
Modell - H5020

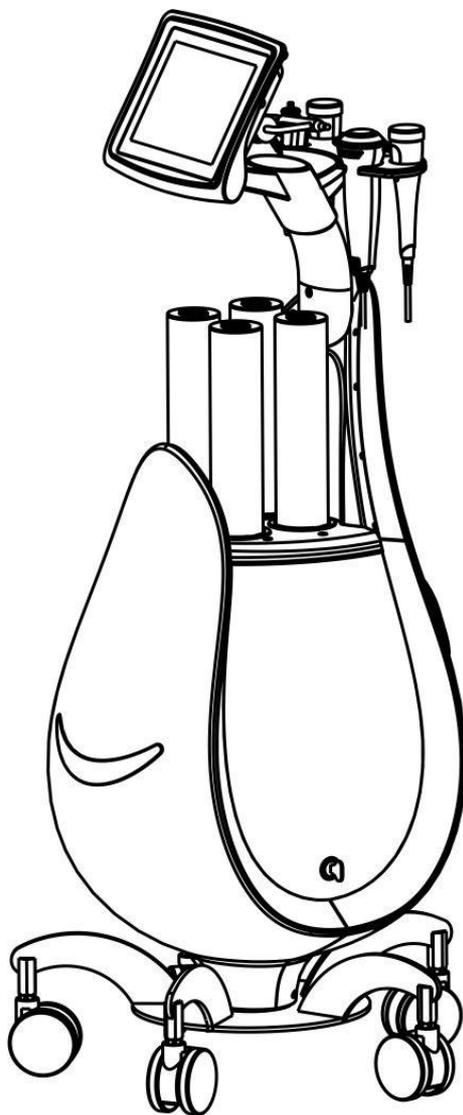

Importeur:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl





Dies ist kein medizinisches Produkt, bitte verwenden Sie es nicht zur medizinischen Behandlung!

Spezifikationen und technische Daten:

Name des Produkts	5 IN 1 Yoshida-Wasserstoffschäler
Artikel Nr.	H5020
Eigenschaften	Oxybrasion und Wasserstoff-Peeling, Ultraschall, RF, Spray, Hammerhitze - kalt
Nennspannung/Leistung	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Betriebsfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	190W
Abmessungen (LXBXH)	61*41*90.1cm
N.W.	50Kg


Packliste:

Name	Erscheinungsbild des Elements	Menge
Maschine		1 Satz
Stromkabel		1 Stück
RF-Kopf		1 Stück
Kopf Ultraschall		1 Stück
Hammerhitze - kalt		1 Stück
Airbrush zum Sprühen		1 Stück
Oxybrasion und Schälkopf Wasserstoff		1 Stück
Schleifkopf		1 Satz

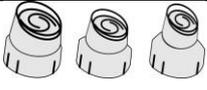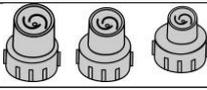Hartplastik Kopf		1 Satz
Kopf aus Silikon		1 Satz
Betriebsanleitung		1Kopie

Gebrauchsanweisung für das Gerät:

1. Bildschirm
2. Zubehör
3. Flaschen (A,B,C,D)
4. Schlüssel
5. Frontplatte
6. Zubehörträger
7. Anschlussbuchsen
8. Ein/Aus-Taste
9. Sicherung
10. Netzwerkbuchse

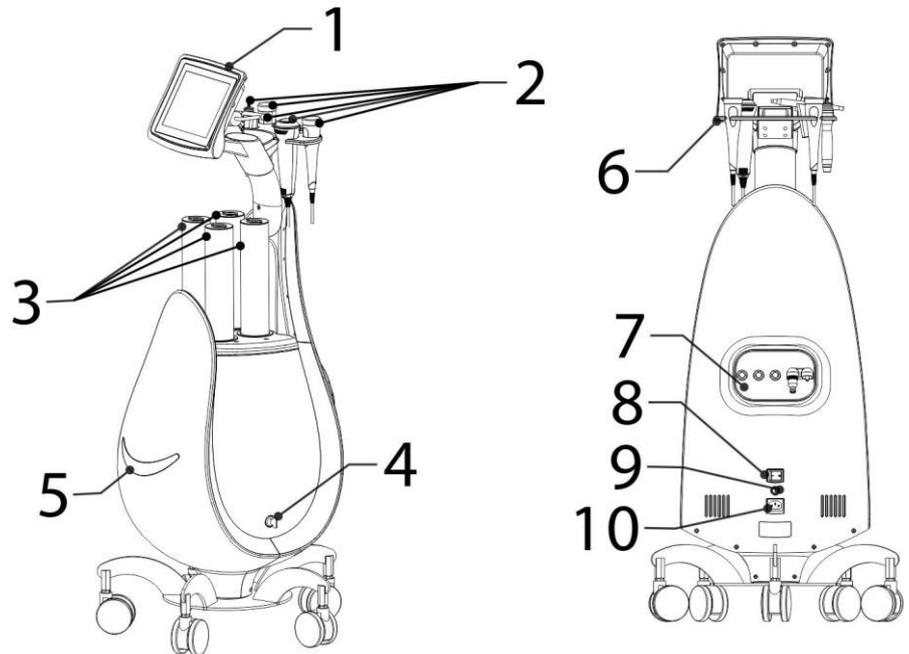

Anweisungen und Kommentare :

1. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation des Zubehörs.
- 2. Füllen Sie den Behälter mit Mineralwasser oder einer anderen Flüssigkeit in wässriger Form und öffnen Sie dann den oberen Knopf.**
3. Schalten Sie den Netzschalter an der Seite des Hauptrahmens ein. Das Licht des Netzschalters leuchtet auf.
4. Heben Sie den Bildschirm leicht an
5. Anzeige und Bedienung des Bildschirms: Einschalten des Geräts Funktionsauswahl - verschiedene Funktionen

6. Berühren Sie den Bildschirm, um die Funktionen auszuwählen

Funktionsauswahl:

1. Aqua Clean (Wasser- und Wasserstoffbehandlung)


2. Ultraschall

3. Spray

4. Einstellungen

5. RF

6. Hitze-Kälte-Hammer

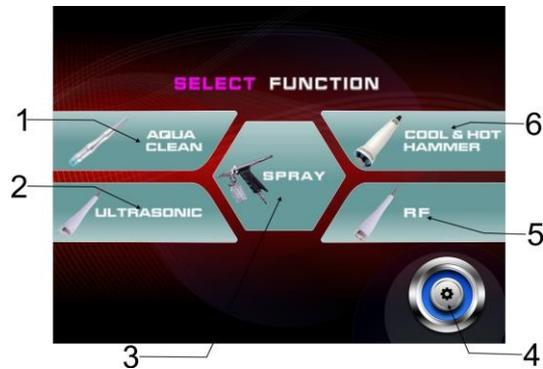

Gerätefunktionen

1. Aqua Clean (Tiefenreinigung)

2. Spray (Auftragung der Wirkstoffe tief in die Haut) .

3. RF (Lifting skin.) .

4. Ultraschall (Einbringen von Wirkstoffen tief in die Haut)

5. Wärme-Kälte-Hammer (Stimulation von Haut, Poren und Blutgefäßen) .

Operative Schritte:

Aqua-Clean-Funktion


Durch die Erzeugung eines Vakuums werden die ultrakleinen Bläschen und die Nährflüssigkeiten vollständig miteinander verbunden. Die speziell entwickelten kleinen spiralförmigen Saugköpfe wirken direkt auf der Haut und halten die ultrakleinen Bläschen lange in Kontakt mit der Haut, wodurch der Peelingeffekt verstärkt wird. Sie reinigen die Haut gründlich und entfernen alternde Keratinzellen und den Talg. Gründlich entfernen alle Unreinheiten, Milben und Talgrückstände aus den Haarfollikeln und versorgen die Haut mit Nährstoffen. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt, ist weich und glänzend.

Vorbereitung für den Einsatz

Spezielle Flüssigkeit oder Mineralwasser in die Flasche geben

1. Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Flasche...

2. Schrauben Sie die obere Abdeckung in Pfeilrichtung ab.


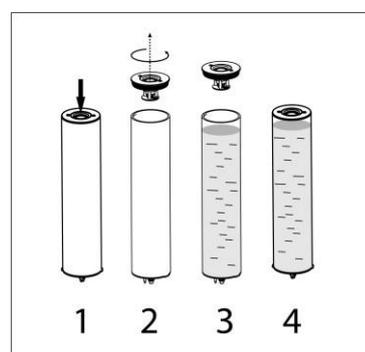


3. Spezielle Flüssigkeit oder Mineralwasser in die Flasche geben

4. Ziehen Sie die obere Abdeckung in der entgegengesetzten Richtung fest und drücken Sie den mittleren Knopf (siehe rechtes Bild).

5. Stecken Sie die Flaschen in die entsprechenden Steckplätze des Hosts. (siehe Abbildung unten)

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Einsetzen, ob der untere Dichtungsring intakt ist (siehe Zeichnung unten). Ein fehlender oder beschädigter Dichtungsring verursacht ein Leck! Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass kleine und das große Loch an den beiden Seiten passen, können Sie die Flasche nicht einsetzen. Setzen Sie die 4 Wasserflaschen in die entsprechenden Schlitze ein.

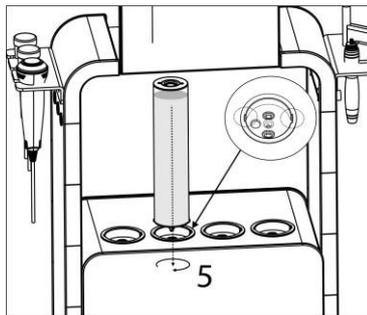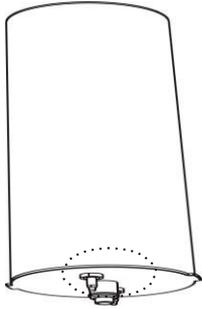


Gebrauchsanweisung

(1) Wählen Sie die Funktion Aqua auf dem Bildschirm.

MENÜ

1. Zeitersparnis
2. Zeitschaltuhr
3. Zeit erhöhen
4. Zurück zum Hauptmenü
5. Energieeinsparung
6. Energieriegel

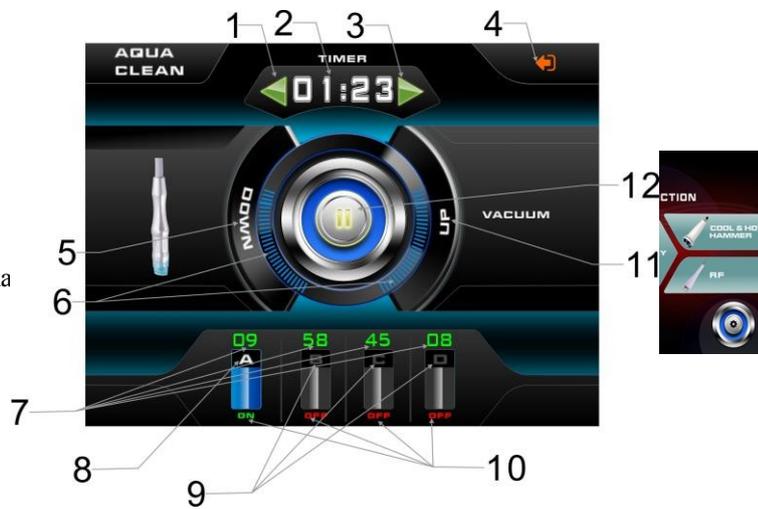

auf

7. Prozentsatz der verwendeten Wasserflaschen

8. Flasche A

(Aktiviert die Funktion für wasserstoffreiches Wasser)

9. Flasche B,C,D

10. Betriebszustand der Flasche

11. Steigende Energie

12. Schaltfläche "Start

(2). drücken Sie die Taste auf Mitte Deckel Flaschen

(sonst kann Wasser austreten), dann die Taste Zeit reduzieren

Erhöhen Sie die Zeit stellen Sie die Nutzungsdauer je nach Behandlung ein (empfohlen 15-20min), drücken Sie UP und DOWN, um die Saugleistung nach Bedarf einzustellen

(vorgeschlagene Erhöhung ab Stufe 2), wählen Sie die Flasche, die Sie benötigen, Sie können eine oder alle wählen, ABCD-Flaschen werden auf dem Bildschirm angezeigt, unten werden aktive Flaschen angezeigt

als ON , inaktive werden als OFF  angezeigt. In Flasche A ist es auch möglich, die

Wasserstoff-Wasser-Funktion, wenn sie in der Funktion  ist, klicken Sie erneut auf das Flaschensymbol ,

was bedeutet, dass die Hydrierungsfunktion aktiviert ist, wenn Sie diese deaktivieren möchten, klicken Sie einfach erneut auf das Zylinder-Symbol , um es zu schließen. Hinweis: Nur Zylinder A hat diese Funktion, B, C und D haben diese Funktion nicht.

Erläuterung: (Wasserstoffwasser) ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen in Wasser unlöslich, wobei eine Flüssigkeits-Gas-Mischtechnologie im Nanometerbereich zum Einsatz kommt und physikalische Methoden verwendet werden, um Wasserstoffmoleküle gleichmäßig um ein Wassermolekül herum zu verteilen, um eine stabile eine Kombination aus Wasserstoff und Wasser. Es zeichnet sich durch eine hohe Wasserstoffkonzentration und gute Stabilität aus. Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses und ungiftiges Gas. Die einzigartige Natur des Wasserstoffs stellt fest, dass Wasserstoff in der Biologie viele Vorteile hat. Das offensichtlichste Merkmal ist seine starke Durchdringung

Hautschichten, die leicht in jeden Teil der Zelle eindringen können, z. B. in den Zellkern und

Mitochondrien, daher hat wasserstoffreiches Wasser eine sehr starke antioxidative Funktion.

Stellen Sie den Prozentsatz des Wassers pro Flasche ein. Klicken Sie einfach auf die Zahl auf dem Bildschirm **45**, die Zahl erscheint dann oben.

1. Fenster zur Auswahl des Pin-Codes
2. Tastatur zur Auswahl des Pincodes
3. Löschung des Pin-Codes
4. Bestätigung des Pincodes und Ausgang



Klicken Sie in der Zahleneingabeoberfläche auf den Prozentsatz, der zur Eingabe der obigen Zahl erforderlich ist, z. B. geben Sie 23 ein, was bedeutet, dass 23 % des Wassers in der Flasche verbraucht werden.



drücken, speichert das System den Wert und verlässt die Schnittstelle. Wenn die Eingabe falsch ist,



Drücken Sie erneut enter.




Wenn Sie die gewünschte Zahl eingestellt haben, drücken Sie auf  Arbeit beginnen.

(3) Funktionen

Wählen Sie den gewünschten Schleifkopf und montieren Sie ihn auf das Spannfutter



, Drei Schleifköpfe zur Auswahl

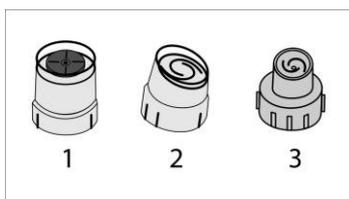

1. Schleifkopf
2. Kopf aus Hartplastik
3. Kopf aus Silikon


Der Schleifkopf eignet sich zum Abschleifen abgestorbener Haut. Die Hartplastikköpfe sind für die regelmäßige Anwendung auf der Haut geeignet. Verschiedene Modelle werden für die Reinigung der gesamten Oberfläche oder eines Teils des Gesichts verwendet.

Der Silikonkopf ist für empfindliche Haut geeignet und nicht reizend.

Die gesamte Gesichtsreinigung dauert 15-20 Minuten.

Anmerkungen zu den Operationen:

1. Wenn Flasche unter verwendet Flüssigkeit ist voll, auf Bildschirm erscheint erscheint auf dem Bildschirm Logo Warnlogo

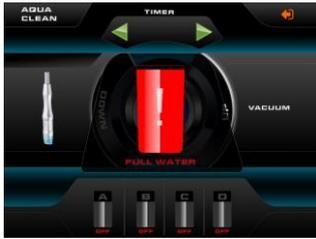


Öffnen Sie dann die hintere Tür der Maschine und entfernen Sie das Schmutzwasser aus der Flasche. Folgen Sie der Pfeilrichtung, reinigen Sie das Schmutzwasser und setzen Sie die Flasche wieder ein, a dann verwenden Sie es weiter.

2, Der Dichtungsring der Wasserflasche ist beschädigt, dies kann zu einem Leck führen. Wenn versehentlich ausläuft, schalten Sie sofort die Stromzufuhr ab,

Wasserflasche, trocknen Sie das Wasser mit einem trockenen Tuch ab und stellen Sie sie in einen belüfteten Ort, bis das Gerät trocken ist. Sie

Starten Sie das System neu. Öffnen Sie das Gerät nicht, Wasser ausläuft! sonst wird das Gerät zerstört!

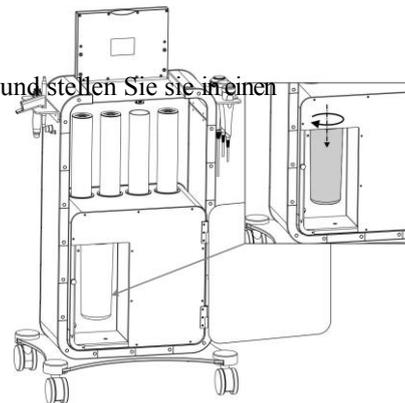

herausziehen

trocken,

Versuchen

wenn

Flasche

3. Wenn Sie das Gerät bewegen, drücken Sie die zurück, um die Wasserflasche geschlossen zu halten und ein Verschütten zu vermeiden.

4, Halten Sie den Schleifkopf sauber, reinigen Sie die Sonde nach jedem Gebrauch und verwenden Sie Alkohol oder andere Desinfektionsmittel, um den neuen Kopf zu sterilisieren oder zu ersetzen.

5, Die Behandlungszeit sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Menschen mit einem kleinen Hautareal im Gesicht sollte eine kürzere Behandlung durchgeführt werden. Eine zu lange Behandlung kann zu einem zu starken Peeling führen oder die Aufnahme der Wirkstoffe beeinträchtigen; das Handstück sollte nicht lange in einer Position verbleiben, um die Haut nicht zu schädigen.


6, Eine zu lange Peeling-Behandlung kann die Haut schädigen.

Sauerstoff-Wasser-Sprühfunktion

Effizienz: Wasser oder eine andere zu injizierende Substanz, erleichtert die Hautabsorption, die Sauerstoffversorgung der Haut, die Aktivierung der Hautzellen und die Ernährung der Haut.

Einführung in die Dienstleistung

1. Drain (Kontrolle der Sauerstoffausstoßmenge)
2. Flasche
3. Griff

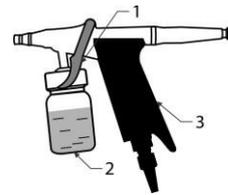


Vor dem Gebrauch vorbereiten



Sauberes Wasser oder Essenz in die geben

Anweisungen:

- (1) Auswahl Das SPRAY-Symbol schaltet bei der Auswahl einer Funktion auf die Sprayoberfläche um

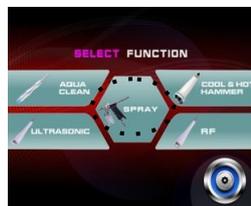

Einführung der Schnittstelle

1. Anpassungszeit
2. die Pausentaste aktivieren
3. Verlassen der aktuellen Funktionstaste



- (2) Erhöhen oder verringern Sie die Zeit (15 Minuten empfohlen). Sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie die Taste, um zu starten.

Wie zu verwenden

- Nachdem Sie die entsprechende Funktion auf dem Display aktiviert haben, halten Sie den Griff und drücken Sie den Abzug. Aus der Düse kommt ein Nebel, in den Sie verschiedene Arten von Flüssigkeiten gießen können;
Nach dem Wechsel auf eine andere Flüssigkeit wird der Kopf zunächst angehalten, die Flasche, um eine andere Flüssigkeit einzufüllen. Nach dem Sprühen sollte die Funktion gestoppt werden
Infusion, dann mit einem Wattestäbchen oder weichem Papier überschüssige Flüssigkeit vom Gesicht des Kunden entfernen.

Hinweise zur Verwendung:

- Es ist besser, den Abzug in die mittlere Position zu ziehen, um die Menge des Nebels zu kontrollieren.
Wenn Sie den Abzug ganz durchziehen, kann leicht zu viel Wasser austreten. Rückkehr
Achten Sie bei der verstärkt auf wichtige Stellen wie Mund, Nase und Augen. Bitten Sie die Kunden, Augen und Mund zu schließen, und sprühen Sie den Nebel von der Stirn des Kunden ab, um die Flüssigkeit in die Nasenlöcher des Kunden gelangt. Halten Sie immer einen angemessenen Abstand zum Gesicht des Kunden.


RF (Radiofrequenz)

Funktionen: Gewebeerwärmung, Porenöffnung, Verkürzung der Kollagenfasern,

verbessert feine Linien und Falten, stellt die Elastizität der Haut wieder her und verbessert die Gesichtskonturen

Anweisungen:

- (1) Drücken Sie RF in der Funktionsauswahloberfläche, um in die

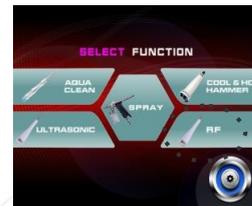

Einführung der Schnittstelle

1. Zeitliche Anpassung
2. Energiebalken (Zeigt die Energieabgabe
3. Energieeinsparung
4. Steigende Energie
5. Auswahl der Ausgangswellenform
6. Verlassen der aktuellen Funktionstaste
7. Taste Start/Pause



Energie)

- (2) Erhöhen Sie  oder verringern Sie  auf die richtige Zeit (empfohlene 30 Minuten) , .

Drücken Sie dann die Taste zum Verringern der Energie oder zum Erhöhen der Energie auf die richtige Höhe, normalerweise beginnen Sie mit der Auswahl der Leistung auf der zweiten Stufe, Sie sollten es an Ihrer Hand testen, bevor Sie die Behandlung am Klienten beginnen. Der Klient kann eine leichte Wärme spüren.

Für die Ausgangswellenform stehen drei Modi zur Auswahl:  continuous wave output state,  state gemischter Wellenausgang,  breiter Impulsausgangszustand. Falls erforderlich, Wellenausgangszustand, allgemeiner Wahlbeginn.  .

(2) Erhöhen oder verringern Sie den Wert auf die richtige Zeit (30 Minuten empfohlen), drücken Sie dann auf Energie verringern oder Energie erhöhen, um die richtige Menge, in der Regel starten Sie die Wahl der Leistung auf der zweiten Ebene, sollten Sie es auf Ihrer Hand, bevor Sie die Behandlung auf den Kunden. Der Klient kann eine leichte Wärme spüren.

Hinweise zur Verwendung:

1. Tragen Sie vor der Behandlung ein Gel oder ein Radiofrequenzpräparat auf die Haut auf, verwenden Sie den RF-Kopf nicht direkt auf trockener Haut, der RF-Kopf muss nahe an der Haut sein, lassen Sie ihn nicht Lassen Sie die Schalen stehen.
2. Wenn die Temperatur während des Gebrauchs zu hoch ist, verschieben Sie sie einfach an andere Stellen und bewegen Sie sich schneller im Kreis, um die Temperatur zu senken; wenn die Temperatur nicht hoch genug ist, den HF-Kopf langsamer im Kreis zu bewegen, wird die Temperatur langsam ansteigen.
3. Es wird nicht für die Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit empfohlen. Nicht empfohlen für empfindliche Bereiche, Haut mit Trauma, Rötungen, Entzündungen, Allergien oder andere Hauterkrankungen.
4. Entfernen Sie vor Beginn der Behandlung das Metallzubehör.

Ultraschall-Leistung:

- 1, Stimulation der Blutgefäße, Beseitigung von Rötungen: Anwendung der Pulstherapie
Ultraschall, der in Verbindung mit einem geeigneten Produkt zur Aktivierung der Blutgefäße und des Zellstoffwechsels wirkt und durch die mechanische Wirkung des Ultraschalls eine thermische Wirkung sowie eine physikalische und chemische Wirkung erzielt, kann zur geeigneten Stimulation und Massage, zur Gefäßerweiterung, zur Anregung des Blutflusses und der Stoffwechselfunktion beitragen.
regt die Blutgefäße zur Revitalisierung an, beseitigt die Wirkung von Erythemen.
- 2, Anti-Akne-Therapie mit einer starken Wirkung auf Akne: Es gibt viele Formen von Akne, es ist einer der häufigsten Fälle mit eitrigem Mitessern, berühren sehr schmerzhaft, unsachgemäße Behandlung neigt dazu, harte Narben zu bilden. Ultraschall kann die Lymphknoten, die Blut- und Lymphzirkulation beeinflussen, die Auskleidung von Entzündungszellen beschleunigen.

3, Beseitigung von Sommersprossen und Aufhellung von Flecken: Ultraschall kann Sommersprossen und Hyperpigmentierung beseitigen, ihre Bildung verhindern, sie schwächen und sie mit Stoffwechsel entfernen. Ultraschall kann die Absorption von Hautpflegeprodukten (wie Cremes, Masken, Ampullen mit aufhellender Wirkung usw.) erhöhen, Wirkung

Die Beseitigung der Hyperpigmentierung ist nach einer Reihe von Behandlungen sichtbar.

4, Dekontamination und Absorption: die mechanische Massagefunktion des Ultraschalls dient einerseits der Regulierung der subkutanen Zellen und der Erhöhung der Zellmembrandurchlässigkeit, andererseits der Verbesserung der Blutzirkulation und des Stoffwechsels. In Kombination mit der richtigen Blutzirkulation und die Einbeziehung von Pflegeprodukten, die Wirkung ist zufriedenstellend.

5, Beseitigung der dunklen Kreise und Schwellungen des Auges, dank der Wirkung der mechanischen Ultraschall-Massage, kann die Blut- und Lymphzirkulation zu beschleunigen, und die Wirkung der Erwärmung des Gewebes, kann Fett aufzubrechen, beschleunigen die Aufnahme von Wirkstoffen durch die Haut, übermäßige Feuchtigkeit und Fettansammlung werden abgebaut, Schwellungen und dunkle Ringe unter den verschwinden.

Anweisungen:

(1) Drücken Sie die Ultraschalltaste auf der Funktionsauswahloberfläche, um in den



Einführung der Schnittstelle

1. Zeitliche Anpassung
2. Energie (zeigt den Energieertrag)
3. Senkung des Energieverbrauchs
4. Erhöhung der Energie
5. Auswahl des Zustandes der Ausgangswelle
6. Verlassen der aktuellen Funktionstaste
7. Taste Start/Pause



(2) Zum Erhöhen von  oder Verringern von  auf die korrekte Zeit (empfohlene 20 Minuten), drücken Sie dann Energie verringern oder Energie auf die korrekte Zeit erhöhen

Werte, In der Regel wählen Sie die zweite Ebene,  Ausgangswellenzustand hat drei Modi zu wählen,  kontinuierliche Welle Ausgangszustand,  breiten Puls Ausgangszustand. Wählen Sie den Ausgangswellenzustand, den Sie benötigen, und wählen Sie den entsprechenden Parameter. 

Legen Sie die Lotion oder Ampulle auf die Haut, bevor Sie die Ultraschallsonde verwenden, und bewegen Sie die Ultraschallsonde kreisförmig von unten nach oben.

Anmerkungen:

1, Halten Sie die Ultraschallsonde sauber, reinigen Sie sie nach jedem Gebrauch und sterilisieren Sie sie mit Alkohol oder

mit einem anderen Desinfektionsmittel.

2, Legen Sie die Ultraschallsonde nicht auf den Augapfel.

3, Achten Sie während der Behandlung die richtige Menge des Wirkstoffs auf die Haut auftragen.

4, Im Allgemeinen sollte die Behandlungszeit 15 nicht überschreiten. Wer eine kleine Hautfläche hat, sollte die Behandlungszeit entsprechend verkürzen. Die Sonde sollte nicht über längere Zeit in einer bestimmten Position verbleiben, um eine Schädigung des Hautgewebes zu vermeiden.

5, In den Prozess der Behandlung, vermeiden längere Verwendung von Ultraschall in einem Zustand der maximaler Energieaufwand, was nicht nur die Hautabsorption beeinträchtigt, sondern sogar das Hautgewebe schädigen kann.

Hammer Hitze Kälte

Leistung :

Kältetherapie

1, Therapie gut für , Kapillarverschluss.

2, Stärkt die Elastinfasern, macht die Haut straff und elastisch, glättet Falten, beseitigt Krähenfüße.

3, die Blutgefäße verengen sich, wodurch Erytheme wirksam reduziert werden und die Venen wieder zirkulieren - sie leichter gereinigt und entgiftet werden.

4, Reduzieren Sie die Empfindlichkeit der Nerven, haben eine beruhigende Wirkung, beruhigen die Haut, Schwellungen, Schmerzen, vor allem für allergische Haut hat eine gute unterstützende Wirkung.

5, Kältebehandlung+ blaues Licht kann Hautrötungen lindern, hat entzündungshemmende Wirkung


Wärmetherapie

1、 Leichte Wärme, macht, entspannt die Muskeln, gleicht Nervenselbstdisziplin aus, lindert Schmerzen. 2、 Stimuliert die Blutzirkulation, erhöht die Menge an Sauerstoff im Blut, öffnet die Poren, erweitert die Blutgefäße und so werden Nährstoffe schneller absorbiert.

3、 Erhöht die Stoffwechselrate der Haut, erhöht die natürliche Ausscheidung von Giftstoffen.

Anweisungen:

(1) Wählen Sie die Hammerfunktion heiß-kalt auf dem Display drücken Sie enter auf dem Display

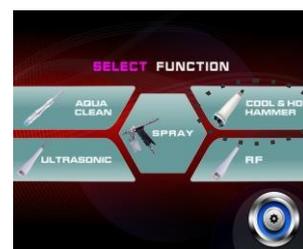

Einführung der Schnittstelle

1. Einstellung der Temperatur
2. Start / Stopp
3. Kühlung des Hammers
4. Hammerheizung
5. Zeigt die aktuelle Temperatur Hammer
6. Verlassen der aktuellen Funktionstaste



Temperatur

(2) Auswirkungen auf

die Leistung

Kommentare:

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem Make-up-Entferner, um beste Ergebnisse zu erzielen.
2. Achten Sie darauf, dass der Heiß- und Kalthammer nicht nass . Er sollte mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
3. Aufrechterhaltung einer angemessenen Wärmeabgabe, keine Blockierung der Wärmeabgabeöffnungen
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit schlechter körperlicher Verfassung, langsamen Reaktionen oder geistigen Störungen (einschließlich Kindern) bestimmt, es sei denn, sie werden sicher verwendet unter auf Anweisung oder mit Unterstützung von Personen, die für die sichere Durchführung des Verfahrens verantwortlich sind.
5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Es sollte darauf geachtet werden, dass das gesamte Gerät benutzt wird:

1. Achten Sie beim Arbeiten auf die Befestigung und den Anschluss an den Computer und ziehen Sie nicht zu stark an den Kabeln.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder spezielle Komponenten ersetzt werden, die beim Hersteller oder dessen Wartungsabteilung erworben werden.
3. Wenn während des Betriebs des Hosts ungewöhnliche Situationen auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und

Ziehen Sie den Netzstecker, wenden Sie sich zur Überprüfung an Ihren Händler, öffnen Sie das Gehäuse nicht ohne Erlaubnis.

4. in Feuchträumen aufstellen oder verwenden.
5. Stellen Sie keine brennbaren oder explosiven Gegenstände in der Nähe ab.

Im Falle von Abweichungen zwischen den Zeichnungen in diesem Handbuch und den tatsächlichen Gegenständen haben die tatsächlichen Gegenstände Vorrang. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, dieses Handbuch ständig zu aktualisieren und

Produktverbesserungen. Die oben genannten Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke zu verwenden.

Wartung. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst von ACTIV Tomasz Pacholczyk:

a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNGEN:

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art der Geräte. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.