


ACTIVESHOP®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ YOSHIDA 5 σε 1 HYDROCLEAN
Μοντέλο - H5020

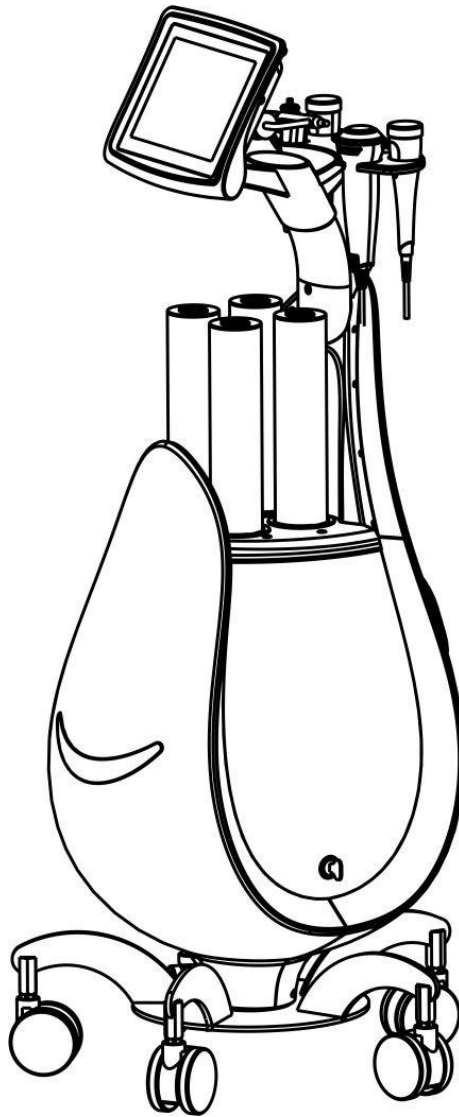

Εισαγωγέας:

ACTIV Tomasz Pacholczyk ul.
Graniczna 8b, bud. DC 1 54-610
Wrocław, Πολωνία
www.activeshop.com.pl



Αυτό δεν είναι ένα ιατρικό προϊόν, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιείτε για ιατρική θεραπεία!

Προδιαγραφές και τεχνικά στοιχεία:

Όνομα προϊόντος	5 IN 1 Αποφλοίωση υδρογόνου Yoshida
Αρ.	H5020
Χαρακτηριστικά	Απολέπιση με οξυγόνο και υδρογόνο, Υπέρηχος, RF, ψεκασμός, θερμότητα με σφυρί -. κρύο
Ονομαστική τάση/ισχύς	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Συχνότητα λειτουργίας	50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	190W
Διάσταση (LXWXH)	61*41*90.1cm
N.W.	50Kg


Λίστα συσκευασίας:

Όνομα	Εμφάνιση του στοιχείου	Ποσότητα
Μηχανή		1 σετ
Καλώδιο τροφοδοσίας		1 τεμάχιο
Κεφαλή RF		1 τεμάχιο
Επικεφαλής υπερηχογράφημα		1 τεμάχιο
Θερμότητα σφυριού - κρύο		1 τεμάχιο
Αερογράφος για ψεκασμό		1 τεμάχιο
Κεφαλή οξυχάραξης και απολέπισης υδρογόνο		1 τεμάχιο
Κεφαλή λείανσης		1 σετ

Σκληρό πλαστικό κεφάλι		1 σετ
Κεφαλή σιλικόνης		1 σετ
Οδηγίες λειτουργίας		1 αντίγραφο

Οδηγίες χρήσης της συσκευής:

1. Οθόνη προβολής
2. Αξεσουάρ
3. Μπουκάλια (A,B,C,D)
4. Βασικό
5. Μπροστινό πάνελ
6. Υποδοχή αξεσουάρ
7. Υποδοχές σύνδεσης
8. Κουμπί on/off
9. Ασφάλεια
10. Υποδοχή δικτύου

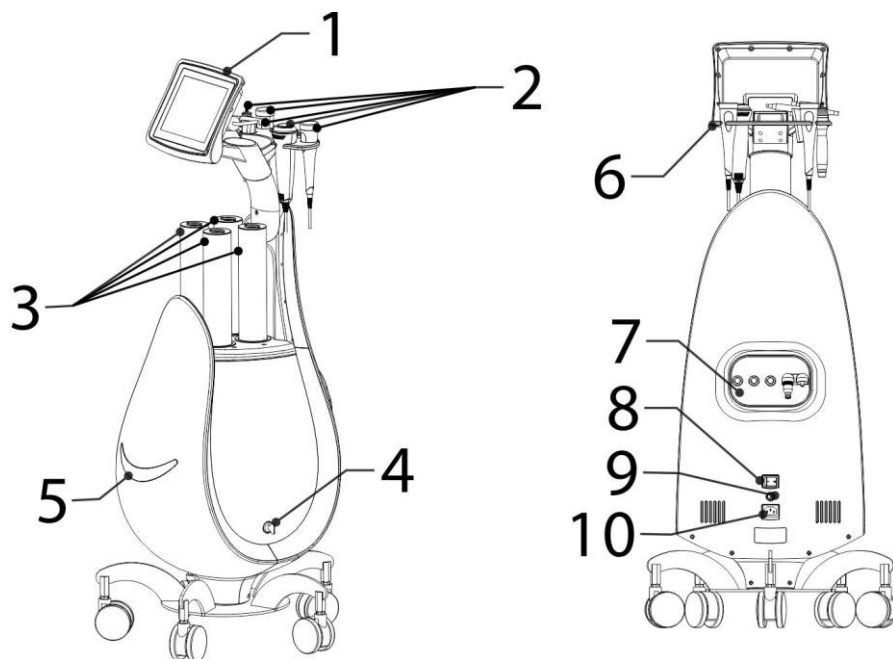


Οδηγίες και σχόλια :

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τα αξεσουάρ.
2. Γεμίστε το δοχείο με μεταλλικό νερό ή άλλο υγρό σε υδατική μορφή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το επάνω κουμπί.
3. Ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πλάι του κεντρικού πλαισίου. Η λυχνία του διακόπτη τροφοδοσίας θα ανάψει.
4. Ανασηκώστε ελαφρά την οθόνη
5. Οθόνη και λειτουργία οθόνης: Επιλογή λειτουργιών - διάφορες λειτουργίες

6. Αγγίξτε την οθόνη προβολής για να επιλέξετε τις λειτουργίες όπως απαιτείται

Επιλογή λειτουργίας:

1. Aqua Clean (καθαρισμός νερού και υδρογόνου)
2. Υπερηχογράφημα
3. Σπρέι
4. Ρυθμίσεις
5. RF
6. Σφυρί θερμότητας-κρύου

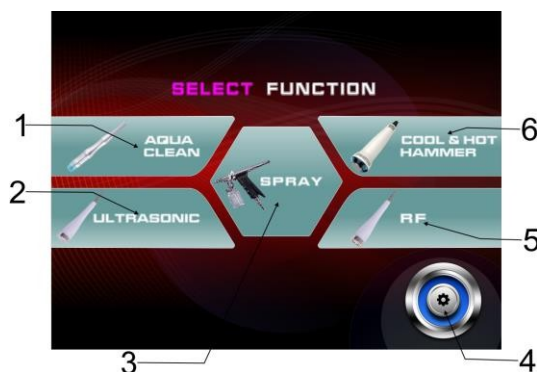

Λειτουργίες συσκευής

1. Aqua Clean (βαθύς καθαρισμός)
2. Ψεκάσμος (εφαρμογή των δραστικών ουσιών βαθιά στο δέρμα) .
3. RF (Ανάταση του δέρματος.) .
4. Υπέρηχοι (εφαρμογή δραστικών ουσιών βαθιά στο δέρμα)
5. Σφυρί θερμότητας-κρύου (διέγερση του δέρματος, των πόρων και των αιμοφόρων αγγείων) .

Λειτουργικά βήματα:

Λειτουργία Aqua Clean

Με τη δημιουργία κενού, οι εξαιρετικά μικρές φυσαλίδες και τα θρεπτικά υγρά συνδυάζονται πλήρως. Οι ειδικά σχεδιασμένες μικρές σπειροειδείς κεφαλές αναρρόφησης λειτουργούν απευθείας στο δέρμα, διατηρώντας τις εξαιρετικά μικρές φυσαλίδες σε επαφή με το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας το αποτέλεσμα της απολέπισης. Καθαρίζουν σε βάθος το δέρμα και απομακρύνουν τα κύτταρα κερατίνης της γήρανσης, αφαιρώντας το σμήγμα.


Ενδεδειγμένα

απομακρύνουν όλους τους ρύπους, τα ακάρεα και τα υπολείμματα σμήγματος από τους θύλακες της τρίχας και αναπληρώνουν το δέρμα με θρεπτικά συστατικά. Η επιδερμίδα είναι ενυδατωμένη, απαλή και λαμπερή.

Προετοιμασία για χρήση



Προσθέστε ειδικό υγρό ή μεταλλικό νερό στη φιάλη

1. Πατήστε το κουμπί στη μέση του μπουκαλιού...
2. Ξεβιδώστε το επάνω κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους.

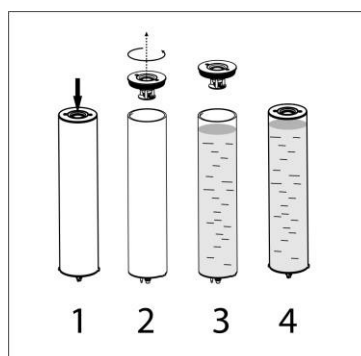

3. Προσθέστε ειδικό υγρό ή μεταλλικό νερό στη φιάλη
4. Σφίξτε το επάνω κάλυμμα προς την αντίθετη κατεύθυνση και πιέστε το μεσαίο κουμπί (βλ. δεξιά εικόνα).
5. Τοποθετήστε τις φιάλες στις κατάλληλες υποδοχές υποδοχής. (βλέπε εικόνα παρακάτω)

Σημείωση: Πριν από την τοποθέτηση, ελέγξτε ότι ο κάτω δακτύλιος στεγανοποίησης είναι άθικτος (βλ. σχέδιο παρακάτω). Ένας ελλιπής ή κατεστραμμένος δακτύλιος στεγανοποίησης θα προκαλέσει διαρροή! Κατά την τοποθέτηση, ελέγξτε τη μικρή και τη μεγάλη οπή στις δύο πλευρές για να βεβαιωθείτε ταιριάζουν δεν θα μπορέσετε να τον τοποθετήσετε. Τοποθετήστε τις 4 φιάλες νερού στις αντίστοιχες υποδοχές.

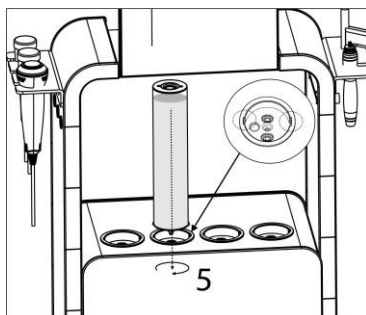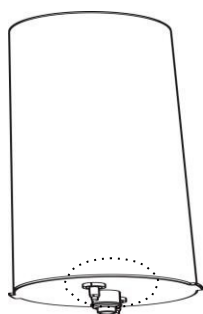


Οδηγίες χρήσης

(1) Επιλέξτε τη λειτουργία Aqua οθόνη.

MENΟΥ

1. Μείωση χρόνου
2. Χρονοδιακόπτης
3. Αύξηση του χρόνου
4. Επιστροφή στο κύριο μενού
5. Μείωση της ενέργειας
6. Μπάρα ενέργειας

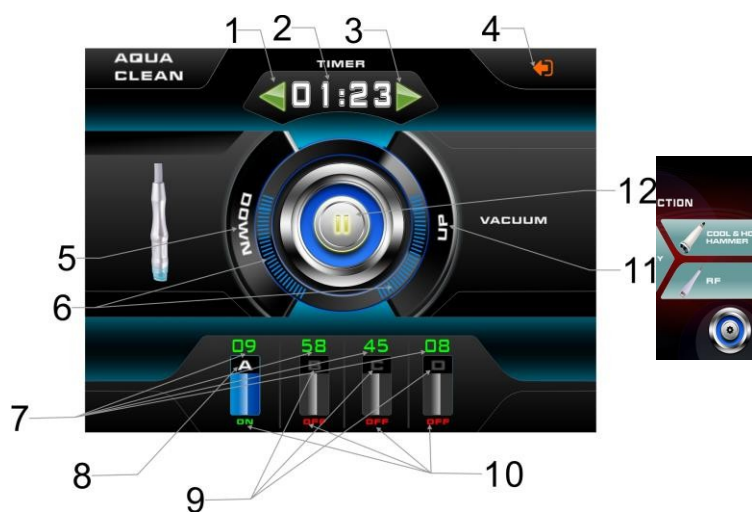

στο

7. Ποσοστό χρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού

8. Μπουκάλι Α

(Ενεργοποιεί τη λειτουργία νερού πλούσιου σε υδρογόνο)

9. Μπουκάλι Β, C, D

10. Κατάσταση λειτουργίας της φιάλης

11. Αύξηση της ενέργειας

12. Κουμπί έναρξης

(2). πατήστε το κουμπί στο κέντρο καπάκι
μπουκάλια

(αλλιώς μπορεί να διαρρεύσει νερό), στη συνέχεια πατήστε Reduce time



ή

Αύξηση του χρόνου  ρυθμίστε το χρόνο χρήσης, ανάλογα με τη θεραπεία που εκτελείται (προτείνεται 15-20 λεπτά), πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.

(προτεινόμενη αύξηση από το επίπεδο 2), επιλέξτε τη φιάλη που χρειάζεστε, μπορείτε να επιλέξετε μία ή όλες, οι φιάλες ABCD εμφανίζονται στην , στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι ενεργές φιάλες.

ως ON  , οι ανενεργές εμφανίζονται ως OFF  , Στη φιάλη Α είναι επίσης δυνατό να ενεργοποιηθούν

λειτουργία υδρογόνου νερού, όταν βρίσκεται στη λειτουργία  κάντε κλικ ξανά στο εικονίδιο της φιάλης  αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία υδρογόνωσης είναι ενεργοποιημένη. , όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ,

απλά κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο του κυλίνδρου  αυτό θα τον κλείσει. (Σημείωση : Μόνο ο κύλινδρος Α έχει αυτή τη λειτουργία, τα Β, C, D δεν έχουν αυτή τη λειτουργία) .

Επεξήγηση: (Υδρογόνο νερό) αναφέρεται επιστημονικά ότι είναι αδιάλυτο στο νερό με τη χρήση τεχνολογίας ανάμιξης υγρού-αερίου σε κλίμακα νανομέτρου και χρησιμοποιεί φυσικές μεθόδους για να περιβάλλει ομοιόμορφα τα μόρια υδρογόνου γύρω από ένα μόριο νερού για να προάγει σταθερό

έναν συνδυασμό υδρογόνου και νερού. Έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής συγκέντρωσης υδρογόνου και της καλής σταθερότητας. Το υδρογόνο είναι άχρωμο, άοσμο και μη τοξικό αέριο. Η μοναδική φύση του υδρογόνου καθορίζει ότι το υδρογόνο έχει πολλά πλεονεκτήματα στη βιολογία. Το πιο προφανές χαρακτηριστικό είναι η ισχυρή διεύρυσή του

στρώματα του δέρματος, τα οποία μπορούν εύκολα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου, όπως ο πυρήνας και οι

μιτοχόνδρια, οπότε το πλούσιο σε υδρογόνο νερό έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική λειτουργία.

Ρυθμίστε το ποσοστό νερού ανά φιάλη, απλά κάντε κλικ στον αριθμό στην **45**, ο αριθμός θα εμφανιστεί στην κορυφή

1. Παράθυρο επιλογής κωδικού ακίδας
2. Πληκτρολόγιο για την επιλογή κωδικού pin
3. Ακύρωση κωδικού Pin
4. Επιβεβαίωση κωδικού pin και έξοδος



Στη διεπαφή εισαγωγής αριθμών, κάντε κλικ στο ποσοστό που απαιτείται για την εισαγωγή του παραπάνω αριθμού, για παράδειγμα, εισάγετε 23, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται το 23% του νερού στη φιάλη.

πατήστε  το σύστημα αποθηκεύει την τιμή και εξέρχεται από τη διεπαφή. Εάν η εισαγωγή είναι λανθασμένη,

Πατήστε ξανά  enter.




Αφού ορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό, πατήστε Έναρξη εργασιών.

(3) λειτουργίες

Επιλέξτε την επιθυμητή κεφαλή λείανσης και τοποθετήστε την στο τσοκ.



, Τρεις κεφαλές λείανσης προς επιλογή

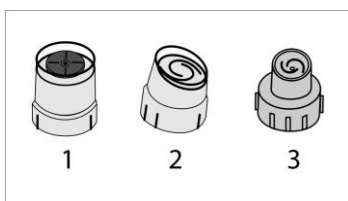

1. Κεφαλή λείανσης
2. Σκληρή πλαστική κεφαλή
3. Κεφαλή σιλικόνης

Η κεφαλή λείανσης είναι κατάλληλη για την απολέπιση του νεκρού δέρματος. Οι σκληρές πλαστικές κεφαλές είναι κατάλληλες για τακτική χρήση στο δέρμα. Τα διάφορα μοντέλα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας ή μέρους του προσώπου.

Η κεφαλή σιλικόνης είναι κατάλληλη για ευαίσθητο δέρμα και δεν προκαλεί ερεθισμούς.

Ολόκληρο το πλύσιμο του προσώπου διαρκεί 15-20 λεπτά.

Σημειώσεις σχετικά με τις εργασίες:

1. Όταν μπουκάλι στο χρησιμοποιημένο υγρό είναι γεμάτο, στο οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο προειδοποίησης



στη συνέχεια ολοκληρώστε την εργασία, ανοίξτε την πίσω πόρτα του μηχανήματος, αφαιρέστε το βρώμικο νερό από τη φιάλη. Ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους, καθαρίστε το βρώμικο νερό και τοποθετήστε τη φιάλη πίσω, ένα

τότε συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε.

- 2, Ο δακτύλιος στεγανοποίησης της φιάλης νερού έχει υποστεί ζημιά, αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή. Εάν διαρρέει κατά λάθος, απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή ρεύματος,

μπουκάλι νερό, στεγνώστε το νερό με ένα στεγνό πανί και τοποθετήστε το σε ένα

αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσει η μονάδα, το

επανεκκινήστε το σύστημα. Μην ανοίγετε τη μονάδα,

υπάρχει διαρροή νερού! Διαφορετικά, η μονάδα θα

καταστράφηκε!


3. Κατά τη μετακίνηση της μονάδας, πιέστε το

προς τα πίσω για να κρατήσετε το μπουκάλι νερού κλειστό για να αποφύγετε τη διαρροή.

- 4, Διατηρήστε την κεφαλή άλεσης καθαρή, καθαρίστε τον καθετήρα μετά από κάθε χρήση και χρησιμοποιήστε οινόπνευμα ή άλλα απολυμαντικά εργαλεία για να αποστειρώσετε ή να αντικαταστήσετε τη νέα κεφαλή.

- 5, Ο χρόνος θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Άτομα με μικρή περιοχή δέρματος στο πρόσωπο θα πρέπει να έχουν συντομότερη θεραπεία. Η πολύ μεγάλη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική απολέπιση ή σε μειωμένη απορρόφηση των δραστικών ουσιών- η συσκευή χειρός δεν πρέπει να παραμένει σε μια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη του δέρματος.

- 6, Μια πολύωρη θεραπεία απολέπισης μπορεί να βλάψει το δέρμα.

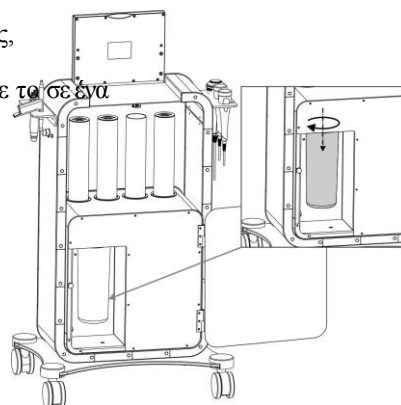

τραβήξτε

στεγνό,

Δοκιμάστε

όταν


μπουκάλι

Λειτουργία ψεκασμού νερού οξυγόνου

Αποδοτικότητα: το νερό ή άλλη ουσία προς έγχυση, διευκολύνει την απορρόφηση του δέρματος, την οξυγόνωση του δέρματος, την ενεργοποίηση των κυττάρων του δέρματος, τη θρέψη του δέρματος.

Εισαγωγή στην υπηρεσία

1. Αποστράγγιση (έλεγχος του όγκου εκτόξευσης οξυγόνου)
2. μπουκάλι
3. λαβή

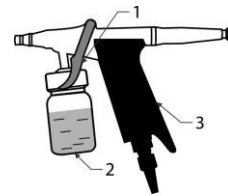


Προετοιμάστε πριν από τη χρήση



Προσθέστε καθαρό νερό ή ουσία στο

Οδηγίες:

- (1) Επιλογή Το εικονίδιο SPRAY κατά την επιλογή μιας λειτουργίας μεταβαίνει στη διεπαφή ψεκασμού.

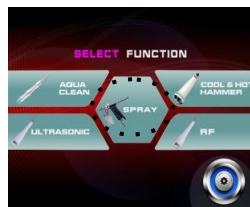

Εισαγωγή της διεπαφής

1. χρόνος προσαρμογής
2. ενεργοποίηση του πλήκτρου παύσης
3. Έξοδος από το τρέχον πλήκτρο λειτουργίας



- (2) Αυξήστε ή μειώστε το χρόνο στο σωστό χρονικό διάστημα (συνιστάται 15 λεπτά)
Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε

- Αφού ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία στην οθόνη, κρατήστε τη λαβή και απαλά τραβήξτε τη σκανδάλη. Από το ακροφύσιο θα βγαίνει μια ομίχλη, ρίξτε σε αυτό διαφορετικούς τύπους υγρών, Μετά την αλλαγή σε διαφορετικό υγρό, η κεφαλή σταματά πρώτα, καθαρίζει το μπουκάλι για να τοποθετήσετε ένα άλλο υγρό σε αυτό. Μετά τον ψεκασμό, η λειτουργία πρέπει να σταματήσει. έγχυση, Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ή ένα μαλακό χαρτί για να απομακρύνετε την περίσσεια του υγρού από το πρόσωπο του πελάτη.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση:

- Είναι καλύτερα να τραβήξετε τη σκανδάλη στη μεσαία θέση για να ελέγξετε τον όγκο της ομίχλης, εάν τραβήξετε τη σκανδάλη μέχρι τέρμα, είναι εύκολο να προκαλέσετε υπερβολική διαρροή νερού.

Επιστροφή

Δώστε μεγαλύτερη προσοχή σε σημαντικές θέσεις όπως το στόμα, η μύτη και τα μάτια κατά την εκτέλεση της θεραπείας. Ζητήστε από τους πελάτες να κλείσουν τα μάτια και το στόμα τους, Ψεκάστε ομίχλη από το μέτωπο του πελάτη για να την εισοδο του υγρού στα ρουθούνια των πελατών. Διατηρείτε πάντα την κατάλληλη απόσταση από το πρόσωπο των πελατών.

RF (ραδιοσυχνότητα)

Λειτουργίες: θέρμανση ιστών, άνοιγμα πόρων, μείωση μήκους ινών κολλαγόνου,

βελτίωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων, αποκατάσταση της ελαστικότητας του δέρματος και βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου

Οδηγίες:

- (1) Πατήστε RF στη διεπαφή επιλογής λειτουργίας για να εισέλθετε



Εισαγωγή της διεπαφής

1. Ρύθμιση χρόνου
2. Γραμμή ενέργειας (Δείχνει την παραγωγή ενέργειας)
3. Μείωση της ενέργειας
4. Αύξηση της ενέργειας
5. Επιλογή κυματομορφής εξόδου
6. Έξοδος από το τρέχον πλήκτρο λειτουργίας
7. Κουμπί Έναρξη / Παύση



ενέργεια)

- (2) αυξήστε ή μειώστε στο σωστό χρόνο (συνιστάται 30 λεπτά) ,

Στη συνέχεια, πατήστε μείωση της ενέργειας ή αύξηση της ενέργειας στο σωστό επίπεδο, Συνήθως αρχίζετε να επιλέγετε την ισχύ στο δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να το δοκιμάσετε στο χέρι σας πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία στον πελάτη . Ο πελάτης μπορεί να αισθανθεί μια ελαφρά ζεστασιά.

Η κατάσταση του κύματος εξόδου έχει τρεις λειτουργίες για να επιλέξετε,  κατάσταση εξόδου συνεχούς κύματος,  κατάσταση μικτή έξοδος κύματος,  ευρεία κατάσταση εξόδου παλμού . Εάν είναι απαραίτητο, κατάσταση κύματος εξόδου, γενικά έναρξη κλήσης.  .

(2) Αύξηση ή μείωση στο σωστό χρόνο (30 λεπτά συνιστώμενα), Στη συνέχεια, πατήστε μείωση της ενέργειας ή αύξηση της ενέργειας στο σωστό ποσό, Συνήθως αρχίστε να καλείτε την ισχύ δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να το δοκιμάσετε στο χέρι σας πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία στον πελάτη . Ο πελάτης μπορεί να αισθανθεί μια ελαφριά ζεστασιά.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση:

1. Εφαρμόστε ένα τζελ ή ένα παρασκεύασμα ραδιοσυχνοτήτων στο δέρμα πριν από τη θεραπεία, Μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή RF απευθείας σε ξηρό δέρμα, η κεφαλή RF πρέπει να είναι κοντά στο δέρμα, Μην την αφήνετε να αφήστε τις φλούδες.
2. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή κατά τη χρήση, απλά μετακινήστε το σε άλλα μέρη και κινηθείτε σε κύκλους πιο γρήγορα, αυτό θα μειώσει τη θερμοκρασία- Εάν η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά υψηλή, Για να μετακινήσετε την κεφαλή RF στον κύκλο πιο αργά, η θερμοκρασία θα αυξηθεί αργά.
3. Δεν συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας. Δεν συνιστάται για ευαίσθητες περιοχές, δέρμα με τραύμα, ερυθρότητα, φλεγμονή, αλλεργίες ή άλλες δερματικές παθήσεις.
4. Αφαιρέστε τα μεταλλικά εξαρτήματα πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Απόδοση υπερήχων:

- 1, Διέγερση των αιμοφόρων αγγείων, εξάλειψη της ερυθρότητας: εφαρμογή παλμοθεραπείας
Οι υπέρηχοι, που συνεργάζονται με ένα κατάλληλο προϊόν για την ενεργοποίηση των αιμοφόρων αγγείων και του κυτταρικού μεταβολισμού και, ως αποτέλεσμα της μηχανικής δράσης των υπερήχων, επιτυγχάνουν θερμικό αποτέλεσμα και φυσική και χημική δράση, για κατάλληλη διέγερση και μασάζ, αγγειοδιαστολή, διέγερση της ροής του αίματος και της μεταβολικής λειτουργίας, μπορούν να διεγείρουν τα αιμοφόρα αγγεία για να αναζωογονηθούν, εξαλείφει την επίδραση του ερυθήματος.
- 2, θεραπεία κατά της ακμής με ισχυρή επίδραση στην ακμή: υπάρχουν πολλές μορφές ακμής, είναι μία από τις πιο συχνές περιπτώσεις με πυώδη σπυράκια, αγγίζουν πολύ επώδυνα, ο ακατάλληλος χειρισμός τείνει να σχηματίζει σκληρές ουλές. Το υπερηχογράφημα μπορεί να επηρεάσει τους λεμφαδένες, την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, να επιταχύνει την επένδυση των φλεγμονωδών κυττάρων.

3, Εξάλειψη των φακίδων και ελάφρυνση των κηλίδων: ο υπέρηχος μπορεί να εξαλείψει τις φακίδες και την υπερμελάγχρωση, να αποτρέψει το σχηματισμό τους, να τις αποδυναμώσει και να τις αφαιρέσει με το μεταβολισμό. Οι υπέρηχοι μπορούν να αυξήσουν την απορρόφηση των προϊόντων περιποίησης του δέρματος (όπως κρέμες, μάσκες, αμπούλες με φωτεινή δράση κ.λπ.), Επίδραση

Η αφαίρεση της υπερμελάγχρωσης είναι ορατή μετά από μια σειρά θεραπειών.

4, Απολύμανση και απορρόφηση: η λειτουργία μηχανικού μασάζ των υπέρηχων χρησιμεύει στη ρύθμιση των υποδόριων κυττάρων και στην αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης, αφενός, και στην ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος και του μεταβολισμού, αφετέρου. Σε συνδυασμό με τη σωστή κυκλοφορία του αίματος και η συμπερίληψη προϊόντων φροντίδας, το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό.

5, Εξάλειψη των σκοτεινών κύκλων και του πρηξίματος του ματιού, χάρη στην επίδραση του μηχανικού μασάζ με υπέρηχους, μπορεί να επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου και την επίδραση της θέρμανσης του ιστού, μπορεί να διασπάσει το λίπος, να επιταχύνει την απορρόφηση των δραστικών συστατικών από το δέρμα, την υπερβολική υγρασία και τη συσσώρευση λίπους διαλύονται, το πρήξιμο και οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα εξοφανίζονται.

Οδηγίες:

(1) Πατήστε το κουμπί υπέρηχων στη διεπαφή επιλογής λειτουργιών για να εισέλτε



Εισαγωγή της διεπαφής

1. Ρύθμιση χρόνου
2. Ενέργεια (δείχνει την παραγωγή ενέργειας)
3. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
4. Αύξηση της ενέργειας
5. Επιλογή της κατάστασης του κύματος εξόδου
6. Έξοδος από το τρέχον πλήκτρο λειτουργίας
7. Κουμπί Έναρξη / Παύση



(2) Για να αυξήσετε  ή να μειώσετε  στο σωστό χρόνο (συνιστάται 20 λεπτά) , στη συνέχεια πατήστε μείωση ενέργειας ή αύξηση ενέργειας στο σωστό

τιμές, Συνήθως επιλέγετε το δεύτερο επίπεδο,  Η κατάσταση κύματος εξόδου έχει τρεις τρόπους επιλογής,

 κατάσταση εξόδου συνεχούς κύματος,  κατάσταση εξόδου ευρέος παλμού. Επιλέξτε την κατάσταση

κύματος εξόδου που χρειαζόμαστε, επιλέξτε γενικά την αντίστοιχη παράμετρο. 

Τοποθετήστε τη λοσιόν ή την αμπούλα στο δέρμα πριν από τη χρήση του καθετήρα υπέρηχων, Μετακινήστε τον καθετήρα υπέρηχων κυκλικά από κάτω προς τα πάνω.

Σημειώσεις:

1, Κρατήστε τον υπερηχητικό καθετήρα καθαρό, καθαρίστε τον μετά από κάθε χρήση και αποστειρώστε τον με αλκοόλ ή

με άλλο απολυμαντικό.

2, Μην τοποθετείτε τον καθετήρα υπερήχων στον βολβό του ματιού.

3, ότι εφαρμόζετε τη σωστή ποσότητα δραστικής στο δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

4, Γενικά, ο χρόνος θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Όσοι έχουν μικρή περιοχή δέρματος θα πρέπει να μειώσουν ανάλογα το χρόνο θεραπείας. Ο καθετήρας δεν πρέπει να παραμένει σε μια συγκεκριμένη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη του δερματικού ιστού.

5, Κατά τη διαδικασία της θεραπείας, αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση υπερήχων σε κατάσταση μέγιστης ενεργειακής δαπάνης, η οποία όχι μόνο θα επηρεάσει την απορρόφηση του δέρματος, αλλά μπορεί ακόμη και να βλάψει τον ιστό του δέρματος.

Σφυρί θερμότητα κρύο

Απόδοση :

Ψυχοθεραπεία

1, Θεραπεία καλή για , σφράγιση τριχοειδών.

2, Ενισχύει τις ίνες ελαστικής, κάνει το δέρμα σφιχτό και ελαστικό, εξομαλύνει τις ρυτίδες, εξαλείφει τα πόδια της χήνας.

3, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, μειώνοντας αποτελεσματικά το ερύθημα και την ανακυκλοφορία των φλεβών - ευκολότερη καθαριότητα και αποτοξίνωση.

4, Μειώστε την ευαισθησία των νεύρων, έχετε ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα, καταπραΰνετε το δέρμα, το πρήξιμο, τον πόνο, ειδικά για το αλλεργικό δέρμα έχει ένα καλό υποστηρικτικό αποτέλεσμα.

5, ψυχρή θεραπεία+ το μπλε φως μπορεί να ανακουφίσει την ερυθρότητα του δέρματος, έχει αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα


Θερμοθεραπεία

1, Ελαφρά θερμότητα, κάνει, χαλαρώνει τους μυς, εξισορροπεί την αυτοπειθαρχία των νεύρων, ανακουφίζει από τον πόνο. 2, Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την ποσότητα του οξυγόνου στο αίμα, ανοίγει τους πόρους, διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και έτσι τα θρεπτικά συστατικά απορροφώνται γρηγορότερα.

3, Αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό του δέρματος, αυξάνει τη φυσική αποβολή των τοξινών.

Οδηγίες:

(1) Επιλέξτε τη λειτουργία σφυρί θερμό-ψυχρό στην πατήστε enter στην οθόνη

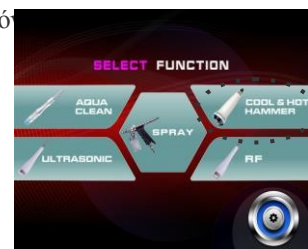

Εισαγωγή της διεπαφής

1. Ρύθμιση θερμοκρασίας
2. Έναρξη/διακοπή
3. Ψύξη του σφυριού
4. Θέρμανση με σφυρί
5. Εμφανίζει την τρέχουσα σφυρί



θερμοκρασία

6. Έξοδος από το τρέχον πλήκτρο λειτουργίας

(2) Επιπτώσεις στην

απόδοση Σχόλια:

1. Καθαρίστε το πρόσωπό σας με ένα προϊόν αφαίρεσης μακιγιάζ για καλύτερα αποτελέσματα.
2. Μην αφήνετε το ζεστό και το κρύο σφυρί βραχύν. Πρέπει σκουπίζεται με στεγνό πανί.
3. Διατηρήστε τη σωστή εκπομπή θερμότητας, μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εκπομπής θερμότητας
4. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με κακή φυσική κατάσταση, αργές αντιδράσεις ή διανοητικές διαταραχές (και συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν χρησιμοποιούνται με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση ή με τη συνδρομή προσώπων που είναι υπεύθυνα για την ασφαλή εκτέλεση της διαδικασίας.

5. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τον εξοπλισμό.

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στη χρήση ολόκληρου του μηχανήματος:

1. Κατά την εργασία, προσέξτε την προσάρτηση και τη σύνδεση με τον υπολογιστή και μην τραβάτε υπερβολικά τα καλώδια.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή ειδικά εξαρτήματα που θα αγοραστούν από τον κατασκευαστή ή το τμήμα συντήρησης.
3. Αν προκύψουν μη φυσιολογικές καταστάσεις κατά τη διαδικασία λειτουργίας του κεντρικού υπολογιστή, απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή ρεύματος και Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επιθεώρηση, μην ανοίγετε το περίβλημα χωρίς άδεια.
4. τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους.
5. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αντικείμενα στην περιοχή.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των σχεδίων του παρόντος εγχειριδίου και των πραγματικών στοιχείων, τα πραγματικά στοιχεία υπερισχύουν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει συνεχώς και να βελτιώσει προϊόντων. Τα παραπάνω περιεχόμενα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να τη χρησιμοποιήσετε για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

υπηρεσία. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη μονάδα.

4. Αφαιρέστε αμέσως το φιλτράρισμα από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η ACTIV Tomasz Pacholczyk στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.

5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να το καλώδιο τροφοδοσίας.

6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε που τελειώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.

7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. εισέλθει ξένο αντικείμενο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.

8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).

10. Το τροφοδοτικό πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.

2. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.

3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, επομένως η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτής της

τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Η μονάδα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες