


ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

YOSHIDA 5-in-1 HYDROCLEAN
Mudel - H5020

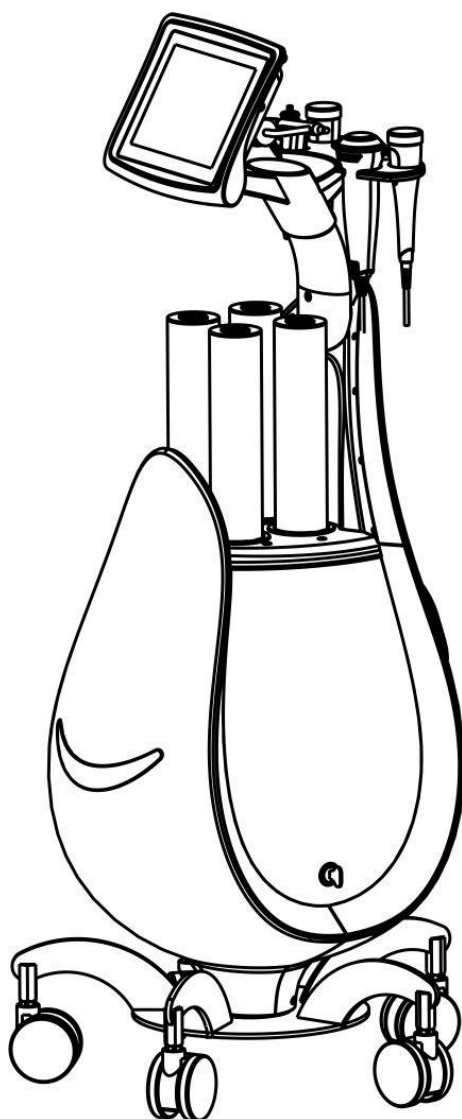

Importija:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl



See ei ole meditsiiniline toode, palun ärge kasutage seda meditsiiniliseks raviks!

Spetsifikatsioonid ja tehnilised andmed:

Toote nimi	5 IN 1 Yoshida vesinikkoorimine
Artikli nr.	H5020
Omadused	Oksübrasioon ja vesinikkoorimine, Ultraheli、RF、spray、hammer heat - külm
Nimipinge/võimsus	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Töösagedus	50/60Hz
Nimivõimsus	190W
Mõõtmed (LXWXH)	61*41*90.1cm
N.W.	50Kg


Pakkide nimekiri:

Nimi	Elemendi välimus	Kogus
Masin		1 komplekt
Toitekaabel		1 tk
RF pea		1 tk
Pea ultraheli		1 tk
Haamri soojus - külm		1 tk
Airbrush pihustamiseks		1 tk
Oksübrasioon ja koorimine vesinik		1 tk
Lihvimispea		1 komplekt

Kõva plastik pea		1 komplekt
Silikoonist pea		1 komplekt
Kasutusjuhend		1koopia

Seadme kasutusjuhend:

1. Ekraan
2. Tarvikud
3. Pudelid (A,B,C,D)
4. Key
5. Esipaneel
6. Tarvikute hoidja
7. Ühenduspesad
8. Sisse/välja nupp
9. Kaitsmed
10. Võrgupesa

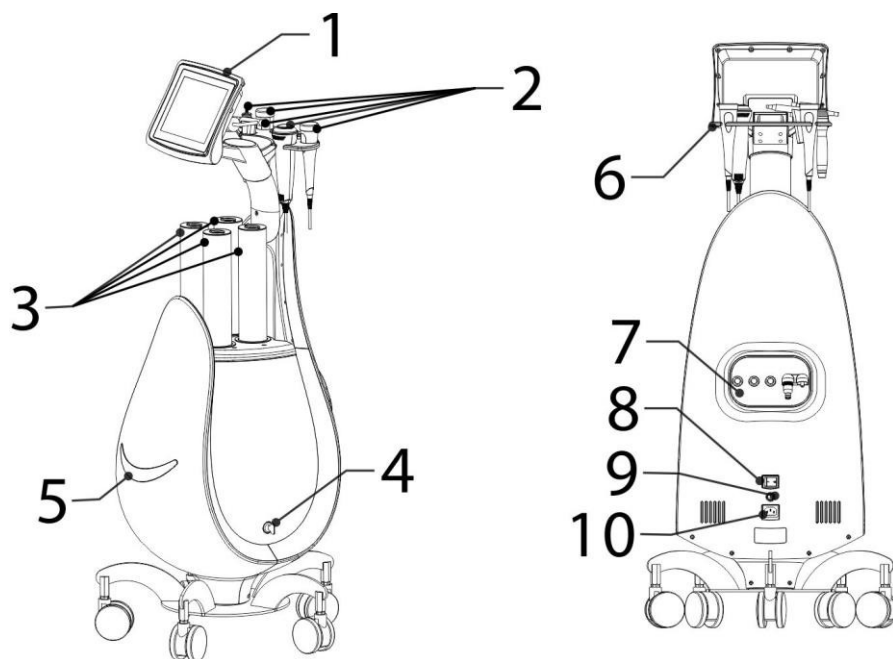

Juhised ja kommentaarid :

1. Järgige tarvikute paigaldamise juhiseid.
- 2. Täitke mahuti mineraalveega või muu vesialuselise vedelikuga, seejärel avage ülemine nupp.**
3. Lülitage sisse põhiraami küljel olev toitelüliti. Toitelüliti valgus süttib.
4. Tõstke ekraani kergelt üles
5. Ekraani ja ekraani töö: Toite sisselülitamine Funktsiooni valik - erinevad funktsioonid

6. Puudutage ekraani, et valida funktsioone vastavalt vajadusele

Funktsiooni valik:

1. Aqua Clean (vee ja vesiniku töötlemine)


2. Ultraheli

3. Pihustus

4. Seaded

5. RF

6. Kuum-külm haamer

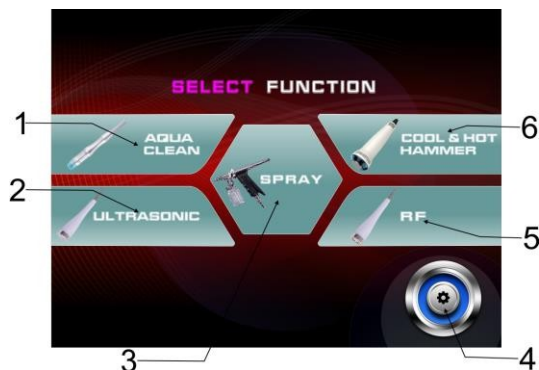

Seadme funktsioonid

1. Aqua Clean (sügavpuhastus)

2. toimeainete pihustamine sügavale nahale (.)

3. RF (Naha tõstmine.) .

4. Ultraheli (manustamine sügavale naha sisse)

5. Kuum-külm haamer (naha, pooride ja veresoonte stimuleerimine) .

Operatiivsed sammud:

Aqua Clean funktsioon


Vaakumi loomisega ühendatakse üliväikesed mullid ja toitevedelik täielikult. Spetsiaalselt disainitud väikesed spiraalsed imemispead töötavad otse nahal, hoides üliväikesed mullid pikalt nahaga kontaktis, suurendades koorimise efekti. Nad puhastavad nahka sügavuti ja eemaldavad vananevaid keratiinirakke, eemaldades rasu. Põhjalikult eemaldavad juuksefolliikulistest kõik ebapuhtused, lestad ja rasujäägid ning varustavad nahka toitainetega. Nahk on niisutatud, pehme ja läikiv.

Ettevalmistus kasutamiseks

Lisage pudelisse spetsiaalset vedelikku või mineraalvett

1. Vajutage nuppu pudeli keskel...



2. Keerake ülemine kate noole suunas lahti.

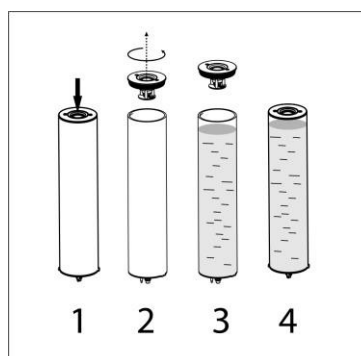

3. Lisage pudelisse spetsiaalset vedelikku või mineraalvett
4. Pingutage ülemist katet vastupidises suunas ja vajutage keskmist nuppu (vt paremal olev pilt).
5. Sisestage pudelid vastavatesse peremeespoltidesse. (vt allolevat pilti)

Märkus: Enne sisestamist kontrollige, et alumine tihendusrõngas oleks terve (vt.

joonis allpool). Puuduv või kahjustatud tihendusrõngas põhjustab lekke! Paigaldamisel kontrollige, et väike ja suur auk mõlemal küljel ei saa seda sisestada. Sisestage 4 veepudelit vastavatesse avadesse.

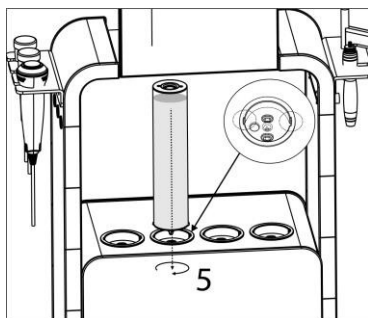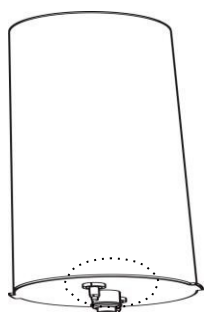


Kasutusjuhend

- (1) Valige Aqua funktsioon
- ressil
- ekraan.

MENU

1. Aja vähendamine
2. Taimer
3. Suurendada aega
4. Tagasi peamenüüsse
5. Energia vähendamine
6. Energiabatoon

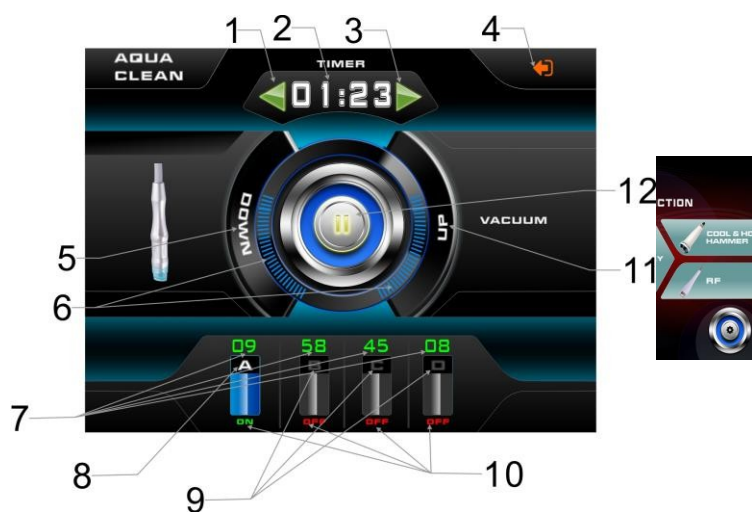

aad

7. Kasutatud veepudelite osakaal

8. Pudel A

(Võimaldab vesinikurikka vee funktsiooni)

9. Pudel B,C,D

10. Pudeli tööseisund

11. Energia suurendamine

12. Start nupp

(2). vajutage nuppu aadressil keskel kaane pudelid

(muidu võib vesi lekkida), seejärel vajutage Reduce time



või

Suurendage aega  reguleerige kasutusaega sõltuvalt läbiviidavast ravist (soovitatav 15-20min), vajutage UP ja DOWN, et reguleerida imemisvõimsust vastavalt vajadusele.

(soovituslik suurendamine alates tasemest 2), valige vajalik pudel, võite valida ühe või kõik, kuvatakse ABCD-pudelid, allosas kuvatakse aktiivsed pudelid.



kui ON , mitteaktiivsed kuvatakse kui OFF , Pudelid A on võimalik ka lubada



vesinikvee funktsioon, kui see on funktsioonis , klõpsake uuesti pudelisümbolile , see tähendab, et hüdrogeenimisfunktsioon on sisse lülitatud. Kui soovite selle välja lülitada,



klõpsake lihtsalt uuesti silindri ikoonil  see sulgeb selle. (Märkus: Ainult silindril A on see funktsioon, B,C,D ei ole seda funktsiooni) .

Selgitus: (Vesinikvesi) on teaduslikult teadaolevalt vees lahustumatu, kasutades nanomõõtme ulatuses vedeliku ja gaasi segamistehnoloogiat ning kasutades füüsikalisi meetodeid vesinikumolekulide ühtlaseks ümbritsemiseks veemolekuli ümber, et soodustada stabiilset vesiniku ja vee kombinatsiooni. Sellel on kõrge vesinikukontsentratsioon ja hea stabiilsus. Vesinik on värvitu, lõhnatu ja mittetoksiline gaas. Vesiniku ainulaadne olemus määrab, et vesinikul on bioloogias palju eeliseid. Kõige ilmsem omadus on selle tugev läbitungimine nahakihtides, mis võivad kergesti siseneda raku mis tahes osasse, näiteks tuumasse ja

mitokondrid, seega on vesinikurikkal veel väga tugev antioksidantne funktsioon.

Reguleerige vee protsenti pudelis, klõpsake lihtsalt ekraanil **45**, number ilmub ülesse

1. Pin-koodi valiku aken
2. PIN-koodi valimise klahvistik
3. PIN-koodi tühistamine
4. PIN-koodi kinnitamine ja väljumine



Klõpsake numbrite sisestamise liideses ülalpool toodud arvu sisestamiseks vajalikku protsenti, näiteks sisestage 23, mis tähendab, et 23% pudelis olevast veest on kasutatud.

vajutades  salvestab süsteem väärtuse ja väljub kasutajaliidesest. Kui sisestus on vale,


Vajutage uuesti  enter.




Kui soovitud number on määratud, vajutage  Alusta tööd.

(3) funktsioonid

Valige soovitud lihvimispea ja paigaldage see pingi külge.

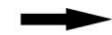

, Kolm lihvimispead, mille vahel valida

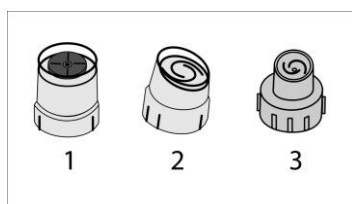

1. Lihvimispea
2. Kõva plastikust pea
3. Silikoonist pea

Lihvimispea sobib surnud naha koorimiseks. Kõva plastmassist pead sobivad regulaarseks kasutamiseks nahal. Erinevaid mudeleid kasutatakse kogu näopinna või näoosa puhastamiseks.

Silikoonist pea sobib tundlikule nahale ja ei ärrita nahka.

Kogu näopesu kestab 15-20 minutit.

Märkused toimingute kohta:

1. Kui pudel aadressil kasutatud vedelik on täis, aadressil ekraan ilmub ilmub ekraanile logo hoiatuslogo



seejärel lõpetage töö , avage masina tagumine uks, eemaldage määrdunud vesi pudelist. Järgides noole suunda, puhastage määrdunud vesi ja paigaldage pudel tagasi, a siis jätkake selle kasutamist.

- 2, veepudeli tihendusrõngas on kahjustatud, see võib põhjustada lekke. Kui

kogemata lekib, lülitage toiteallikas kohe välja, välja


veepudel, kuivatage vesi kuiva lapiga ja asetage see ühte

ventileeritud kohas, kuni seade on kuivanud.

taaskäivitage süsteem. Ärge avage seadet,

lekib! vastasel juhul on seade

hävitatud!

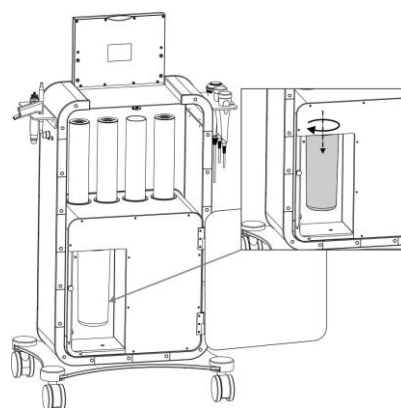

tõmmake

kuivale,

Proovige

kui vesi

3. Seadme liigutamisel vajutage

pudelit

tagasi, et hoida veepudel suletud, et vältida vee välja voolamist.

- 4, Hoidke lihvimispea puhtana, puhastage sond pärast iga kasutamist ja kasutage alkoholi või muid desinfitseerimisvahendeid, et steriliseerida või asendada uus pea.

- 5, Hooldus ei tohiks kesta kauem kui 15 minutit. Inimesed, kellel on väike nahapiirkond näol peaks olema lühem ravi. Liiga pikk ravi võib põhjustada liigset koorimist või toimeainete vähenenud imendumist; käsiseadet ei tohiks pikalt ühes asendis hoida, et vältida naha kahjustamist.


- 6, Liiga pikk koorimishooldus võib nahka kahjustada.

Hapniku veepihustuse funktsioon

Tõhusus: vesi või muu süstitav aine, hõlbustab naha imendumist, naha hapnikuga varustamist, naharakkude aktiveerimist, naha toitmist.

Sissejuhatus teenistusse

1. Drenaaž (hapniku väljapaiskamise mahu reguleerimine)
2. pudel
3. Käepide

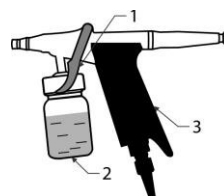


Ettevalmistamine enne kasutamist



Lisage puhast vett või essentsi

Juhised:

- (1) Valik SPRAY ikoon funktsiooni valimisel lülitub pihustusliidesele

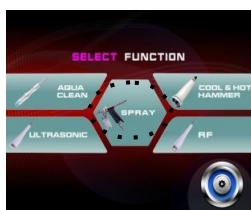

Kasutajaliidese tutvustamine

1. kohanemisaeg
2. aktiveerida pausiklahvi
3. Praegusest funktsiooniklahvist väljumine



- (2) Suurendage või vähendage õiget aega (soovitatav on 15 minutit) Kui kõik seadistused on tehtud, vajutage käivitamiseks nuppu.

Kuidas kasutada

- Pärast vastava funktsiooni aktiveerimist ekraanil hoidke käepidet ja hoidke ettevaatlikult vajutage päästikule. Pihustist väljub udu, valage sinna erinevaid vedelikke; Pärast vahetamist teise vedeliku vastu peatatakse pea esmalt, puhastatakse pudelit, et panna sinna teine vedelik. Pärast pihustamist tuleb funktsioon peatada. infusioon, seejärel kasutage vatitampooni või pehmet paberit, et eemaldada kliendi näolt üleliigne vedelik.

Märkused kasutamise kohta:

- Udu mahu reguleerimiseks on parem tõmmata päästik keskmisesse asendisse, kui tõmbate päästiku lõpuni, on lihtne põhjustada liiga palju vee lekkimist. Tagasi Pöörake ravi läbiviimisel rohkem tähelepanu olulistele kohtadele, nagu suu, nina ja silmad, Paluge klientidel sulgeda silmad ja suu, Pihustage udu otsaesistvedeliku sattumist kliendi ninasõõrmetesse. Hoidke alati sobiv kaugus kliendi näost.

RF (raadiosagedus)

Funktsioonid: kudede soojendamine, pooride avamine, kollageenikiudude pikkuse lühendamine, parandab peened jooned ja kortsud, taastab naha elastsuse ja parandab näokontuure.

Juhised:

- (1) Vajutage funktsioonivaliku liideses RF, et siseneda



Kasutajaliidese tutvustamine

1. Aja kohandamine
2. Energiariba (näitab energiatoodangut)
3. Energia vähendamine
4. Energia suurendamine
5. Väljundi lainekuju valik
6. Praegusest funktsiooniklahvist väljumine
7. Start / Paus nupp



energia)

- (2) suurendada  või vähendada  õigeks ajaks (s soovitatav 30 minutit) , .

Seejärel vajutage energia vähendamist või energia suurendamist õigele tasemele, tavaliselt alustage võimsuse valimist teisel tasemel, te peaksite seda oma käel katsetama enne ravi alustamist kliendil . Klient võib tunda kerget soojust.

Väljundlaine olekus on kolm režiimi, mille vahel valida:  pidevlaine väljundi olek,  olek segalaine väljund,  laia impulsi väljundi olek. Vajadusel väljundlaine olek, üldiselt alustada valimist.  .

(2) Suurendage või vähendage õiget aega (30 minutit soovitatav), Seejärel vajutage energia vähendamist või energia suurendamist õigele tasemele, Tavaliselt alustage võimsuse valimist teisel tasemel, peaksite seda enne ravi alustamist kliendil oma käega katsetama . Klient võib tunda kerget soojust.

Märkused kasutamise kohta:

1. Kandke enne ravi nahale geeli või raadiosageduspreparaati, Ärge kasutage RF-pead otse kuivale nahale, RF-pea peab olema nahale lähedal, Ärge laske seda jätke nahad maha.
2. Kui temperatuur on kasutamisel liiga kõrge, siis lihtsalt viige see teistesse osadesse ja liigu kiiremini ringiratast, see vähendab temperatuuri; Kui temperatuur ei ole piisavalt kõrge, et liigutada RF-pead ringis aeglasemalt, temperatuur tõuseb aeglaselt.
3. Seda ei soovitata kasutada raseduse või imetamise ajal. Ei ole soovitatav kasutada tundlike piirkondade, traumade, punetuse, põletiku, allergiate või muude nahahaiguste korral.
4. Enne ravi alustamist eemaldage metallist tarvikud.

Ultraheli jõudlus:

- 1, stimuleerimine, punetuse kõrvaldamine: impulssravi rakendamine
Ultraheli, mis töötab koos sobiva tootega veresoonte ja rakkude ainevahetuse aktiveerimiseks ning ultraheli mehaanilise toime tulemusel, saades soojusliku efekti ning füüsikalise ja keemilise toime, sobiva stimulatsiooni ja massaaži, veresoonte laiendamiseks, verevoolu ja ainevahetuse stimuleerimiseks, saab stimuleerib veresoonte taaselustamist, kõrvaldab erüteemi mõju.
- 2, akneevastane ravi, millel on tugev mõju aknele: on palju akne vorme, see on üks levinumaid juhtumeid , puudutab väga valusalt, ebaõige käitlemine kipub moodustama kõva armi. Ultraheli võib mõjutada lümfisõlmede, vere- ja lümfiringlust, kiirendada põletikurakkude vooderdamist.

- 3, kõrvaldada freckles ja kergendada laigud: ultraheli võib kõrvaldada freckles ja hüperpigmentatsiooni, vältida nende teket, nõrgestada neid ja eemaldada neid ainevahetuse abil. Ultraheli võib suurendada nahahooldusvahendite (nagu kreemid, maskid, helendava toimega ampullid jne) imendumist, mõju Hüperpigmentatsiooni eemaldamine on nähtav pärast mitmeid protseduure.
- 4, saastatus ja imendumine: ultraheli mehaanilise massaaži funktsioon aitab ühelt poolt reguleerida nahaaluseid rakke ja suurendada rakumembraanide läbilaskvust ning teiselt poolt parandada vereringet ja ainevahetust. Koos nõuetekohase vereringe ja hooldustoodete lisamine, on mõju rahuldav.
- 5, kõrvaldada tumedad ringid ja silmade paistes, tänu mehaanilise ultraheli massaaži mõjule, võib kiirendada vere- ja lümfiringlust ning kudede kuumutamise mõju, võib lõhkuda rasva, kiirendada toimeainete imendumist naha, liigse niiskuse ja rasva kogunemise kaudu. hajuvad, paistetused ja tumedad ringid silmade all kaovad.

Juhised:

- (1) Vajutage funktsiooni valiku liidesel ultraheli nuppu, et siseneda



Kasutajaliidese tutvustamine

1. Aja kohandamine
2. Energia (näitab)
3. Energiatarbimise vähendamine
4. Energia suurenemine
5. Väljundlaine oleku valik
6. Praegusest funktsiooniklahvist väljumine
7. Start / Paus nupp



- (2) Et suurendada  või vähendada  õigeks ajaks (soovitatakse 20 minutit) , seejärel vajutage energia vähendamist või energia suurendamist õigeks ajaks (.

väärtused, tavaliselt valitakse teine tase ,  Väljundlaine olek valida kolm režiimi ,  pidevaine väljundseisund ,  lai impulss väljundseisund. Valige väljundlaine olek, mida me vajame, valige tavaliselt vastav parameeter. .

Enne ultrahelisondi kasutamist asetage kreem või ampull nahale, liigutage ultrahelisondi alt ülespoole ringikujuliselt.

Märkused:

- 1, Hoidke ultrahelisondi puhtana, puhastage see pärast iga kasutamist ja steriliseerige see alkoholiga või

teise desinfitseerimisvahendiga.

2, Ärge asetage ultrahelisondi silmamunale.

3, et te kannate ravi ajal nahale õige koguse toimeainet.

4, Üldiselt ei tohiks raviage ületada 15 minutit. Väikese nahapinnaga patsientidel tuleks raviagega vastavalt lühendada. Sond ei tohiks jääda pikaks ajaks teatud asendisse, et vältida nahakoe kahjustamist.

5, raviprotsessis vältige ultraheli pikaajalist kasutamist seisundis, mis on maksimaalne energiakulu, mis mitte ainult ei mõjuta naha imendumist, vaid võib isegi kahjustada nahakude.

Vasara soojus külm

Performance :

Külmteraapia

1, ravi, mis on hea , kapillaaride sulgemise jaoks.

2, Tugevdab elastiinikiude, muudab naha pinguldatuks ja elastseks, silub kortse, kõrvaldab varesejalad.

3, ahenevad, vähendades tõhusalt erüteemi ja veresoonte ringlust - puhastada ja detoksikatsiooni.

4, vähendage närvitundlikkust, rahustav mõju, rahustage nahka, turset, valu, eriti allergilise naha puhul on hea toetav toime.

5, külm ravi+ sinine valgus võib leevendada naha punetust, on põletikuvastane toime

Soojusravi

1、 Kerge soojus, teeb, lõdvestab lihaseid, tasakaalustab närvid enesedistsipliini, leevendab valu. 2、 Stimuleerib vereringet, suurendab hapniku hulka veres, avab poorid, laiendab veresoone ja nii imenduvad toitained kiiremini.

3、 Suurendab ainevahetuse kiirust, suurendab toksiinide loomulikku väljutamist.

Juhised:

(1) Valige vasara funktsioon kuum-külm vajutage ekraanil enter



Kasutajaliidese tutvustamine

1. Temperatuuri seadistus

2. Start / stop

3. Vasara jahutamine

4. Haamri küte

5. Kuvab praeguse

haamer

6. Praegusest funktsiooniklahvist väljumine



temperatuuri

(2) Tulemuslikkuse

mõju

Kommentaariid:

1. Parima tulemuse saavutamiseks puhastage oma nägu meigieemaldajaga.

2. Ärge laske kuumal ja külmal haamril märjaks. Seda tuleb pühkida kuiva lapiga.

3. Säilitage nõuetekohane soojusemissioon, ärge blokeerige soojusemissiooni avasid

4. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kehva füüsilise vormi, aeglase reaktsiooni või psüühikahäiretega inimestele (sealhulgas lastele), välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse ohutult allapoole

menetluse ohutu läbiviimise eest vastutavate isikute juhtimisel või kaasabil.

5. Laste üle tuleb teostada järelevalvet, et nad ei mängiks

seadmetega. Tähelepanu tuleks pöörata kogu masina kasutamisele:

1. Töötamisel pöörake tähelepanu arvutiga kinnitamisele ja ühendamisele ning ärge tõmmake liigselt kaablitest.

2. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse kaabli või tootja või tema hooldusosakonna poolt ostetud spetsiaalsete komponentidega.

3. Kui peremehe töö käigus tekivad ebanormaalsed olukorrad, lülitage toide kohe välja ja

Ühendage toitepistik lahti, võtke kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga, ärge avage korpust ilma loata.

4. asetage ega kasutage niisketes ruumides.

5. Ärge asetage lähedusse tuleohtlikke või plahvatusohtlikke esemeid.

Kui käesolevas juhendis esitatud jooniste ja tegelike esemete vahel esineb lahknevusi, on tegelikud esemed ülimuslikud. Ettevõtte jätab endale õiguse pidevalt ajakohastada ja toote täiustamine. Ülaltoodud sisu võib muutuda ilma ette teatamata.

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul kui käesolevas juhendis märgitud eesmärgil.

teenus. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIV Tomasz Pacholczyk'i volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kui lõpetate seadmega töötamist.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

MÄRKUSED:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõistetakse sellega seotud riske.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei tea piisavalt, kuidas seadet kasutada.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõetuskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele.

Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige selle kõrvaldamise eeskirju

seadme tüüp. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, seda ei tohi mõjutada mehaanilised löögid ega puutuda kokku ilmastikutingimustega.