


ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

YOSHIDA DI PULIZIA IDROCLEAN 5 in 1
Modello - H5020

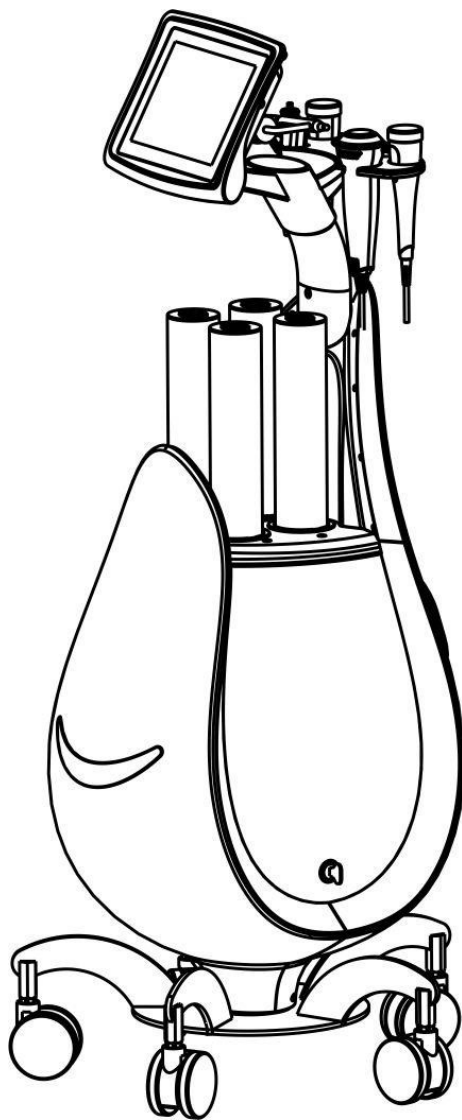

Importatore:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl



Questo non è un prodotto medico, quindi non utilizzarlo per trattamenti medici!

Specifiche e dati tecnici:

Nome del prodotto	5 IN 1 Scorza di idrogeno Yoshida
Articolo n.	H5020
Caratteristiche	Ossibrasione e peeling all'idrogeno. Ultrasuoni, radiofrequenza, spray, calore a martello -. freddo
Tensione nominale/potenza	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Frequenza operativa	50/60Hz
Potenza nominale	190W
Dimensioni (LXLXH)	61*41*90,1 cm
N.W.	50Kg


Elenco degli imballaggi:

Nome	Aspetto dell'elemento	Quantità
Macchina		1 set
Cavo di alimentazione		1 pezzo
Testa RF		1 pezzo
Testa ultrasuoni		1 pezzo
Calore del martello - freddo		1 pezzo
Aerografo per spruzzare		1 pezzo
Ossidazione e peeling della testa idrogeno		1 pezzo
Testa di macinazione		1 set

Plastica dura testa		1 set
Testa in silicone		1 set
Istruzioni per l'uso		1 copia

Istruzioni per l'uso del dispositivo:

1. Schermo di visualizzazione
2. Accessori
3. Bottiglie (A,B,C,D)
4. Chiave
5. Pannello frontale
6. Supporto per accessori
7. Prese di connessione
8. Pulsante di accensione/spegnii
9. Fusibile
10. Presa di rete

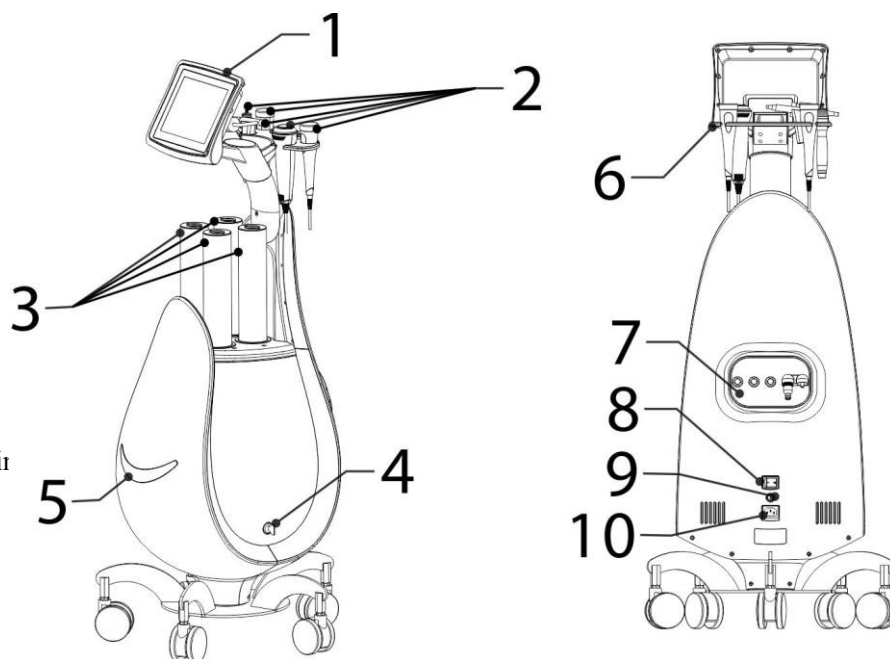

Istruzioni e commenti: istruzioni e commenti

1. Seguire le istruzioni per installare gli accessori.
- 2. Riempire il contenitore con acqua minerale o altro liquido in forma acquosa, quindi aprire il pulsante superiore.**
3. Accendere l'interruttore di alimentazione sul lato del telaio principale. La spia dell'interruttore di alimentazione si accende.
4. Sollevare leggermente il display
5. Funzionamento del display e dello schermo: Accensione Selezione delle funzioni - varie funzioni

6. Toccare il display per selezionare le funzioni desiderate Selezione delle funzioni:

1. Aqua Clean (trattamento dell'acqua e dell'idrogeno)


2. Ultrasuoni

3. Spray

4. Impostazioni

5. RF

6. Martello caldo-freddo

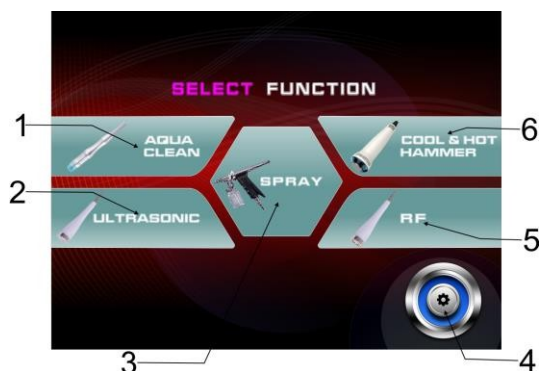

Funzioni del dispositivo

1. Aqua Clean (pulizia profonda)

2. Spray (applicazione di sostanze attive in profondità nella pelle) .

3. RF (Lifting skin.) .

4. Ultrasuoni (applicazione di sostanze attive in profondità nella pelle)

5. Martello caldo-freddo (stimolazione della pelle, dei pori e dei vasi sanguigni).

Fasi operative:

Funzione Aqua Clean


Creando un vuoto, le bolle ultra piccole e i fluidi nutrienti si combinano completamente. Le piccole testine di aspirazione a spirale, appositamente progettate, agiscono direttamente sulla pelle, mantenendo le bolle ultra piccole a contatto con la pelle per lungo tempo, aumentando l'effetto peeling. Puliscono in profondità la pelle e rimuovono le cellule cheratiniche invecchiate, eliminando il sebo. A fondo rimuovono tutte le impurità, gli acari e i residui di sebo dai follicoli piliferi e forniscono la pelle di sostanze nutritive. La pelle è idratata, morbida e lucente.

Preparazione all'uso

Aggiungere alla bottiglia un liquido speciale o acqua minerale



1. Premere il pulsante al centro della bottiglia...

2. Svitare il coperchio superiore in direzione della freccia.

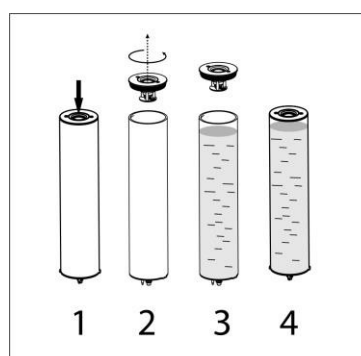

3. Aggiungere alla bottiglia un liquido speciale o acqua minerale
4. Stringere il coperchio superiore nella direzione opposta e premere il pulsante centrale (vedi immagine a destra).
5. Inserire le bottiglie negli appositi slot per gli host. (vedi immagine sotto)

Nota: prima dell'inserimento, controllare che l'anello di tenuta inferiore sia intatto (vedere disegno sottostante). Un anello di tenuta mancante o danneggiato provoca una perdita! Durante l'inserimento, controllare che foro piccolo e quello grande sui due lati combacino, non sarà possibile inserirli. Inserire le 4 bottiglie d'acqua nelle fessure corrispondenti.

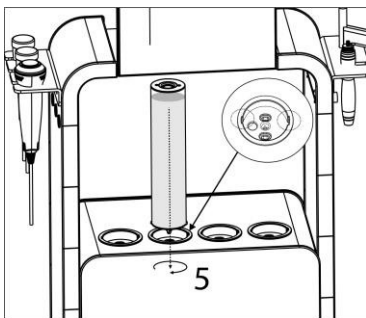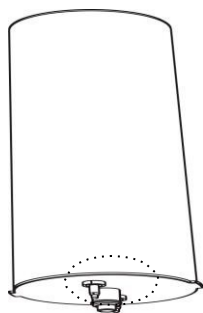


Istruzioni per l'uso

- (1) Selezionare la funzione Aqua schermo.

MENU

1. Riduzione del tempo
2. Timer
3. Aumentare il tempo
4. Torna al menu principale
5. Riduzione dell'energia
6. Barretta energetica

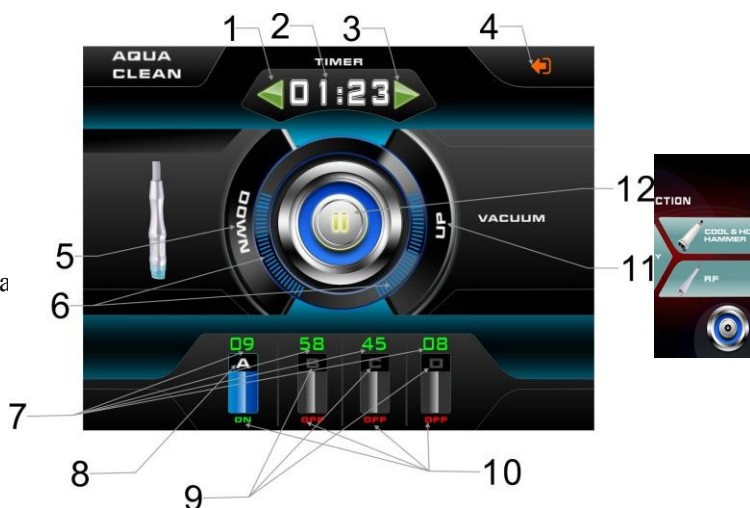

su

7. Percentuale di bottiglie d'acqua utilizzate

8. Bottiglia A

(Attiva la funzione acqua ricca di idrogeno)

9. Bottiglia B,C,D

10. Condizioni di lavoro della bottiglia

11. Aumento dell'energia

12. Pulsante di avvio

(2). premere il pulsante su centro coperchio bottiglie

(altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire), quindi premere il pulsante Riduci tempo



Aumentare il tempo  Regolare il tempo di utilizzo, a seconda del trattamento che si sta eseguendo (si suggerisce 15-20min), premere SU e GIÙ per regolare la potenza di aspirazione come richiesto

(aumento suggerito a partire dal livello 2), selezionare la bottiglia desiderata, è possibile sceglierne una o tutte, le bottiglie ABCD vengono visualizzate sullo schermo, in basso vengono visualizzate le bottiglie attive

come ON , gli inattivi sono visualizzati come OFF , Nel flacone A è anche possibile attivare

funzione idrogeno acqua, quando è presente nella funzione , cliccare nuovamente sull'icona della bottiglia



questo significa che la funzione di idrogenazione è abilitata., quando si desidera disabilitare questa ,

fare nuovamente clic sull'icona del cilindro  per chiuderlo. (Nota: solo il cilindro A dispone di questa funzione, mentre i cilindri B, C e D non ne sono dotati).

Spiegazione: (L'acqua all'idrogeno) è scientificamente provato che è insolubile in acqua grazie alla tecnologia di miscelazione liquido-gas su scala nanometrica e utilizza metodi fisici per circondare uniformemente le molecole di idrogeno intorno a una molecola d'acqua per promuovere la stabilità.

una combinazione di idrogeno e acqua. Ha le caratteristiche di un'alta concentrazione di idrogeno e di una buona stabilità. L'idrogeno è un gas incolore, inodore e non tossico. La natura unica dell'idrogeno

determina che l'idrogeno ha molti vantaggi in biologia. La caratteristica più evidente è la sua forte penetrazione strati della pelle, che possono facilmente entrare in qualsiasi parte della cellula, come il nucleo e il

mitocondri, quindi l'acqua ricca di idrogeno ha una funzione antiossidante molto forte.

Regolare la percentuale di acqua per bottiglia, basta fare clic sul numero sullo schermo **45**, il numero apparirà in alto.

1. Finestra di selezione del codice pin
2. Tastiera per la selezione del codice pin
3. Cancellazione del codice pin
4. Conferma del codice PIN e uscita



Nell'interfaccia di inserimento dei numeri, fare clic sulla percentuale richiesta per inserire il numero sopra; ad esempio, inserire 23, significa che è stato utilizzato il 23% dell'acqua contenuta nella bottiglia.

premendo  il sistema salva il valore ed esce dall'interfaccia. Se l'input è sbagliato,

Premere nuovamente  enter.




Una volta impostato il numero desiderato, premere  Avviare il lavoro.

(3) funzioni

Selezionare la testa di rettifica desiderata e montarla sul mandrino.



Tre teste di macinazione tra cui scegliere

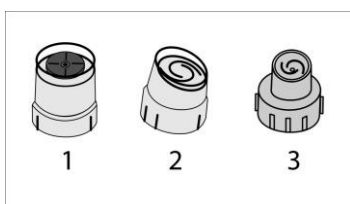

1. Testa di macinazione
2. Testa in plastica dura
3. Testa in silicone

La testina è adatta per esfoliare la pelle morta. Le testine in plastica dura sono adatte per un uso regolare sulla pelle. I diversi modelli vengono utilizzati per pulire l'intera superficie o una parte del viso.

La testina in silicone è adatta alla pelle sensibile e non irrita.

L'intero lavaggio del viso richiede 15-20 minuti.

Note sulle operazioni:

1. Quando sullo schermo bottiglia a usato liquido è pieno, su schermo appare appare logo logo di avviso



quindi terminare il lavoro, aprire lo sportello posteriore della macchina, rimuovere l'acqua sporca dalla bottiglia. Seguendo la direzione della freccia, pulire l'acqua sporca e rimettere la bottiglia, a continuare a usarlo.

2, L'anello di tenuta della bottiglia d'acqua è danneggiato e può causare una perdita. Se

Se si verifica una perdita accidentale, interrompere immediatamente l'alimentazione,

acqua, asciugare l'acqua con un panno asciutto e riporla in un contenitore asciutto.

luogo ventilato finché l'unità non è asciutta.

riavviare il sistema. Non aprire l'unità,

una perdita d'acqua! altrimenti l'unità sarà

distrutto!


3. quando si sposta l'unità, premere la

chiusa la bottiglia d'acqua ed evitare che si rovesci.

4, Mantenere pulita la testina, pulire la sonda dopo ogni utilizzo e utilizzare alcool o altri strumenti disinfettanti per sterilizzare o sostituire la nuova testina.

5. La durata del trattamento non deve superare i 15 minuti. Le persone con una piccola area di pelle del viso dovrebbero effettuare un trattamento più breve. Un trattamento troppo lungo può provocare un'esfoliazione eccessiva o un assorbimento ridotto delle sostanze attive; il manipolo non deve rimanere in una posizione per lunghi periodi di tempo per evitare di danneggiare la pelle.

6, un trattamento di esfoliazione troppo prolungato può danneggiare la pelle.

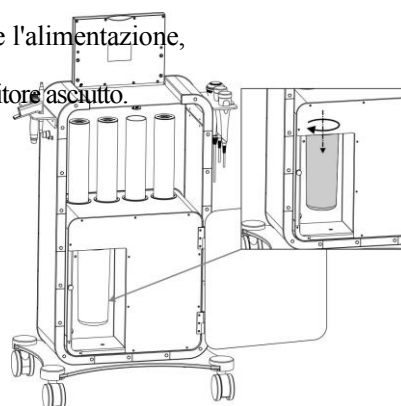

estrarre

asciutto,

Prova

quando c'è


per tenere

Funzione di nebulizzazione dell'ossigeno

Efficienza: l'acqua o altra sostanza da iniettare facilita l'assorbimento della pelle, l'ossigenazione della pelle, l'attivazione delle cellule della pelle, il nutrimento della pelle.

Introduzione al servizio

1. Drenaggio (controllo del volume di espulsione dell'ossigeno)
2. bottiglia
3. maniglia

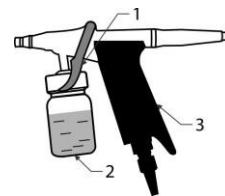


Preparare prima dell'uso



Aggiungere al acqua pulita o essenza

Istruzioni:

- (1) Selezione L'icona SPRAY, quando si seleziona una funzione, passa all'interfaccia spray.

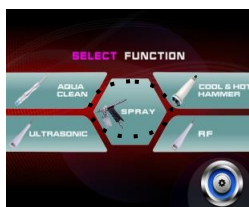

Introduzione dell'interfaccia

1. tempo di regolazione
2. attivare il tasto pausa
3. Esce dal tasto funzione corrente



- (2) Aumentare o diminuire il tempo corretto (si consigliano 15 minuti) Una volta completate tutte le impostazioni, premere il pulsante per avviare.

Come si usa

- Dopo aver attivato la funzione corrispondente sul display, afferrare l'impugnatura e premere il grilletto. Dall'ugello uscirà una nebbia, in cui versare diversi tipi di liquidi; Dopo il passaggio a un altro fluido, la testina viene innanzitutto arrestata, pulisce il per inserire un altro liquido. Dopo la spruzzatura, la funzione deve essere interrotta. Quindi utilizzare un tampone di cotone o una carta morbida per rimuovere il liquido in eccesso dal viso del paziente.

Note sull'uso:

- È meglio premere il grilletto in posizione centrale per controllare il volume della nebbia; se si preme il grilletto fino in fondo, è facile che si verifichino perdite d'acqua eccessive. Ritorno
Prestare maggiore attenzione alle posizioni importanti come la bocca, il naso e gli occhi quando si esegue il trattamento, chiedere ai clienti di chiudere gli occhi e la bocca, spruzzare la nebbia dalla fronte del cliente per che il liquido entri nelle narici dei clienti. Mantenere sempre una distanza adeguata dal viso del cliente.

RF (radiofrequenza)

Funzioni: riscaldamento dei tessuti, apertura dei pori, accorciamento della lunghezza delle fibre di collagene, Migliorano le linee sottili e le rughe, ripristinano l'elasticità della pelle e migliorano i contorni del viso.

Istruzioni:

- (1) Premere RF nell'interfaccia di selezione delle funzioni per accedere a



Introduzione dell'interfaccia

1. Regolazione del tempo
2. Barra dell'energia (mostra la produzione di energia)
3. Riduzione dell'energia
4. Aumento dell'energia
5. Selezione della forma d'onda in uscita
6. Esce dal tasto funzione corrente
7. Pulsante di avvio/pausa



energia)

- (2) aumentare  o diminuire  fino al tempo corretto (consigliato 30 minuti)

Quindi premere per diminuire l'energia o per aumentare l'energia al livello corretto; di solito si inizia a selezionare la potenza al secondo livello; si consiglia di testarla sulla propria mano prima di iniziare il trattamento sul cliente. Il cliente potrebbe sentire un leggero calore.

Lo stato dell'onda di uscita può essere scelto in tre modalità:  stato di uscita a onda continua,  stato uscita ad onde miste,  stato di uscita ad impulsi larghi. Se necessario, stato di uscita ad onde, in genere iniziare a comporre.  .

(2) Aumentare o diminuire il tempo corretto (si consigliano 30 minuti), quindi premere il tasto di diminuzione dell'energia o di aumento dell'energia per la quantità corretta, di solito si inizia a digitare la potenza al secondo livello; si consiglia di testarla sulla propria mano prima di iniziare il trattamento sul cliente. Il cliente potrebbe avvertire un leggero calore.

Note sull'uso:

1. Applicare un gel o una preparazione alla radiofrequenza sulla pelle prima del trattamento, non utilizzare la testina RF direttamente sulla pelle asciutta, la testina RF deve essere vicina alla pelle, non lasciare che la stessa lasciare le bucce.
2. Se la temperatura è troppo alta durante l'uso, è sufficiente spostarla in altre parti e muoversi in cerchio più velocemente, per ridurre la temperatura; se la temperatura non è sufficientemente alta, per muovere più lentamente la testina RF nel cerchio, la temperatura aumenterà lentamente.
3. Si sconsiglia l'uso durante la gravidanza o l'allattamento. Non è raccomandato per aree sensibili, pelle con traumi, arrossamenti, infiammazioni, allergie o altre condizioni della pelle.
4. Rimuovere gli accessori metallici prima di iniziare il trattamento.

Prestazioni degli ultrasuoni:

1, stimolazione dei vasi sanguigni, eliminazione del rossore: applicazione della terapia del polso
Gli ultrasuoni, lavorando con un prodotto adatto ad attivare i vasi sanguigni e il metabolismo cellulare e, come risultato dell'azione meccanica degli ultrasuoni, ottenendo un effetto termico e un'azione fisica e chimica, per un'appropriata stimolazione e massaggio, vasodilatazione, stimolazione del flusso sanguigno e della funzione metabolica, possono stimolare i vasi sanguigni a rivitalizzarsi, eliminando l'effetto dell'eritema.

2, terapia antiacne con un forte effetto sull'acne: esistono molte forme di acne, è uno dei casi più comuni di comedoni purulenti, il tocco molto doloroso, la manipolazione impropria tende a formare cicatrici dure. Gli ultrasuoni possono influenzare i linfonodi, la circolazione sanguigna e linfatica, accelerare il rivestimento delle cellule infiammatorie.

- 3, eliminare le lentiggini e schiarire le macchie: gli ultrasuoni possono eliminare le lentiggini e l'iperpigmentazione, prevenirne la formazione, indebolirle e rimuoverle con il metabolismo. Gli ultrasuoni possono aumentare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle (come creme, maschere, fiale con effetto schiarente, ecc. L'eliminazione dell'iperpigmentazione è visibile dopo una serie di trattamenti.
- 4, decontaminazione e assorbimento: la funzione di massaggio meccanico degli ultrasuoni serve a regolare le cellule sottocutanee e ad aumentare la permeabilità della membrana cellulare da un lato, e a migliorare la circolazione sanguigna e il metabolismo dall'altro. In combinazione con una corretta circolazione sanguigna e l'inclusione di prodotti per la cura, l'effetto è soddisfacente.
- 5, eliminare le occhiaie e le borse degli occhi, grazie all'effetto del massaggio meccanico ad ultrasuoni, può accelerare la circolazione del sangue e della linfa, e l'effetto di riscaldamento del tessuto, può rompere il grasso, accelerare l'assorbimento dei principi attivi attraverso la pelle, l'umidità eccessiva e accumulo di grasso si disperdono, le borse e le scompaiono.

Istruzioni:

- (1) Premere il pulsante ultrasuoni sull'interfaccia di selezione delle funzioni per



Introduzione dell'interfaccia

1. Regolazione del tempo
2. Energia (indica la produzione di energia)
3. Riduzione del consumo energetico
4. Aumento dell'energia
5. Selezione dello stato dell'onda di uscita
6. Esce dal tasto funzione corrente
7. Pulsante di avvio/pausa



- (2) Per aumentare  o diminuire  al tempo corretto (20 minuti raccomandati), premere diminuire l'energia o aumentare l'energia al tempo corretto.

di solito si sceglie il secondo livello, . Lo stato dell'onda di uscita può essere scelto in tre modi,  stato di uscita a onda continua,  stato di uscita a impulso ampio. Scegliere lo stato d'onda in uscita di cui si ha bisogno, in genere selezionare il parametro corrispondente. .

Posizionare la lozione o la fiala sulla pelle prima di utilizzare la sonda a ultrasuoni, Muovere la sonda a ultrasuoni in cerchio dal basso verso l'alto.

Note:

- 1, mantenere pulita la sonda a ultrasuoni, pulirla dopo ogni utilizzo e sterilizzarla con alcool o

con un altro disinfettante.

2, non posizionare la sonda ecografica sul bulbo oculare.

3, di applicare la giusta quantità di principio attivo sulla pelle durante il trattamento.

4, In generale, la durata del trattamento non dovrebbe superare i 15 minuti. Chi ha un'area cutanea ridotta dovrebbe ridurre di conseguenza il tempo di trattamento. La sonda non deve rimanere a lungo in una posizione particolare per evitare di danneggiare il tessuto cutaneo.

5, nel corso del trattamento, evitare l'uso prolungato di ultrasuoni in uno stato di massimo dispendio energetico, che non solo influisce sull'assorbimento cutaneo, ma può addirittura danneggiare il tessuto cutaneo.

Martello caldo freddo

Prestazioni: terapia del

freddo

1, Terapia buona per la , sigillatura dei capillari.

2, rafforza le fibre di elastina, rende la pelle tesa ed elastica, distende le rughe, elimina le zampe di gallina.

3, i vasi sanguigni si restringono, riducendo efficacemente l'eritema e il ricircolo delle vene - più facile pulire e disintossicare.

4, ridurre la sensibilità nervosa, avere un effetto calmante, lenire la pelle, gonfiore, dolore, soprattutto per la pelle allergica ha un buon effetto di supporto.

5, trattamento a freddo+ luce blu può alleviare il rossore della pelle, ha effetto antinfiammatorio


Terapia del calore

1, leggero calore, fa, rilassa i muscoli, equilibra l'autodisciplina nervosa, allevia il dolore. 2. Stimola la circolazione sanguigna, aumenta la quantità di ossigeno nel sangue, apre i pori, dilata i vasi sanguigni e quindi i nutrienti vengono assorbiti più velocemente.

3. Aumenta il tasso metabolico della pelle, aumenta l'eliminazione naturale delle tossine.

Istruzioni:

- (1) Selezionare la funzione martello caldo-freddo sul display premere enter
sul display

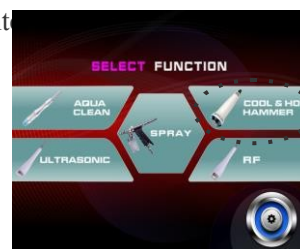

Introduzione dell'interfaccia

1. Impostazione della temperatura
2. Avvio/arresto
3. Raffreddamento del martello
4. Riscaldamento a martello
5. Visualizza la temperatura attuale
martello
6. Esce dal tasto funzione corrente



temperatura

(2) Effetti sulle

prestazioni Commenti:

1. Per ottenere risultati ottimali, pulire il viso con uno struccante.
2. Non il martello caldo e freddo. necessario pulirlo con un panno asciutto.
3. Mantenere una corretta emissione di calore, non bloccare le aperture per l'emissione di calore.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con scarsa forma fisica, reazioni lente o disturbi mentali (compresi i bambini), a meno che non venga utilizzato in modo sicuro in condizioni di sicurezza. direzione o con l'assistenza di persone responsabili dell'esecuzione sicura della procedura.
5. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchiatura. È necessario prestare attenzione all'utilizzo dell'intera macchina:

1. Durante il lavoro, prestare attenzione al fissaggio e al collegamento al computer e non tirare eccessivamente i cavi.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o con componenti speciali acquistati dal produttore o dal suo reparto di manutenzione.
3. Se si verificano situazioni anomale nel corso del funzionamento dell'host, spegnere immediatamente l'alimentazione e

Scollegare la spina di alimentazione, contattare il rivenditore per l'ispezione, non aprire l'alloggiamento senza autorizzazione.

4. collocare o utilizzare in aree umide.
5. Non collocare oggetti infiammabili o esplosivi nelle vicinanze.

In caso di discrepanze tra i disegni del presente manuale e gli articoli reali, questi ultimi avranno la precedenza.

L'azienda si riserva il diritto di aggiornare e miglioramenti del prodotto. I contenuti di cui sopra sono soggetti a modifiche senza .

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare il dispositivo e non tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni.

assistenza. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Rimuovere immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta si termina di lavorare con l'unità.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

NOTE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e senza esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiatura. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e all'azienda ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.