


ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

YOSHIDA 5-in-1 HYDROCLEAN
Model - H5020

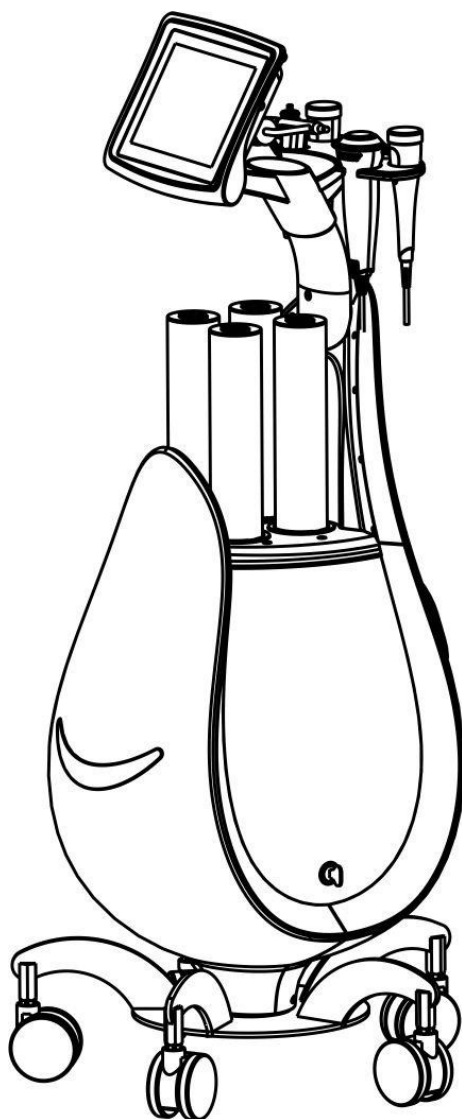

Importeur:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl



Dit is geen medisch product, gebruik het dus niet voor medische behandeling!

Specificaties en technische gegevens:

Naam product	5 IN 1 Yoshida waterstof dunschiller
Artikelnr.	H5020
Kenmerken	Oxybrasie en waterstofpeeling, Ultrageluid, RF, sproeien, hamerwarmte. koud
Nominale spanning/vermogen	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Werkfrequentie	50/60Hz
Nominaal vermogen	190W
Afmeting (LXWXH)	61*41*90.1cm
N.W.	50 kg


Paklijst:

Naam	Uiterlijk van het element	Hoeveelheid
Machine		1 set
Stroomkabel		1 stuk
RF-kop		1 stuk
Hoofd echografie		1 stuk
Hamerwarmte - koud		1 stuk
Airbrush voor spuiten		1 stuk
Oxybrasie en peeling waterstof		1 stuk
Slijpkop		1 set

Hard plastic hoofd		1 set
Siliconen hoofd		1 set
Bedieningsinstructies		1 kopie

Instructies voor het gebruik van het apparaat:

1. Beeldscherm
2. Accessoires
3. Flessen (A,B,C,D)
4. Sleutel
5. Voorpaneel
6. Accessoirehouder
7. Aansluiting sockets
8. Aan/uit-knop
9. Zekering
10. Netwerkaansluiting

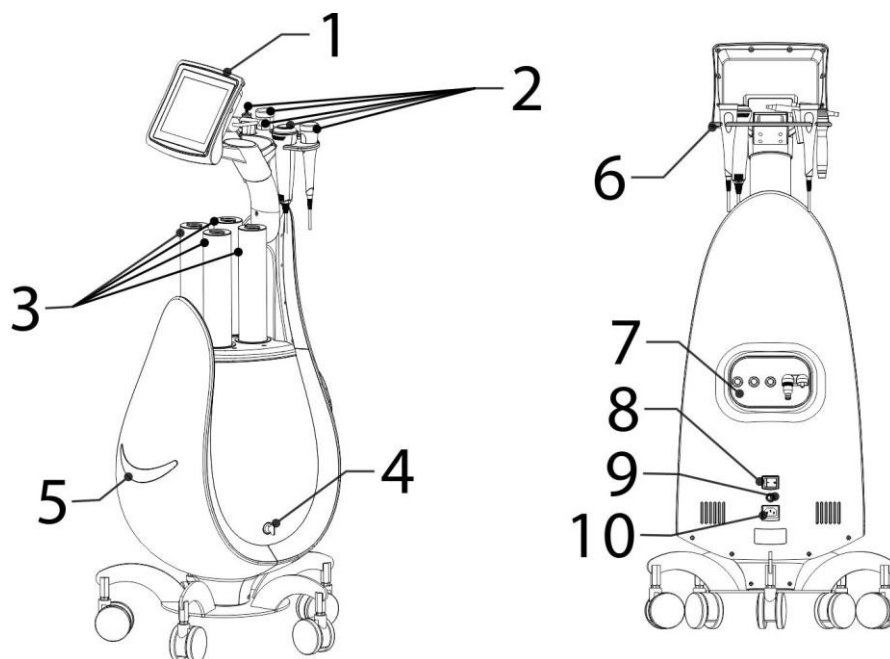

Instructies en opmerkingen :

1. Volg de instructies om de accessoires te installeren.
- 2. Vul de container met mineraalwater of een andere vloeistof in waterige vorm en open vervolgens de bovenste knop.**
3. Zet de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het hoofdframe aan. Het lampje van de stroomschakelaar gaat branden.
4. Til het beeldscherm iets op
5. Bediening van display en scherm: Inschakelen van de stroom Functieselectie - verschillende functies

6. Raak het scherm aan om de functies te selecteren Functieselectie:

1. Aqua Clean (water- en waterstofbehandeling)


2. Echografie

3. Spuit

4. Instellingen

5. RF

6. Hitte-koude hamer

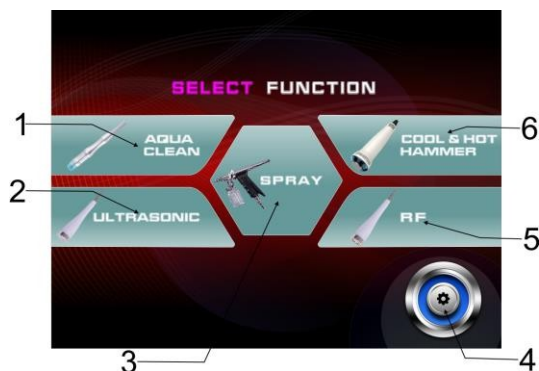

Apparaatfuncties

1. Aqua Clean (dieptereiniging)

2. Spray (aanbrengen van actieve stoffen diep in de huid).

3. RF (Lifting skin).

4. Ultrageluid (aanbrengen van actieve stoffen diep in de huid)

5. Hitte-koude hamer (stimulatie van huid, poriën en bloedvaten).

Operationele stappen:

Aqua Clean-functie

Door een vacuüm te creëren, worden de ultrakleine belletjes en voedende vloeistoffen volledig gecombineerd.

Speciaal ontworpen kleine spiraalvormige zuigkoppen werken direct op de huid, waardoor de ultrakleine bubbels lang in contact blijven met de huid en het peelingeffect wordt versterkt. Ze reinigen de huid diep, verwijderen verouderende keratinecellen en verwijderen talg. Grondig

Verwijder alle onzuiverheden, mijten en talgresten uit de haarzakjes en vul de huid aan met voedingsstoffen.


De huid is gehydrateerd, zacht en glanzend.

Vorbereiding voor gebruik

Voeg speciale vloeistof of mineraalwater toe aan de fles

1. Druk op de knop in het midden van de fles...

2. Schroef de bovenkap los in de richting van de pijl.


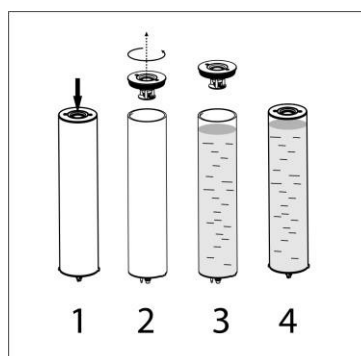


3. Voeg speciale vloeistof of mineraalwater toe aan de fles

4. Draai de bovenklep in de tegenovergestelde richting vast en druk op de middelste knop (zie afbeelding rechts)

5. Plaats de flessen in de juiste hostsleuven. (zie onderstaande afbeelding)

Opmerking: Controleer voor het plaatsen of de onderste afdichtring intact is (zie tekening hieronder). Een ontbrekende of beschadigde afdichtring veroorzaakt lekkage! Controleer bij het plaatsen of kleine en grote gat aan de twee zijanten passen, kunt u het niet plaatsen. Plaats de 4 waterflessen in de daarvoor bestemde openingen.

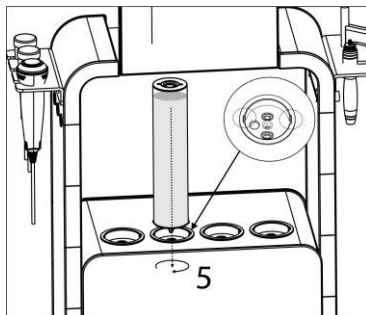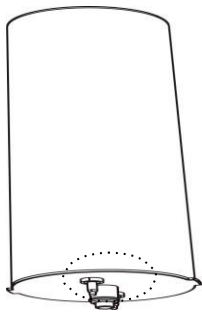


Aanwijzingen voor gebruik

(1) Selecteer Aqua-functie scherm.

MENU

1. Tijd verminderen
2. Timer
3. Tijd verlengen
4. Terug naar het hoofdmenu
5. Energiebesparing
6. Energiereep

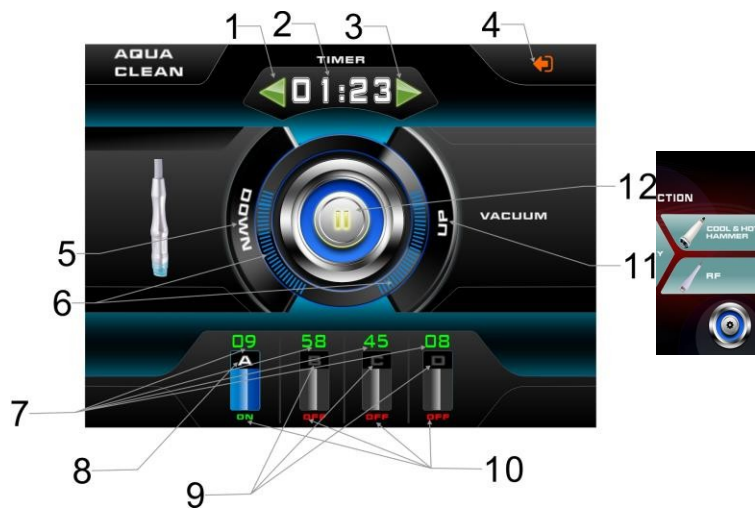

op

7. Percentage gebruikte waterflessen

8. Fles A

(Schakelt de waterstofrijke waterfunctie in)

9. Fles B,C,D

10. Werkende staat van de fles

11. Energie verhogen

12. Startknop

(2). druk op de knop op midden deksel flessen

(anders kan er water lekken) en druk vervolgens op Reduce time



Verhoog de tijd  pas de gebruikstijd aan, afhankelijk van de behandeling die wordt uitgevoerd (aanbevolen 15-20min), druk op UP en DOWN om de zuigkracht naar wens aan te passen

(voorgestelde verhoging vanaf niveau 2), selecteer de fles die je nodig hebt, je kunt er een of allemaal selecteren, ABCD-flessen worden weergegeven op het scherm, onderaan worden actieve flessen weergegeven

als AAN  , inactief worden weergegeven als UIT  , In fles A is het ook mogelijk om

Waterstoffunctie, wanneer deze in de functie  staat, klikt u opnieuw op het flespictogram  . Dit betekent dat de waterstoffunctie is ingeschakeld, wanneer u deze wilt uitschakelen,

 Klik opnieuw op het cilinderpictogram  om het te sluiten. (Opmerking: alleen cilinder A heeft deze functie, B, C en D hebben deze functie niet).

Uitleg: (Waterstofwater) is wetenschappelijk bewezen onoplosbaar in water met behulp van nanoschaal vloeistof-gas mengtechnologie, en maakt gebruik van fysische methoden om waterstofmoleculen gelijkmatig te omringen rond een watermolecuul om stabiele een combinatie van waterstof en water. Het heeft de kenmerken van een hoge waterstofconcentratie en een goede stabiliteit. Waterstof is een kleurloos, reukloos en niet-giftig gas. De unieke aard van waterstof bepaalt dat waterstof veel voordelen heeft in de biologie. De meest voor de hand liggende eigenschap is zijn sterke penetratie

6- huidlagen, die gemakkelijk elk deel van de cel kunnen binnendringen, zoals de kern en

mitochondriën, dus waterstofrijk water heeft een zeer sterke antioxidantfunctie.

Pas het percentage water per fles aan, klik gewoon op het getal op het scherm **45**, het getal verschijnt bovenaan.

1. Pincode selectie venster
2. Toetsenbord voor pincode selectie
3. Annuleren van pincode
4. Bevestiging van pincode en afsluiten



Klik in de interface voor het invoeren van getallen op het percentage dat nodig is om het getal hierboven in te voeren. Voer bijvoorbeeld 23 in, wat betekent dat 23% van het water in de fles is gebruikt.

Druk op  om de waarde op te slaan en de interface af te sluiten. Als de invoer verkeerd is,


Druk opnieuw op  enter.




Zodra het gewenste nummer is ingesteld, druk je op  Begin met werken.

(3) functies

Selecteer de gewenste slijpkop en monteer deze op de klauwplaat

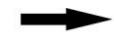

Keuze uit drie slijpkoppen

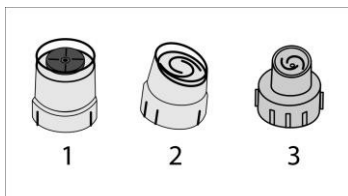

1. Slijpkop
2. Hard plastic hoofd
3. Siliconen hoofd


De slijpkop is geschikt voor het exfoliëren van dode huid. De harde kunststof koppen zijn geschikt voor regelmatig gebruik op de huid. Verschillende modellen worden gebruikt om het hele oppervlak of een deel van het gezicht te reinigen.

De siliconen kop is geschikt voor de gevoelige huid en irriteert niet.

De hele gezichtsreiniging duurt 15-20 minuten.

Opmerkingen over bewerkingen:


1. Wanneer fles op gebruikt vloeistof is vol, op scherm verschijnt
verschijnt op het scherm logo waarschuwingslogo

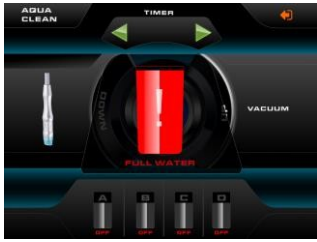

Open de achterklep van de machine en verwijder het vuile water uit de fles. Volg de richting van de pijl, reinig het vuile water en plaats de fles terug, a
blijf het dan gebruiken.

2. De afdichtring van de waterfles is beschadigd, dit kan lekkage veroorzaken. Als
per ongeluk lekt, schakel dan onmiddellijk de voeding uit,
waterfles, droog het water af met een droge doek en plaats het in een
geventileerde plaats totdat het apparaat droog is.

Start het systeem opnieuw op. Open het apparaat niet,
water lekt! Anders zal de unit
vernietigd!

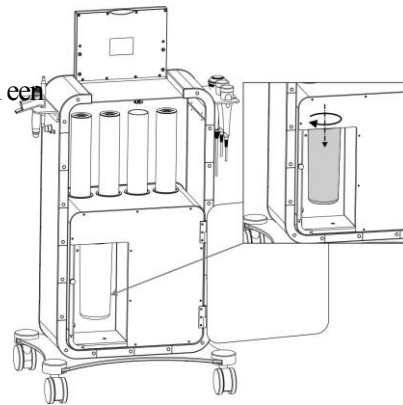

uittrekken
droog,
Probeer
als er

3. Als u het apparaat verplaatst, drukt u de
om de waterfles gesloten te houden om morsen te voorkomen.

fles terug

4. Houd de slijpkop schoon, reinig de sonde na elk gebruik en gebruik alcohol of andere ontsmettingsmiddelen
om de nieuwe kop te steriliseren of te vervangen.

5. De behandeling mag niet langer dan 15 minuten duren. Mensen met een klein gebied van de huid op het
gezicht

moeten een kortere behandeling ondergaan. Een te lange behandeling kan leiden tot te veel afschilfering of
een verminderde opname van de werkzame stoffen; het handstuk mag niet te lang in één positie blijven om
beschadiging van de huid te voorkomen.


6. Een te lange scrubbehandeling kan de huid beschadigen.

Zuurstof watersproeifunctie

Efficiëntie: water of andere te injecteren stof, vergemakkelijkt huidabsorptie, huidoxygenatie,
huidcelactivering, huidvoeding.

Inleiding tot de service

1. Drain (regel het volume van de zuurstofuitstoot)
2. fles
3. handgreep

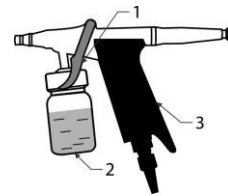


Vorbereiden voor gebruik



Voeg schoon water of essence toe aan de

Instructies:

- (1) Het SPRAY-pictogram schakelt bij het selecteren van een functie over naar de sproeiinterface.

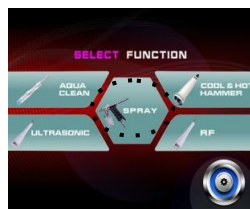

Introductie van de interface

1. aanpassingstijd
2. de pauzetoets activeren
3. De huidige functietoets afsluiten



- (2) Verhoog of verlaag de tijd tot de juiste waarde (15 minuten aanbevolen) Zodra alle instellingen zijn voltooid, drukt u op de knop om te starten.

Hoe te gebruiken

- Nadat u de betreffende functie op het display hebt geactiveerd, houdt u de handgreep vast en doet u voorzichtig het volgende:
haal de trekker over. Er komt een nevel uit het mondstuk, giet er verschillende soorten vloeistoffen in;
Na het overschakelen op een andere vloeistof wordt de kop eerst stilgezet, de fles om er een andere vloeistof in te doen. Na het spuiten moet de functie worden gestopt
Gebruik vervolgens een wattenstaafje of zacht papier om overtollige vloeistof van het gezicht van de cliënt te verwijderen.

Opmerkingen over het gebruik:

- Het is beter om de trekker in de middelste stand te zetten om het volume van de nevel te regelen. Als je de trekker helemaal overhaalt, kan er gemakkelijk te veel water lekken. Terug
Besteed meer aandacht aan belangrijke posities zoals de mond, neus en ogen bij het uitvoeren van de behandeling, vraag cliënten om hun ogen en mond te sluiten, spuit nevel vanaf het voorhoofd van de cliënt om dat de vloeistof in de neusgaten van de cliënt komt. Houd altijd voldoende afstand tot het gezicht van de cliënt.

RF (radiofrequentie)

Functies: weefselverwarming, poriën openen, collageenvezellengte verkorten,

verbetert fijne lijntjes en rimpels, herstelt de elasticiteit van de huid en verbetert de gezichtscontouren

Instructies:

- (1) Druk op RF in de interface voor functieselectie om



Introductie van de interface

1. Tijdsaanpassing
2. Energiebalk (toont energie-output)
3. Energiebesparing
4. Energie verhogen
5. Selectie uitgangsgolfvorm
6. De huidige functietoets afsluiten
7. Start/pauzeknop



energie)

- (2) Verhoog  of verlaag  tot de juiste tijd (aanbevolen 30 minuten) ,

Druk vervolgens op verlaag de energie of verhoog de energie tot de juiste hoogte, meestal begin je met het selecteren van de kracht op het tweede niveau, je moet het testen op je hand voordat je begint met de behandeling op de cliënt. De cliënt kan een lichte warmte voelen.

U kunt kiezen uit drie uitvoermodi:  continue golf, .

gemengde golfuitgang,  brede pulsuitgangstoestand. Indien nodig, uitgangsgolfoestand, over het algemeen beginnen met kiezen. .

(2) Verhoog of verlaag de energie tot de juiste tijd (aanbevolen 30 minuten), druk dan op energie verlagen of energie verhogen tot de juiste hoeveelheid, meestal begin je met het kiezen van het vermogen op het tweede niveau, je moet het testen op je hand voordat je de behandeling begint op de cliënt. De cliënt kan een lichte warmte voelen.

Opmerkingen over het gebruik:

1. Breng vóór de behandeling een gel of radiofrequentiepreparaat aan op de huid, Gebruik de RF-kop niet direct op een droge huid, de RF-kop moet dicht op de huid zitten, Laat de kop niet op de huid liggen. Laat de vellen zitten.
2. Als de temperatuur tijdens het gebruik te hoog is, verplaats deze dan naar andere delen en beweeg sneller in cirkels.
hoog genoeg is, om de RF-kop langzamer in de cirkel te bewegen, zal de temperatuur langzaam stijgen.
3. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding. Niet aanbevolen voor gevoelige gebieden, huid met trauma, roodheid, ontstekingen, allergieën of andere huidaandoeningen.
4. Verwijder metalen accessoires voordat je met de behandeling begint.

Echografie:

- 1, Stimulatie van bloedvaten, eliminatie van roodheid: toepassing van pulstherapie
Ultrasoon geluid, dat werkt met een geschikt product om bloedvaten en cellulair metabolisme te activeren en, als gevolg van ultrasone mechanische actie, een thermisch effect en fysische en chemische actie te bereiken, voor de juiste stimulatie en massage, vaatverwijding, stimulatie van de bloedstroom en metabolische functie, kan stimuleert bloedvaten om te revitaliseren, elimineert het effect van erytheem.
- 2, Anti-acne therapie met een sterk effect op acne: er zijn veel vormen van acne, het is een van de meer voorkomende gevallen met purulente mee-eters, touch zeer pijnlijk, onjuiste behandeling heeft de neiging om harde littekens te vormen. Echografie kan de lymfeklieren, de bloed- en lymfecirculatie beïnvloeden, de bekleding van ontstekingscellen versnellen.

3, Elimineer sproeten en maak vlekken lichter: ultrageluid kan sproeten en hyperpigmentatie elimineren, de vorming ervan voorkomen, ze verzwakken en ze verwijderen met metabolisme. Ultrageluid kan de absorptie van huidverzorgingsproducten (zoals crèmes, maskers, ampullen met verhelderend effect, enz.

De verwijdering van hyperpigmentatie is zichtbaar na een reeks behandelingen.

4, Ontsmetting en absorptie: de mechanische massagefunctie van ultrageluid dient enerzijds om de onderhuidse cellen te reguleren en de permeabiliteit van het celmembraan te verhogen, en anderzijds om de bloedsomloop en het metabolisme te verbeteren. In combinatie met een goede bloedsomloop en de toevoeging van verzorgingsproducten is het effect bevredigend.

5, Elimineer donkere kringen en wallen van het oog, dankzij het effect van mechanische ultrasone klankmassage, kunnen bloed en lymfeomloop versnellen, en het effect van het verwarmen van het weefsel, kan vet opbreken, de absorptie van actieve ingrediënten door de huid, bovenmatige vochtigheid en vette accumulatie versnellen worden verspreid, wallen en donkere kringen onder de ogen verdwijnen.

Instructies:

(1) Druk op de ultrasone toets op de functieselectie-interface om naar



Introductie van de interface

1. Tijdsaanpassing
2. Energie (toont energie-output)
3. Energieverbruik verminderen
4. Toename in energie
5. Selectie van de toestand van de uitgangsgolf
6. De huidige functietoets afsluiten
7. Start/pauzeknop



(2) Om  te verhogen of  te verlagen tot de juiste tijd (aanbevolen 20 minuten), druk dan op Energie verlagen of Energie verhogen tot de juiste tijd (aanbevolen 20 minuten).

waarden, meestal kiezen voor het tweede niveau,  Uitgangsgolf staat heeft drie modi te kiezen, 

continue golf uitgangsstaat,  brede puls uitgangsstaat. Kies de output golf staat die we nodig hebben,

in het algemeen selecteert u de bijbehorende parameter. .

Plaats de lotion of ampul op de huid voordat u de ultrageluidsonde gebruikt. Beweeg de ultrageluidsonde in een cirkel van onder naar boven.

Opmerkingen:

1, Houd de ultrasone sonde schoon, maak hem na elk gebruik schoon en steriliseer hem met alcohol of

met een ander ontsmettingsmiddel.

2. Plaats de ultrageluidsonde niet op de oogbol.

3. Zorg ervoor dat je tijdens de behandeling de juiste hoeveelheid werkzame stof op de huid aanbrengt.

4. Over het algemeen mag de behandeling niet langer duren dan 15 minuten. Mensen met een klein huidoppervlak moeten de behandeltijd dienovereenkomstig inkorten. De sonde mag niet lang in een bepaalde positie blijven om schade aan het huidweefsel te voorkomen.

5. Vermijd tijdens de behandeling langdurig gebruik van ultrageluid in een toestand van maximale energie-uitgave, wat niet alleen van invloed is op de absorptie door de huid, maar zelfs het huidweefsel kan beschadigen.

Hamer warmte koude

Performance :

Koudetherapie

1, Therapie goed voor , capillaire afdichting.

2. Versterkt elastinevezels, maakt de huid strak en elastisch, strijkt rimpels glad, verwijdert kraaienpootjes.

3, bloedvaten vernauwen, effectief erytheem verminderen en aderen recirculeren - gemakkelijker reinigen en ontgiften.

4, Verminder zenuwgevoeligheid, hebben een kalmerend effect, kalmeren huid, zwelling, pijn, vooral voor allergische huid heeft een goede ondersteunende werking.

5, koude behandeling+ blauw licht kan verlichten huid roodheid, heeft anti-inflammatoire werking


Warmtetherapie

1, Lichte warmte, maakt, ontspant de spieren, balanceert zenuw zelfdiscipline, verlicht pijn. 2、 Stimuleert de bloedsomloop, verhoogt de hoeveelheid zuurstof in het bloed, opent de poriën, verwijdert de bloedvaten waardoor voedingsstoffen sneller worden opgenomen.

3, Verhoogt de stofwisseling van de huid, verhoogt de natuurlijke afvoer van gifstoffen.

Instructies:

- (1) Selecteer de hamerfunctie warm-koud op het display en druk op en
op het display.

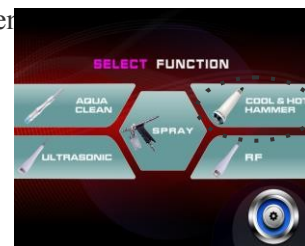

Introductie van de interface

1. Temperatuurstelling
2. Starten / stoppen
3. De hamer koelen
4. Hamerverwarming
5. Geeft de huidige hamer
6. De huidige functietoets afsluiten



temperatuur

(2) Prestatie-effecten

Opmerkingen:

1. Reinig je gezicht met een make-up remover voor het beste resultaat.
 2. Laat de warme en koude hamer niet nat . Veeg hem af met een droge doek.
 3. Zorg voor een goede warmteafgifte, blokkeer de openingen voor warmteafgifte niet
 4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen met een slechte lichamelijke conditie, trage reacties of mentale stoornissen (inclusief kinderen), tenzij ze veilig worden gebruikt onder onder leiding of met hulp van personen die verantwoordelijk zijn voor de veilige uitvoering van de procedure.
 5. Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat spelen. Er moet aandacht worden besteed aan het gebruik van het hele apparaat:
1. Let bij het werken op de bevestiging en aansluiting op de computer en trek niet te hard aan de kabels.
 2. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een speciale kabel of speciale onderdelen die gekocht zijn bij de fabrikant of zijn onderhoudsafdeling.
 3. Als zich tijdens het gebruik van de host abnormale situaties voordoen, moet u onmiddellijk de voeding uitschakelen en
- Haal de stekker uit het stopcontact, neem contact op met uw dealer voor inspectie, open de behuizing niet zonder toestemming.
4. in vochtige ruimtes plaatsen of gebruiken.
 5. Plaats geen ontvlambare of explosieve voorwerpen in de buurt.

In het geval van afwijkingen tussen de tekeningen in deze handleiding en de werkelijke artikelen, hebben de werkelijke artikelen voorrang. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om productverbeteringen. De bovenstaande inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Demonteer het apparaat niet en probeer het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze instructies.

service. Alle onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIV Tomasz Pacholczyk:

a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van deze type apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.