


ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

curățare YOSHIDA 5 în 1 HYDROCLEAN CLEANING
Model - H5020

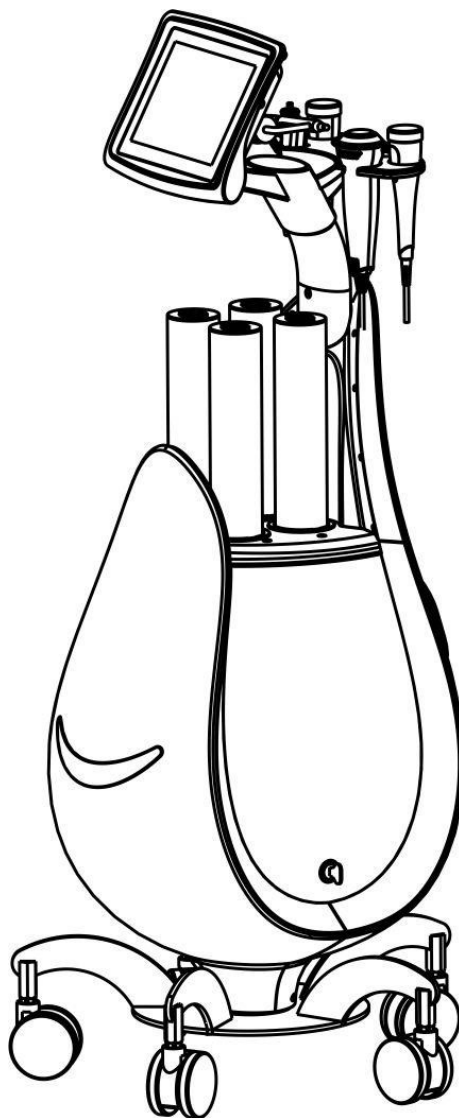

Importator:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl



Acesta nu este un produs medical, vă rugăm să nu îl utilizați pentru tratament medical!

Specificații și date tehnice:

Denumirea produsului	5 IN 1 Coaja de hidrogen Yoshida
Articolul nr.	H5020
Caracteristici	Oxybrasion și peeling cu hidrogen Ultrasunete, RF, spray, căldură cu ciocanul -. rece
Tensiune nominală/putere	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Frecvența de funcționare	50/60Hz
Putere nominală	190W
Dimensiune (LXWXH)	61*41*90.1cm
N.W.	50Kg


Lista de ambalare:

Nume și prenume	Aspectul elementului	Cantitate
Mașină		1 set
Cablu de alimentare		1 buc
Cap RF		1 buc
Cap ultrasunete		1 buc
Ciocan de căldură - rece		1 buc
Airbrush pentru pulverizare		1 buc
Oxybrasion și peeling cap hidrogen		1 buc
Cap de șlefuire		1 set

Plastic dur cap		1 set
Cap din silicon		1 set
Instrucțiuni de utilizare		1 copie

Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului:

1. Ecran de afișare
2. Accesorii
3. Sticle (A,B,C,D)
4. Cheie
5. Panou frontal
6. Suport pentru accesorii
7. Socluri de conectare
8. Buton pornire/oprire
9. Siguranță
10. Priză de rețea

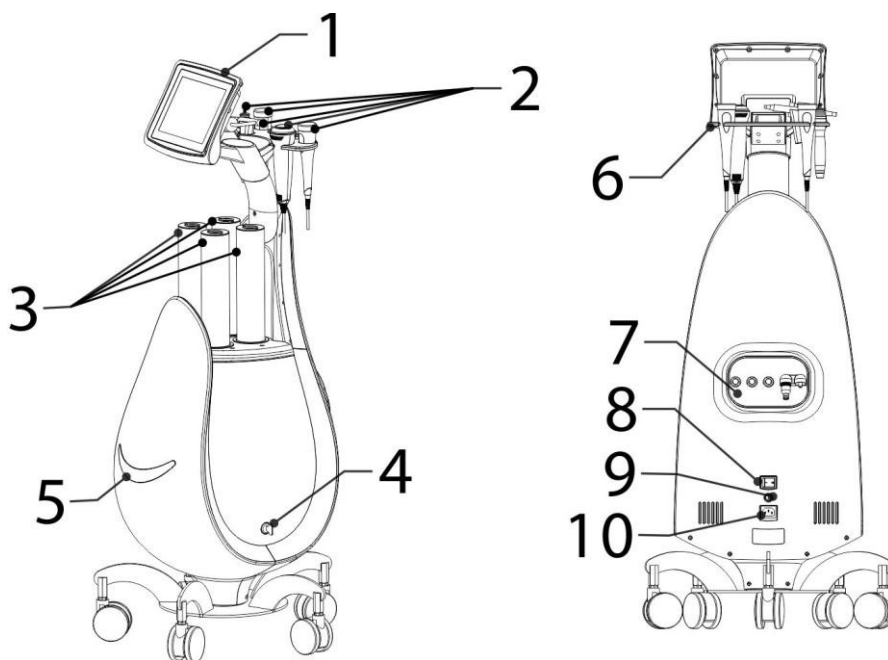

Instrucțiuni și comentarii :

1. Urmăți instrucțiunile pentru a instala accesoriiile.
- 2. Umpleți recipientul cu apă minerală sau alt lichid sub formă apoasă, apoi deschideți butonul superior.**
3. Porniți comutatorul de alimentare de pe partea laterală a cadrului principal. Lumina comutatorului de alimentare se va aprinde.
4. Ridicați ușor ecranul de afișare
5. Funcționarea afișajului și a ecranului: Pornirea alimentării Selectarea funcției - diverse funcții

6. Atingeți ecranul de afișare pentru a selecta funcțiile după cum este necesar

Selectare funcție:

1. Aqua Clean (tratarea apei și a hidrogenului)


2. Ultrasunete

3. Spray

4. Setări

5. RF

6. Ciocan cald-rece

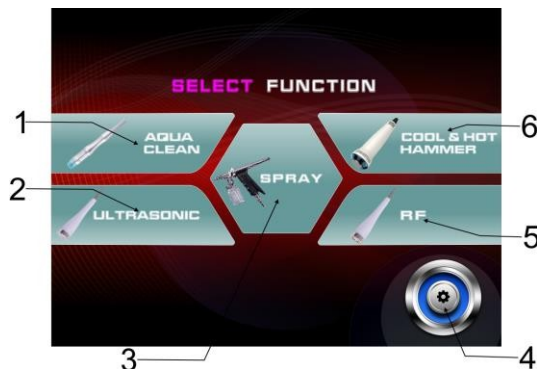

Funcțiile dispozitivului

1. Aqua Clean (curățare profundă)

2. Spray (aplicarea substanțelor active adânc în piele) .

3. RF (Lifting skin.) .

4. Ultrasunete (aplicarea de substanțe active adânc în piele)

5. Ciocan cald-rece (stimularea pielii, a porilor și a vaselor de sânge) .

Etape operaționale:

Funcția Aqua Clean


Prin crearea unui vid, bulele ultra-small și fluidele nutritive sunt complet combinate. Capetele de aspirație spiralate mici, special concepute, acționează direct pe piele, menținând bulele ultra-mici în contact cu pielea pentru o perioadă lungă de timp, sporind efectul de peeling. Acestea curăță în profunzime pielea și îndepărtează celulele de keratină îmbătrânite, eliminând sebumul. În profunzime elimină toate impuritățile, acarienii și reziduurile de sebum din foliculii de păr și reprovizionează pielea cu substanțe nutritive. Pielea este hidratată, moale și strălucitoare.

Pregătirea pentru utilizare

Adăugați lichid special sau apă minerală în sticlă

1. Apăsăți butonul din mijlocul sticlei...

2. Deșurubați capacul superior în direcția săgeții.


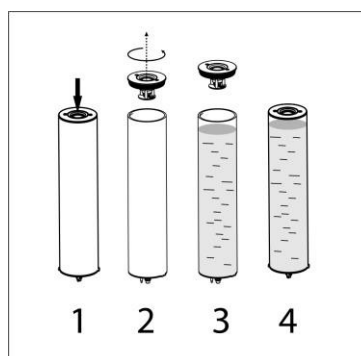


3. Adăugați lichid special sau apă minerală în sticlă

4. Strângeți capacul superior în direcția opusă și apăsați butonul din mijloc (a se vedea imaginea din dreapta)

5. Introduceți sticlele în sloturile gazdă corespunzătoare. (a se vedea imaginea de mai jos)

Notă: Înainte de introducere, verificați dacă inelul de etanșare inferior este intact (a se vedea desenul de mai jos). Un inel de etanșare lipsă sau deteriorat va cauza o scurgere! La inserare, verificați orificiul mic și mare de pe cele două părți pentru a vă asigura se potrivesc, nu veți putea să o introduceți. Introduceți cele 4 sticle de apă în fantele corespunzătoare.

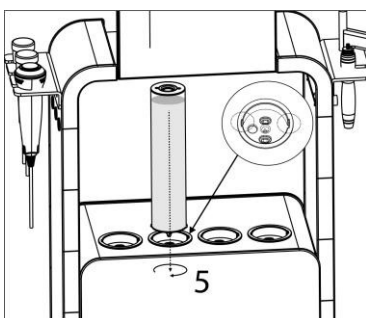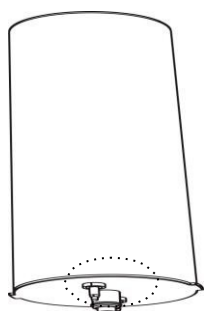


Instrucțiuni de utilizare

(1) Selectați funcția Aqua
ecran.

MENIU

1. Reducerea timpului
2. Cronometru
3. Creșteți timpul
4. Înapoi la meniul principal
5. Reducerea consumului de energie
6. Baton energizant

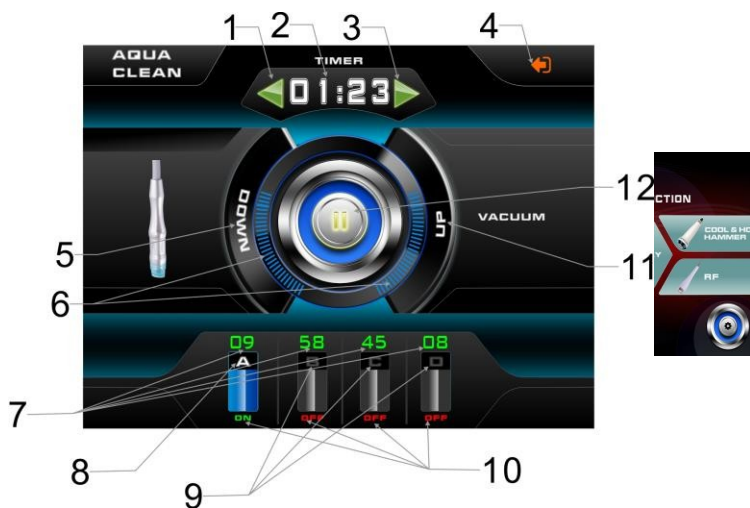

pe

7. Procentul de sticle de apă utilizate

8. Sticlă A

(Activează funcția de apă bogată în hidrogen)

9. Sticlă B,C,D

10. Starea de funcționare a sticlei

11. Creșterea energiei

12. Butonul de pornire

(2). apăsați butonul pe central capac sticle

(altfel se poate scurge apă), apoi apăsați Reduceți timpul



sau

Creșteți timpul  ajustați timpul de utilizare, în funcție de tratamentul efectuat (sugerat 15-20min), apăsați UP și DOWN pentru a regla puterea de aspirare după cum este necesar

(creștere sugerată de la nivelul 2), selectați sticla de care aveți nevoie, puteți alege una sau toate, sticlele

ABCD sunt afișate pe ecran, în partea de jos sunt afișate sticlele active



ca ON , inactive sunt afișate ca OFF , În sticla A este de asemenea posibil să se activeze



funcția de hidrogenare a apei, atunci când se află în funcția  faceți clic din nou pe pictograma sticlei  acest lucru înseamnă că funcția de hidrogenare este activată., atunci când doriți să dezactivați această ,



faceți clic din nou pe pictograma cilindrului  a o închide. (Nota : Doar cilindrul A are această caracteristică , B,C,D nu au această caracteristică) .

Explicație: (Apa cu hidrogen) este raportată științific ca fiind insolubilă în apă cu ajutorul tehnologiei de amestecare lichid-gaz la scară nanometrică și utilizează metode fizice pentru a înconjura uniform moleculele de hidrogen în jurul unei molecule de apă pentru a promova stabilitatea o combinație de hidrogen și apă. Are caracteristicile unei concentrații ridicate de hidrogen și unei bune stabilități. Hidrogenul este un gaz incolor, inodor și netoxic. Natura unică a hidrogenului determină că hidrogenul are multe avantaje în biologie. Cea mai evidentă caracteristică este penetrarea sa puternică straturile pielii, care pot intra cu ușurință în orice parte a celulei, cum ar fi nucleul și

mitocondrii, astfel încât apa bogată în hidrogen are o funcție antioxidantă foarte puternică.

Ajustați procentul de apă pe sticlă, pur și simplu faceți clic pe numărul de pe ecran **45**, numărul va apărea în partea de sus

1. Fereastra de selectare a codului pin
2. Tastatură pentru selectarea codului pin
3. Anularea codului pin
4. Confirmarea codului pin și ieșirea



În interfața de introducere a numerelor, faceți clic pe procentul necesar pentru a introduce numărul de mai sus, de exemplu, introduceți 23, ceea ce înseamnă că 23% din apa din sticlă este utilizată.

apăsați , sistemul salvează valoarea și iese din interfață. Dacă introducerea este greșită,

Apăsați din nou  enter.




După ce a fost setat numărul dorit, apăsați  Începeți lucrul.

(3) funcții

Selectați capul de șlefuire dorit și montați-l pe mandrină



, Trei capete de șlefuire la alegere

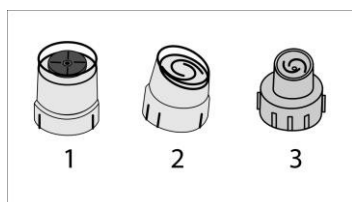

1. Cap de șlefuire
2. Cap din plastic dur
3. Cap din silicon

Capul de măcinare este potrivit pentru exfolierea pielii moarte. Capetele din plastic dur sunt potrivite pentru utilizarea regulată pe piele. Diferitele modele sunt utilizate pentru a curăța întreaga suprafață sau o parte a feței.

Capul din silicon este potrivit pentru pielea sensibilă și nu este iritant.

Întreaga spălare a feței implică 15-20 de minute.

Note privind operațiunile:

1. Când sticla la utilizat lichid este plină, pe ecranul apare apă pe ecran logo-ul de avertizare



apoi terminați munca, deschideți ușa din spate a mașinii, scoateți apa murdară din sticlă. Urmând direcția săgeții, curățați apa murdară și instalați sticla înapoi, a atunci continuați să-l utilizați.

- 2, Inelul de etanșare al sticlei de apă este deteriorat, ceea ce poate provoca o scurgere. Dacă

scurgeri accidentale, întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică,


sticla de apă, uscați apa cu o cârpă uscată și puneți-o într-un loc

loc ventilat până când unitatea este uscată.

reporniți sistemul. Nu deschideți unitatea,

scurgeri de apă! În caz contrar, unitatea va fi

distrus!

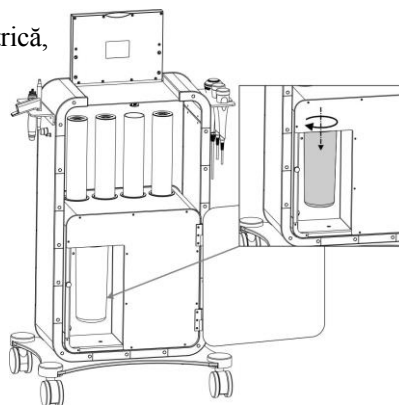

scoateți

uscat,

Încercați

când există

3. Când deplasați unitatea, apăsați

sticla

înapoi pentru a menține sticla de apă închisă pentru a preveni scurgerile.

- 4, Păstrați capul de măcinare curat, curățați sonda după fiecare utilizare și utilizați alcool sau alte instrumente dezinfectante pentru a steriliza sau înlocui noul cap.

- 5, Durata tratamentului nu trebuie să depășească 15 minute. Persoanele cu o zonă mică de piele pe față ar trebui să aibă un tratament mai scurt. Un tratament prea lung poate duce la o exfoliere prea mare sau la o absorbție deficitară a substanțelor active; piesa de mână nu trebuie să rămână în aceeași poziție pentru perioade lungi de timp pentru a evita deteriorarea pielii.


- 6, Un tratament de exfoliere prea lung poate deteriora pielea.

Funcția de pulverizare a apei cu oxigen

Eficiență: apa sau alte substanțe care urmează să fie injectate facilitează absorbția pielii, oxigenarea pielii, activarea celulelor pielii, hrănirea pielii.

Introducere în serviciu

1. Drenare (controlul volumului de ejecție a oxigenului)
2. sticlă
3. mâner

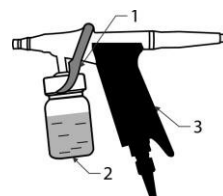


Pregătiți înainte de utilizare

Adăugați apă curată sau esență în



Instrucțiuni:

- (1) Selectare Pictograma SPRAY la selectarea unei funcții trece la interfața de pulverizare

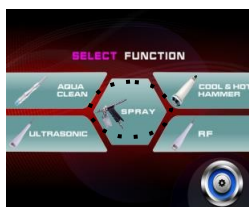

Prezentarea interfeței

1. timp de ajustare
2. activați tasta de pauză
3. ieșirea din tasta funcției curente



- (2) Creșteți sau micșorați până la timpul corect (se recomandă 15 minute) Odată ce toate setările sunt finalizate, apăsați butonul pentru a porni.

Mod de utilizare

- După activarea funcției corespunzătoare pe afișaj, țineți mânerul și ușor apăsați pe trăgaci. O ceață va ieși din duză, turnați diferite tipuri de lichide în ea; După trecerea la un alt lichid, capul este mai întâi oprit, curățați pentru a pune un alt lichid în ea. După pulverizare, funcția trebuie oprită infuzie, apoi utilizați un tampon de bumbac sau o hârtie moale pentru a îndepărta excesul de lichid de pe fața clientului.

Note privind utilizarea:

- Este mai bine să trageți declanșatorul în poziția de mijloc pentru a controla volumul de ceață, dacă trageți declanșatorul până la capăt, este ușor să provocați o scurgere prea mare de apă. Retur Acordați mai multă atenție pozițiilor importante precum gura, nasul și ochii atunci când efectuați tratamentul, cereți clienților să închidă ochii și gura, pulverizați ceața de pe fruntea clientului pentru a lichidului în nările clientului. Păstrați întotdeauna o distanță corespunzătoare față de fața clienților.

RF (frecvență radio)

Funcții: încălzirea țesuturilor, deschiderea porilor, scurtarea lungimii fibrelor de colagen, ameliorează liniile fine și ridurile, restabilește elasticitatea pielii și îmbunătățește conturul feței

Instrucțiuni:

- (1) Apăsați RF în interfața de selectare a funcției pentru a intra



Prezentarea interfeței

1. Ajustarea timpului
2. Bara de energie (Afișează producția de energie
3. Reducerea consumului de energie
4. Creșterea energiei
5. Selectarea forme de undă de ieșire
6. Ieșirea din tasta funcției curente
7. Butonul Start / Pauză



energie)

- (2) măriți sau micșorați la timpul corect (recomandat 30 de minute)

Apoi apăsați scadeți energia sau creșteți energia la nivelul corect, de obicei începeți să selectați puterea la al doilea nivel, trebuie să o testați pe mâna dvs. înainte de a începe tratamentul pe client. Clientul poate simți o ușoară căldură.

Starea undei de ieșire are trei moduri din care se poate alege,  stare de ieșire cu undă continuă,  stare ieșire undă mixtă,  stare de ieșire puls larg. Dacă este necesar, stare undă de ieșire, în general începeți să formați .

(2) Măriți sau micșorați până la timpul corect (se recomandă 30 de minute), Apoi apăsați butonul de micșorare a energiei sau de creștere a energiei până la cantitatea corectă, De obicei, începeți să formați puterea la al doilea nivel, trebuie să o testați pe mâna dvs. înainte de a începe tratamentul pe client. Clientul poate simți o ușoară căldură.

Note privind utilizarea:

1. Aplicați un gel sau un preparat de radiofrecvență pe piele înainte de tratament, nu utilizați capul RF direct pe pielea uscată, capul RF trebuie să fie aproape de piele, nu-l lăsați lăsați pielețele.
2. Dacă temperatura este prea ridicată în timpul utilizării, pur și simplu mutați-o în alte părți și mișcați-vă în cercuri mai repede, acest lucru va reduce temperatura; Dacă temperatura nu este suficient de mare, pentru a deplasa capul RF în cerc mai încet, temperatura va crește încet.
3. Nu este recomandată utilizarea în timpul sarcinii sau alăptării. Nu se recomandă pentru zonele sensibile, pielea cu traume, roșeață, inflamații, alergii sau alte afecțiuni ale pielii.
4. Îndepărtați accesoriile metalice înainte de începerea tratamentului.

Performanța ultrasunetelor:

- 1, Stimularea vaselor de sânge, eliminarea roșeață: aplicarea terapiei cu puls
Ultrasunete, care lucrează cu un produs adecvat pentru a activa vasele de sânge și metabolismul celular și, ca urmare a acțiunii mecanice cu ultrasunete, obținând un efect termic și o acțiune fizică și chimică, pentru Stimulare și masaj adecvat, vasodilatație, stimularea fluxului sanguin și a funcției metabolice, poate stimulează vasele de sânge pentru revitalizare, elimină efectul eritemului.
- 2, Terapie anti-acnee cu un efect puternic asupra acneei: există multe forme de acnee, este unul dintre cele mai frecvente cazuri cu puncte negre purulente, atingere foarte dureroasă, manipularea necorespunzătoare tinde să formeze cicatrici dure. Ultrasunetele pot afecta ganglionii limfatici, circulația sângelui și a limfei, accelerarea mucoasei celulelor inflamatorii.

- 3, Eliminarea pistriurilor și a petelor luminoase: ultrasunetele pot elimina pistriuri și hiperpigmentarea, pot preveni formarea lor, le pot slăbi și le pot elimina cu metabolismul. Ultrasunetele pot crește absorbția produselor de îngrijire a pielii (cum ar fi cremele, măștile, fiolele cu efect de iluminare etc.), Efect
Îndepărtarea hiperpigmentării este vizibilă după o serie de tratamente.
- 4, Decontaminare și absorbție: funcția de masaj mecanic a ultrasunetelor servește la reglarea celulelor subcutanate și la creșterea permeabilității membranei celulare, pe de o parte, și la îmbunătățirea circulației sângelui și a metabolismului, pe de altă parte. În combinație cu circulația adecvată a sângelui și includerea produselor de îngrijire, efectul este satisfăcător.
- 5, Eliminarea cercurilor întunecate și a umflăturilor ochiului, datorită efectului de masaj mecanic cu ultrasunete, poate accelera circulația sângelui și a limfei, iar efectul de încălzire a țesutului, poate rupe grăsimea, accelerează absorbția ingredientelor active de către piele, umiditatea excesivă și acumularea de grăsimi sunt dispersate, umflăturile și cercurile întunecate de sub ochi dispar.

Instrucțiuni:

- (1) Apăsați butonul ultrasonic de pe interfața de selectare a funcției pentru a intra în funcția de ultrasunete.



Prezentarea interfeței

1. Ajustarea timpului
2. Energie (arată producția de energie)
3. Reducerea consumului de energie
4. Creșterea energiei
5. Selectarea stării undei de ieșire
6. Ieșirea din tasta funcției curente
7. Butonul Start / Pauză



- (2) Pentru a mări  sau pentru a micșora  la timpul corect (recomandat 20 de minute), apoi apăsați decrease energy sau increase energy la timpul corect

valori, alegeți de obicei al doilea nivel,  Starea undelor de ieșire are trei moduri de alegere,  starea undelor de ieșire continue,  starea undelor de ieșire cu impulsuri largi. Alegeți starea undei de ieșire de care avem nevoie, selectați în general parametrul corespunzător. .

Puneți loțiunea sau fiola pe piele înainte de a utiliza sonda cu ultrasunete, deplasați sonda cu ultrasunete într-un cerc de jos în sus.

Note:

- 1, Păstrați sonda cu ultrasunete curată, curățați-o după fiecare utilizare și sterilizați-o cu alcool sau

cu un alt dezinfectant.

2, Nu plasați sonda cu ultrasunete pe globul ocular.

3, că aplicați cantitatea corectă de substanță activă pe piele în timpul tratamentului.

4, În general, durata tratamentului nu trebuie să depășească 15 minute. Cei care au o suprafață mică a pielii ar trebui să reducă timpul de tratament în consecință. Sonda nu trebuie să rămână într-o anumită poziție pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea țesutului cutanat.

5, În procesul de tratament, evitați utilizarea prelungită a ultrasunetelor într-o stare de cheltuiala maximă de energie, care nu numai că va afecta absorbția pielii, dar poate chiar deteriora țesutul cutanat.

Ciocan caldură frig

Performanță :

Terapie la rece

1, terapie bună pentru , etanșare capilară.

2, întărește fibrele de elastină, face pielea întinsă și elastică, netezește ridurile, elimină picioarele corbului.

3, vasele de sânge se contractă, reducând în mod eficient eritemul și venele recirculante - mai ușor curățat și detoxificat.

4, Reduceți sensibilitatea nervoasă, aveți un efect calmant, calmați pielea, umflarea, durerea, în special pentru pielea alergică are un efect bun de susținere.

5, tratament la rece+ lumina albastră poate ameliora roșeața pielii, are efecte antiinflamatorii


Terapie termică

1, căldură ușoară, face, relaxează mușchii, echilibrează auto-disciplina nervilor, ameliorează durerea. 2, Stimulează circulația sângelui, crește cantitatea de oxigen în sânge, deschide porii, dilată vasele de sânge și astfel substanțele nutritive sunt absorbite mai repede.

3, Crește rata metabolică a pielii, crește eliminarea naturală a toxinelor.

Instrucțiuni:

(1) Selectați funcția ciocan cald-rece pe afișaj apăsați enter pe afișaj

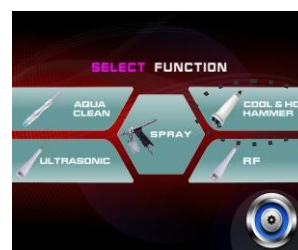

Prezentarea interfeței

1. Setarea temperaturii
2. Start / stop
3. Răcirea ciocanului
4. Încălzire cu ciocan
5. Afișează temperatura curentă
ciocan
6. ieșirea din tasta funcției curente



temperatura

(2) Efecte de
performanță

Observații:

1. Curățați-vă fața cu un demachiant pentru rezultate optime.
2. Nu lăsați ciocanul cald și rece ude. Acesta trebuie șters cu o cârpă uscată.
3. Mențineți o emisie de căldură adecvată, nu blocați orificiile de emisie de căldură
4. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu condiție fizică precară, reacții lente sau tulburări mintale (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate în condiții de siguranță sub direcția sau cu asistența persoanelor responsabile de executarea în siguranță a procedurii.
5. Copiii trebuie supravegheați astfel încât să nu se joace cu echipamentul.

Trebuie acordată atenție utilizării întregului aparat:

1. Când lucrați, acordați atenție atașării și conectării la computer și nu trageți excesiv de cabluri.
2. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu componente speciale achiziționate de la producător sau de la departamentul său de întreținere.
3. Dacă apar situații anormale în procesul de funcționare a gazdei, întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și

Deconectați fișa de alimentare, contactați dealerul pentru inspecție, vă rugăm să nu deschideți carcasa fără permisiune.

4. amplasați sau utilizați în zone umede.

5. Nu amplasați obiecte inflamabile sau explozive în apropiere.

În cazul unor discrepanțe între desenele din acest manual și elementele reale, elementele reale vor avea prioritate.

Compania își rezervă dreptul de a actualiza în permanență și

îmbunătățiri ale produsului. Conținutul de mai sus poate fi modificat fără prealabilă.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Nu dezamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni

service. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nu instalați sau folosiți unitatea în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat oferit de ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri:

a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați lucrul cu unitatea.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. un obiect străin întră deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța indicatoare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

OBSERVAȚII:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.

2. Acest echipament poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient modul de utilizare a aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de copii.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului.

Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui

tipul de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.