


ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

YOSHIDA 5 v 1 HYDROCLEAN CLEANING
Model - H5020

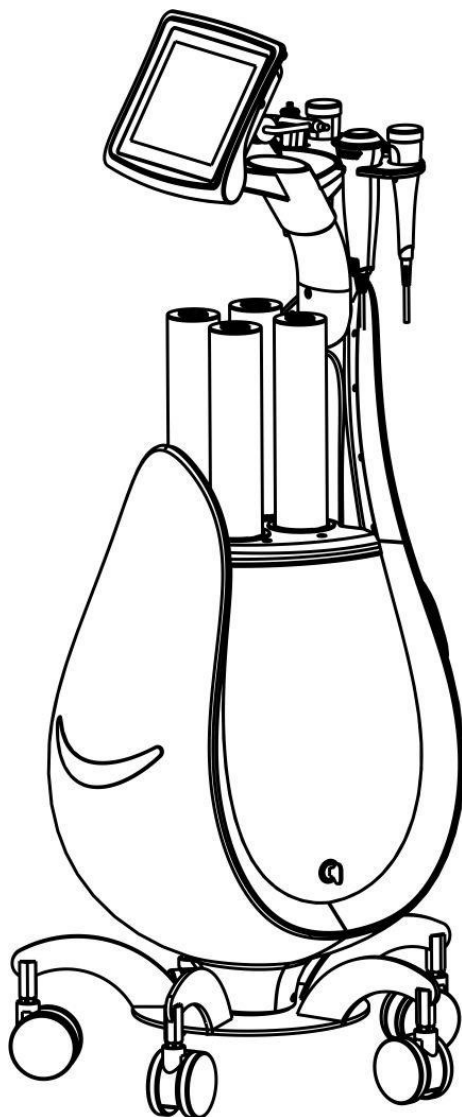

Dovozca:

ACTIV Tomasz
Pacholczyk ul. Graniczna
8b, bud. DC 1 54-610
Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl



Toto nie je zdravotnícky výrobok, nepoužívajte ho na liečbu!

Špecifikácie a technické údaje:

Názov produktu	5 IN 1 Yoshida vodíková kôra
Položka č.	H5020
Funkcie	Oxybrázia a vodíkový peeling, Ultrazvuk, RF, sprej, teplo kladivom -. studené
Menovité napätie/výkon	AC 100-120V ~
	AC 220-240V ~
Prevádzková frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	190W
Rozmery (DXŠXV)	61*41*90,1 cm
N.W.	50 kg


Zoznam balenia:

Názov	Vzhľad prvku	Množstvo
Stroj		1 sada
Napájací kábel		1 ks
RF hlava		1 ks
Hlava ultrazvuk		1 ks
Teplo kladiva - studené		1 ks
Airbrush na striekanie		1 ks
Oxybrázia a peeling hlavy vodík		1 ks
Brúsna hlava		1 sada

Tvrdý plast hlava		1 sada
Silikónová hlava		1 sada
Návod na obsluhu		1 kópia

Návod na obsluhu zariadenia:

1. Obrazovka displeja
2. Príslušenstvo
3. Fľaše (A,B,C,D)
4. Kľúč
5. Predný panel
6. Držiak príslušenstva
7. Pripojovacie zásuvky
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
9. Poistka
10. Sieťová zásuvka

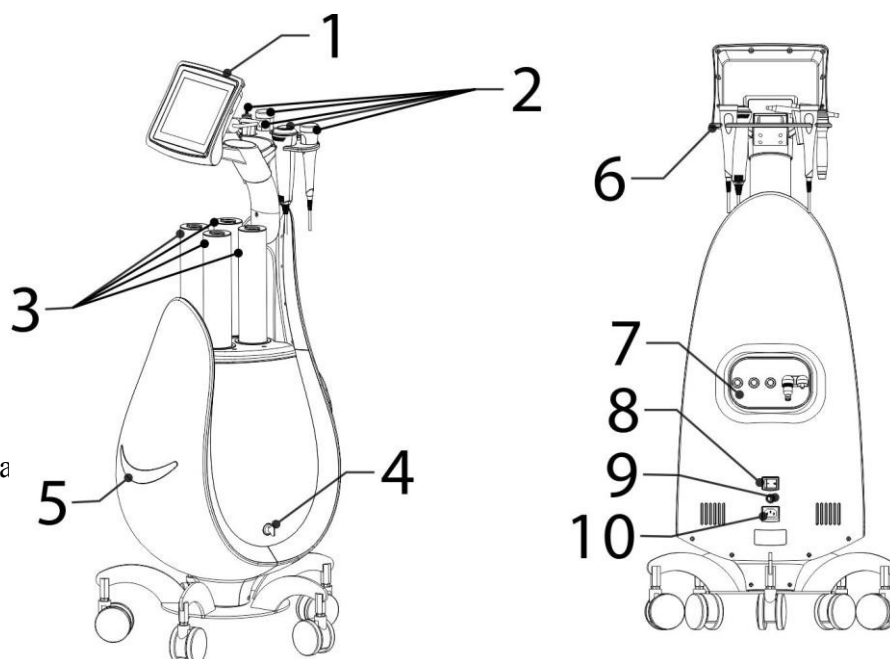

Pokyny a pripomienky :

1. Pri inštalácii príslušenstva postupujte podľa pokynov.
- 2. Naplňte nádobu minerálnou vodou alebo inou tekutinou vo vodnej forme a potom otvorte horné tlačidlo.**
3. Zapnite vypínač na bočnej strane hlavného rámu. Rozsvieti sa kontrolka vypínača napájania.
4. Mierne nadvihnite obrazovku displeja
5. Ovládanie displeja a obrazovky: Zapnutie napájania Výber funkcie - rôzne funkcie

6. Dotknite sa obrazovky displeja a podľa vyberte funkcie Výber

funkcie:

1. Aqua Clean (úprava vody a vodíka)


2. Ultrazvuk

3. Sprej

4. Nastavenia

5. RF

6. Tepelno-chladiace kladivo

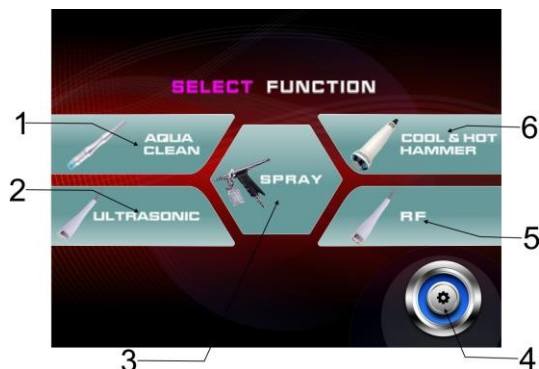

Funkcie zariadenia

1. Aqua Clean (hlbkové čistenie)

2. Sprej (aplikácia účinných látok hlboko do pokožky) .

3. RF (Lifting kože.) .

4. Ultrazvuk (aplikácia účinných látok hlboko do kože)

5. Tepelno-chladové kladivo (stimulácia pokožky, pórov a ciev) .

Prevádzkové kroky:

Funkcia Aqua Clean


Vytvorením vákua sa ultra malé bublinky a živné tekutiny úplne spoja. Špeciálne navrhnuté malé špirálové sacie hlavice pôsobia priamo na pokožku a udržiavajú ultra malé bublinky v kontakte s pokožkou po dlhú dobu, čím zvyšujú peelingový účinok. Hlbkovo čistia pokožku a odstraňujú starnúce keratínové bunky, odstraňujú kožný maz. Dôkladne odstrániť všetky nečistoty, roztoče a zvyšky mazu z vlasových folikulov a doplniť pokožke živiny. Pokožka je hydratovaná, jemná a lesklá.

Príprava na použitie

Do fľaše špeciálnu tekutinu alebo minerálnu vodu



1. Stlačte tlačidlo v strede fľaše...

2. Odskrutkujte horný kryt v smere šípky.

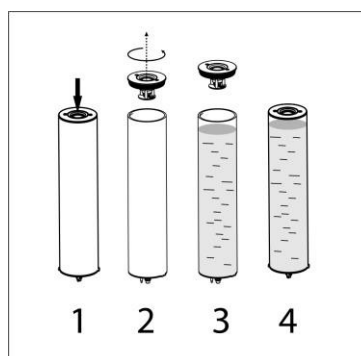

3. Do fľaše pridajte špeciálnu tekutinu alebo minerálnu vodu
4. Utiahnite horný kryt v opačnom smere a stlačte stredné tlačidlo (pozri obrázok vpravo).
5. Vložte fľaše do príslušných otvorov hostiteľa. (pozri obrázok nižšie)

Poznámka: Pred vložením skontrolujte, či je spodný tesniaci krúžok neporušený (pozri kresba nižšie). Chýbajúci alebo poškodený tesniaci krúžok spôsobí netesnosť! Pri vkladaní skontrolujte malý a veľký otvor na oboch stranách, či do zapadajúho nebudete môcť vložiť. Vložte 4 fľaše na vodu do príslušných otvorov.

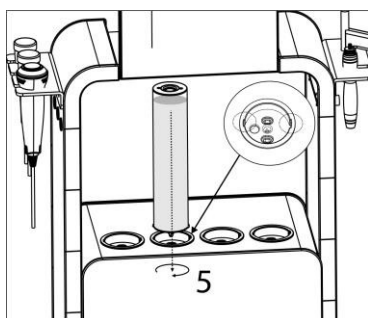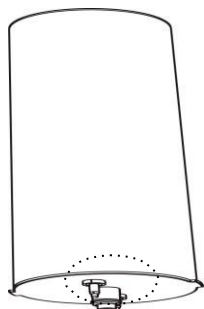


Návod na použitie

- (1) Vyberte funkciu Aqua

obrazovka.

MENU

1. Skrátienie času
2. Časovač
3. Predĺženie času
4. Späť do hlavnej ponuky
5. Zníženie spotreby energie
6. Energetická tyčinka

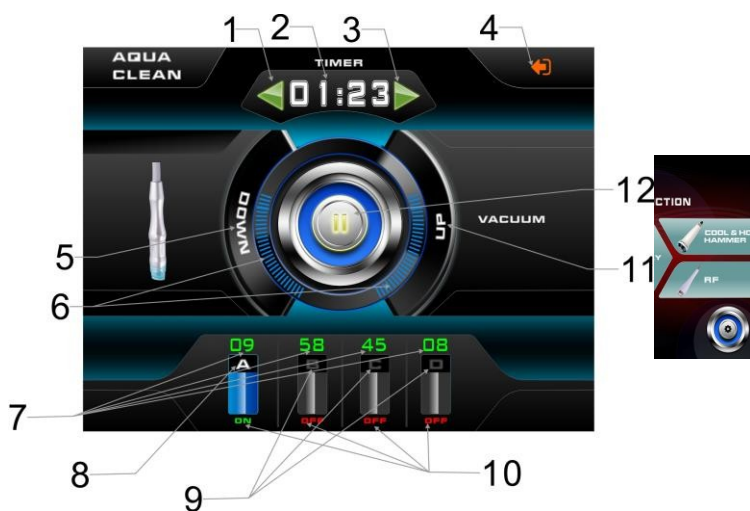

na

7. Percento použitých fliaš na vodu

8. Fľaša A

(Umožňuje funkciu vody bohatej na vodík)

9. Fľaša B,C,D

10. Pracovný stav fľaše

11. Zvyšovanie energie

12. Tlačidlo Štart

(2). stlačte tlačidlo na stránke stred veko Fľaše

(inak môže dôjsť k úniku vody), potom stlačte tlačidlo Redukcia času



alebo

Zvýšte čas  upravte čas používania v závislosti od vykonávaného ošetrenia (navrhuje sa 15-20min), stlačením tlačidiel UP a DOWN upravte sací výkon podľa potreby

(odporúčané zvýšenie od úrovne 2), vyberte fľašu, ktorú potrebujete, môžete si vybrať jednu alebo všetky, na obrazovke sa zobrazia fľaše ABCD, v spodnej časti sa zobrazia aktívne fľaše

ako ON  , neaktívne sú zobrazené ako OFF  , vo fľaši A je možné zapnúť aj

funkcia vodíkovej vody, keď je vo funkcii  , kliknite znova na ikonu fľaše  to znamená, že funkcia vodíkovania je zapnutá., kedy chcete túto vypnúť,

stačí znovu kliknúť na ikonu valca  , čím sa zavrie. (Poznámka: Túto funkciu má len valec A , B,C,D túto funkciu nemajú) .

Vysvetlenie: (vodíková voda) je podľa vedeckých údajov nerozpustná vo vode pomocou technológie miešania kvapaliny a plynu v nanometrovo meradle a využíva fyzikálne metódy na rovnomerné obklopenie molekúl vodíka okolo molekuly vody na podporu stabilného kombinácia vodíka a vody. Vyznačuje sa vysokou koncentráciou vodíka a dobrou stabilitou. Vodík je bezfarebný, bez zápachu a netoxický plyn. Jedinečná povaha vodíka určuje, že vodík má v biológii mnoho výhod. Najzjavnejšou vlastnosťou jeho silný prienik vrstvy kože, ktoré sa môžu ľahko dostať do ktorejkoľvek časti bunky, ako je jadro a

mitochondrie, takže voda bohatá na vodík má veľmi silnú antioxidačnú funkciu.

Upravte percento vody na fľašu, jednoducho kliknite na číslo na obrazovke , číslo sa zobrazí v hornej časti.

1. Okno na výber PIN kódu
2. Klávesnica na výber PIN kódu
3. Zrušenie PIN kódu
4. Potvrdenie PIN kódu a výstup



V rozhraní na zadávanie čísel kliknite na percento, ktoré je potrebné na zadanie vyššie uvedeného čísla, napríklad zadajte 23, čo znamená, že sa použije 23 % vody vo fľaši.

stlačte , systém uloží hodnotu a ukončí rozhranie. Ak je vstup nesprávny,


Opäť stlačte  enter.




Po nastavení požadovaného čísla stlačte tlačidlo .

(3) funkcie

Vyberte požadovanú brúsnu hlavu a nasad'te ju na skľučovadlo

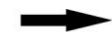

, Tri brúsne hlavy na výber

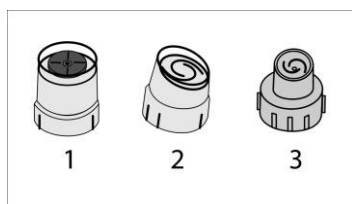

1. Brúsna hlava
2. Hlava z tvrdého plastu
3. Silikónová hlava

Brúsna hlava je vhodná na exfoliáciu odumretej kože. Tvrdé plastové hlavice sú vhodné na pravidelné používanie na pokožke. Rôzne modely sa používajú na čistenie celého povrchu alebo časti tváre.

Silikónová hlavica je vhodná pre citlivú pokožku a nedráždi ju.

Celé umývanie tváre trvá 15-20 minút.

Poznámky k operáciám:


1. Keď fľaša na použité kvapalina je plná, na obrazovka sa objaví sa na obrazovke objaví logo varovné logo



potom dokončíte prácu, otvorte zadné dvierka na stroji a vyberte špinavú vodu z fľaše. Podľa smeru šípky vyčistíte špinavú vodu a nainštalujte fľašu späť, a potom ho používajte aj naďalej.

- 2, tesniaci krúžok fľaše na vodu je poškodený, čo môže spôsobiť únik. Ak je náhodne unikne, okamžite vypnite napájanie, vodu, vysušte ju suchou handričkou a vložte ju do nádoby,

vetranom mieste, kým jednotka nevyschne. reštartovať systém. Neotvárajte jednotku, uniká voda! v opačnom prípade sa jednotka zničené!

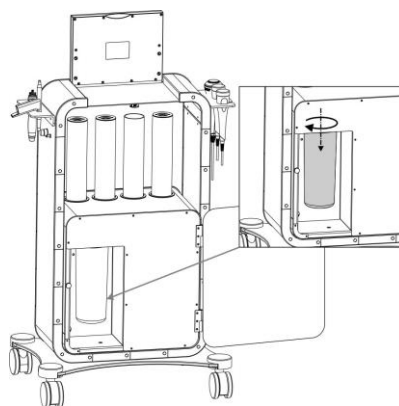

vytiahnite do suchej

Vyskúšajte keď

3. pri premiestňovaní jednotky stlačte tlačidlo späť, aby bola fľaša s vodou uzavretá a nedošlo k jej vyliatiu.

fľašu

- 4, Udržujte brúsnu hlavu čistú, po každom použití sondu vyčistíte a na sterilizáciu alebo výmenu novej hlavy použite alkohol alebo iné dezinfekčné prostriedky.

- 5, Čas ošetrenia by nemal presiahnuť 15 minút. Ľudia s malou plochou pokožky na tvári by mali mať kratšiu liečbu. Príliš dlhé ošetrenie môže mať za následok prílišnú exfoliaciu alebo zhoršené vstrebávanie účinných látok; rukoväť by nemala zostať v jednej polohe dlhý čas, aby nedošlo k poškodeniu pokožky.


- 6, Príliš dlhá exfoliačná kúra môže poškodiť pokožku.

Funkcia rozprašovania kyslíkovej vody

Účinnosť: voda alebo iná látka, ktorá sa má streknúť, uľahčuje vstrebávanie do pokožky, okysličenie pokožky, aktiváciu kožných buniek, výživu pokožky.

Úvod do služby

1. Vypúšťanie (kontrola objemu vypúšťaného kyslíka)
2. fľaša
3. rukoväť

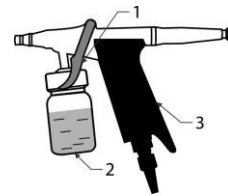


Príprava pred použitím

Do pridajte čistú vodu alebo esenciu



Pokyny:

- (1) Výber Ikona SPRAY pri výbere funkcie prepne na rozhranie spreja

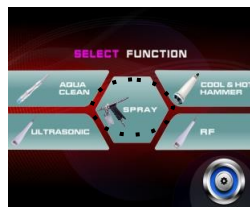

Zavedenie rozhrania

1. čas prispôsobenia
2. aktivovať tlačidlo pozastavenia
3. Ukončenie aktuálneho funkčného tlačidla



- (2) Zvýšte alebo znížte čas na správny čas (odporúča sa 15 minút) Po dokončení všetkých nastavení stlačte tlačidlo na spustenie.

Ako používať

- Po aktivácii príslušnej funkcie na displeji podržte rukoväť a jemne stlačiť spúšť. Z trysky bude vychádzať hmla, do ktorej nalejte rôzne druhy kvapalín; Po zmene na inú kvapalinu sa hlava najprv zastaví, vyčistí sa fľašu, aby ste do nej inú tekutinu. Po postriekaní by sa mala funkcia zastaviť potom pomocou vatového tampónu alebo mäkkého papiera odstráňte prebytočnú tekutinu z tváre klienta.

Poznámky k používaniu:

- Je lepšie stlačiť spúšť do strednej polohy, aby ste kontrolovali objem hmly, ak stlačíte spúšť až na doraz, ľahko spôsobíte príliš veľký únik vody. Návrat
Pri ošetrovaní venujte väčšiu pozornosť dôležitým miestam, ako sú ústa, nos a oči, požiadajte klientov, aby zatvorili oči a ústa, rozprašujte hmlu z čela klienta, aby ste vniknutiu tekutiny do nosných dierok klienta. Vždy udržiavajte primeranú vzdialenosť od tváre klienta.

RF (rádiová frekvencia)

Funkcie: zahrievanie tkaniva, otváranie pórov, skracovanie dĺžky kolagénových vlákien, zlepšuje jemné linky a vrásky, obnovuje pružnosť pokožky a zlepšuje kontúry tváre

Pokyny:

- (1) Stlačením tlačidla RF v rozhraní na výber funkcií vstúpte do



Zavedenie rozhrania

- Úprava času
- Energetická lišta (Zobrazuje energetický výkon
- Zníženie spotreby energie
- Zvyšovanie energie
- Výber výstupného tvaru vlny
- Ukončenie aktuálneho funkčného tlačidla
- Tlačidlo Štart/Pauza



energie)

- (2) zvýšte  alebo znížte  na správny čas (odporúča sa 30 minút) ,

Potom stlačte zníženie energie alebo zvýšenie energie na správnu úroveň, Zvyčajne začnite vyberať výkon na druhej úrovni, mali by ste ho vyskúšať na ruke pred začatím liečby na klientovi. Klient môže cítiť mierne teplo.

Výstupný vlnový stav má na výber z troch režimov:  kontinuálny vlnový výstupný stav ,  stav

zmiešaný vlnový výstup ,  široký impulzný výstupný stav . v prípade potreby výstupný vlnový stav, spravidla začať vytáčať  .

(2) Zvýšte alebo znížte na správny čas (odporúča sa 30 minút), potom stlačte zníženie energie alebo zvýšenie energie na správnu hodnotu, zvyčajne začnite vytáčať výkon na druhej úrovni, mali by ste ho vyskúšať na ruke pred začatím ošetrovania na klientovi. Klient môže cítiť mierne teplo.

Poznámky k používaniu:

1. Pred ošetrením naneste na pokožku gél alebo rádiový prípravok, nepoužívajte RF hlavice priamo na suchú pokožku, RF hlava musí byť blízko pokožky, nenechajte ju nechať kožu na mieste.
2. Ak je teplota pri používaní príliš vysoká, jednoducho ju presuňte na iné časti a pohybujte sa v kruhoch rýchlejšie, čím sa teplota zníži; ak teplota nie je dostatočne vysoká, Ak chcete pohybovať hlavou RF v kruhu pomalšie, teplota sa bude pomaly zvyšovať.
3. Neodporúča sa používať počas tehotenstva alebo dojčenia. Neodporúča sa na citlivé miesta, pokožku s poranením, začervenaním, zápalom, alergiami alebo inými kožnými ochoreniami.
4. Pred začatím ošetrovania odstráňte kovové príslušenstvo.

Ultrazvukový

výkon:

- 1, Stimulácia , odstránenie začervnenia: aplikácia pulznej terapie

Ultrazvuk, ktorý pracuje s vhodným produktom na aktiváciu ciev a bunkového metabolizmu a v dôsledku mechanického pôsobenia ultrazvuku dosahuje tepelný efekt a fyzikálne a chemické pôsobenie, na vhodnú stimuláciu a masáž, vazodilatáciu, stimuláciu prietoku krvi a metabolických funkcií, môže

stimuluje krvné cievy k revitalizácii, eliminuje účinok erytému.

- 2, Anti-akné terapia so silným účinkom na akné: existuje mnoho foriem akné, je to jeden z častejších prípadov s hnisavými čiernymi bodkami, dotyk veľmi bolestivý, nesprávna manipulácia má tendenciu vytvárať tvrdé jazvy. Ultrazvuk môže ovplyvniť lymfatické uzliny, krvný a lymfatický obeh, urýchliť výstelku zápalových buniek.

- 3, odstránenie pieh a zosvetlenie škvŕn: ultrazvuk dokáže odstrániť pehy a hyperpigmentáciu, zabrániť ich vzniku, oslabiť ich a odstrániť ich pomocou metabolizmu. Ultrazvuk môže zvýšiť vstrebávanie prípravkov starostlivosti o pleť (ako sú krémy, masky, ampulky s rozjasňujúcim účinkom atď). Odstránenie hyperpigmentácie je viditeľné po sérii ošetrení.
- 4, Dekontaminácia a absorpcia: mechanická masážna funkcia ultrazvuku slúži na jednej strane na reguláciu podkožných buniek a zvýšenie priepustnosti bunkových membrán a na druhej strane na zlepšenie krvného obehu a metabolizmu. V kombinácii so správnym krvným obehom a zahrnutie výrobkov na starostlivosť je uspokojujivé.
- 5, Odstráňte tmavé kruhy a opuchy očí, vďaka účinku mechanickej ultrazvukovej masáže môžete urýchliť krvný a lymfatický obeh a účinok ohrievania tkaniva, môže rozbiť tuk, urýchliť vstrebávanie účinných látok pokožkou, nadmernú vlhkosť a hromadenie tuku sa rozptýlia, opuchy a tmavé kruhy pod očami zmiznú.

Pokyny:

- (1) Stlačením ultrazvukového tlačidla na rozhraní výberu funkcií vstu



Zavedenie rozhrania

1. Úprava času
2. Energia (zobrazuje energetický výkon)
3. Zníženie spotreby energie
4. Zvýšenie energie
5. Výber stavu výstupnej vlny
6. Ukončenie aktuálneho funkčného tlačidla
7. Tlačidlo Štart/Pauza



- (2) Ak chcete zvýšiť  alebo znížiť  na správny čas (odporúča sa 20 minút) , potom stlačte zníženie energie alebo zvýšenie energie na správny

hodnoty, zvyčajne vyberte druhú úroveň ,  Výstupný vlnový stav má na výber tri režimy ,  kontinuálny vlnový výstupný stav ,  široký impulzný výstupný stav. Vyberte stav výstupnej vlny, ktorý potrebujeme, spravidla vyberte príslušný parameter. .

Pred použitím ultrazvukovej sondy naneste na pokožku krém alebo ampulku a pohybujte ultrazvukovou sondou v kruhu zdola nahor.

Poznámky:

- 1, Udržujte ultrazvukovú sondu čistú, po každom použití ju vyčistite a sterilizujte alkoholom alebo

iným dezinfekčným prostriedkom.

2, Neumiestňujte ultrazvukovú sondu na očné bulvy.

3, počas ošetrenia aplikujete na pokožku správne množstvo účinnej látky.

4, Vo všeobecnosti by čas liečby nemal presiahnuť 15 minút. Osoby s malou plochou pokožky by mali čas ošetrenia primerane skrátiť. Sonda by nemala zostať dlho v určitej polohe, aby nedošlo k poškodeniu kožného tkaniva.

5, V procese liečby sa vyhnite dlhodobému používaniu ultrazvuku v stave maximálny energetický výdaj, čo nielenže ovplyvní absorpciu pokožky, ale môže dokonca poškodiť kožné tkanivo.

Kladivo teplo chlad

Performance :

Terapia chladom

1, Terapia vhodná na , kapilárne tesnenie.

2, Posilňuje elastínové vlákna, dodáva pokožke napätie a pružnosť, vyhladzuje vrásky, odstraňuje kurie oká.

3, krvné cievy sa stiahnu, čím sa účinne zníži erytém a recirkulácia žíl - ľahšie sa čistia a detoxikujú.

4, Zníženie nervovej citlivosti, upokojujúci účinok, upokojenie pokožky, opuch, bolesť, najmä pre alergickú pokožku má dobrý podporný účinok.

5, liečba chladom+ modré svetlo môže zmierniť začervenanie pokožky, má protizápalové účinky


Tepelná terapia

1, Mierne teplo, uvoľňuje svaly, vyrovnáva nervovú sebadisciplínu, zmiernuje bolesť. 2, Stimuluje krvný obeh, zvyšuje množstvo kyslíka v krvi, otvára póry, rozširuje cievy, a tak sa živiny rýchlejšie vstrebávajú.

3, Zvyšuje rýchlosť metabolizmu pokožky, zvyšuje prirodzené vylučovanie toxínov.

Pokyny:

(1) Na displeji zvolíte funkciu kladiva horúce-studené stlačte enter na displeji

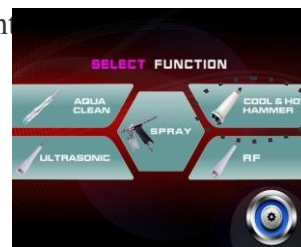

Zavedenie rozhrania

1. Nastavenie teploty
2. Štart / stop
3. Chladenie kladiva
4. Kladivkové vykurovanie
5. Zobrazí aktuálny kladivo
6. Ukončenie aktuálneho funkčného tlačidla



(2) Účinky na

výkon Komentáre:

1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov si tvár očistite odličovacím prípravkom.
 2. Nedovoľte, aby horúce a studené kladivo . Malo by utierať suchou handričkou.
 3. Udržujte správne vyžarovanie tepla, neblokujte otvory na vyžarovanie tepla
 4. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so slabou fyzickou kondíciou, pomalými reakciami alebo duševnými poruchami (vrátane detí), pokiaľ sa nepoužíva bezpečne pod vedením alebo s pomocou osôb zodpovedných za bezpečné vykonanie postupu.
 5. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Pozornosť by sa mala venovať používaniu celého zariadenia:
1. Pri práci dávajte pozor na upevnenie a pripojenie k počítaču a neťahajte príliš za káble.
 2. Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za špeciálny kábel alebo špeciálne komponenty zakúpené u výrobcu alebo v jeho oddelení údržby.
 3. Ak sa v procese prevádzky hostiteľa vyskytnú abnormálne situácie, okamžite vypnite napájanie a Odpojte sieťovú zástrčku, obráťte sa na predajcu, aby vykonal kontrolu, bez povolenia neotvárajte kryt.
 4. nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.
 5. V blízkosti neumiestňujte horľavé alebo výbušné predmety.

V prípade nezrovnalostí medzi výkresmi v tejto príručke a skutočnými položkami majú prednosť skutočné položky. Spoločnosť si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať a vylepšenia produktu. Vyššie uvedený obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.

- služby. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk:
- a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. sa do otvoru dostane cudzí predmetvyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZNÁMKY:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použitú elektrickú spotrebič, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto

typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.