

# ACTIVESHOP®

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Elegante platinum T6 kūno lieknėjimo sistemos prietaisas



### Importuotojas:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Lenkija  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
A/09/2024 redakcija



## Įrenginio konstrukcija



## Galvos

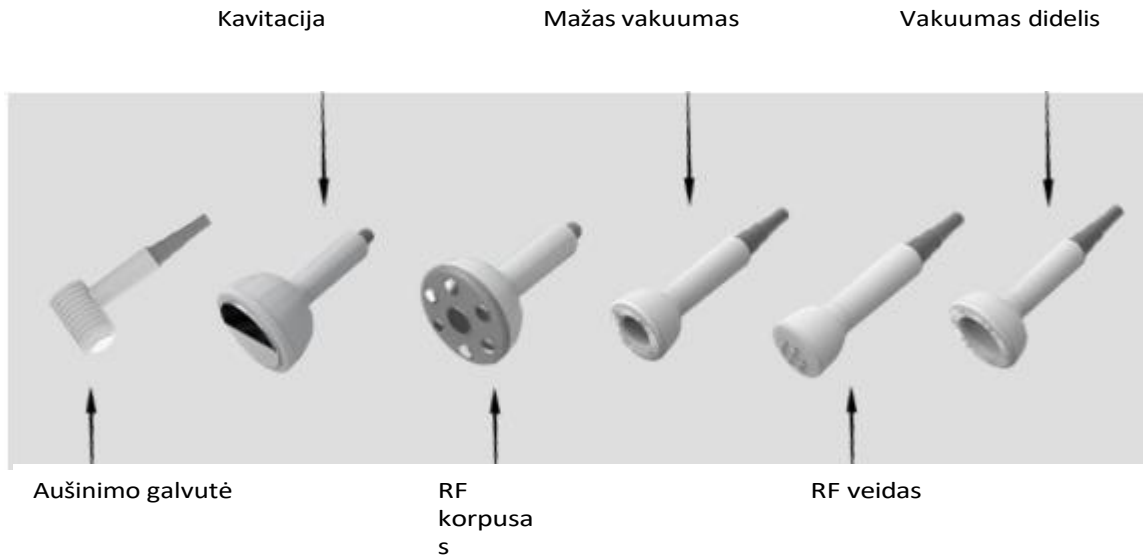

## Jungiamosios galvutės

### 1. Aušinimo galvutė



### 2. Dulkių siurblio galvutė didelė



### 3. Maža vakuuminė galvutė



### 4. Kavitacija



### 5. RF korpusas



## 6. RF veidas



## Techniniai duomenys

<b>Įtampa</b>	<b>220-240V</b>
<b>Maitinimas</b>	<b>95W</b>
<b>Dabartinis intensyvumas</b>	<b>2A</b>
<b>Bendrasis svoris</b>	<b>15 kg</b>

## Matmenys




## Naudojimo instrukcijos:

1. Prijunkite galvutes prie įrenginio ir tada prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
2. Įjunkite įrenginį naudodami O/I mygtuką galinėje pusėje ir paspauskite jungiklį priekyje.
3. Bus rodomas šis meniu.

4. Paspauskite atitinkamos galvutės piktogramą.



5. Bus rodomas šis meniu

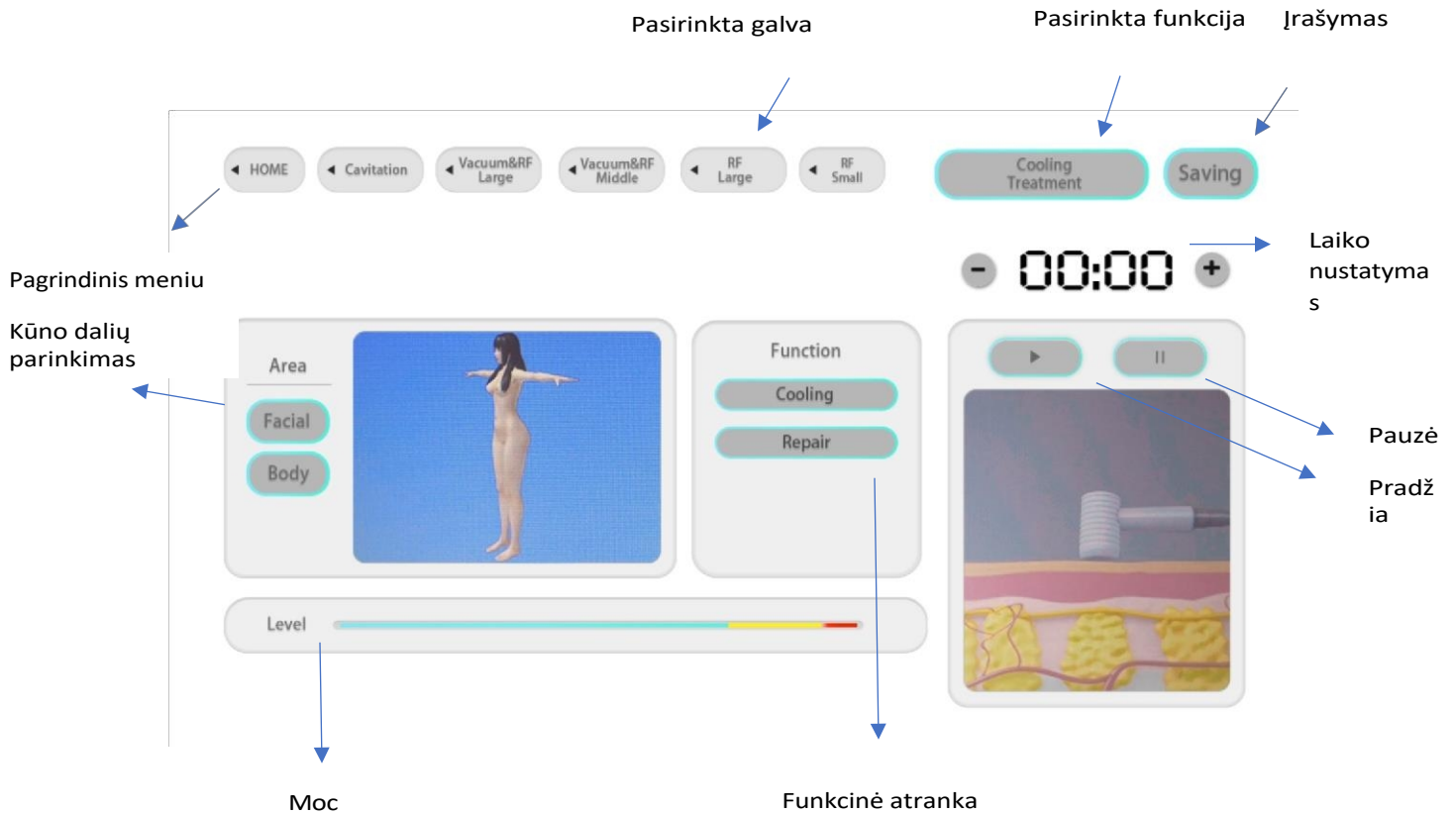

6. Pasirinkite atitinkamą galvutę, kūno dalį, funkciją, galingumą ir gydymo laiką ir paspauskite mygtuką Start. Galingumą ir gydymo laiką reikia reguliuoti individualiai, kad atitiktų jūsų poreikius.
7. Jei norite išsaugoti konkrečios kūno dalies nustatymus, paspauskite Saving (Išsaugoti) ir tada Yes (Taip).
8. Perkelkite galvą virš pasirinktos kūno dalies.

### Dėmesio!

Kad išvengtumėte sužalojimų, nelaikykite galvos per ilgai vienoje vietoje, o judinkite ją aplink kūną.

### Rekomenduojama gydymo trukmė:

1. **Kavitacija** - mažina riebalų kiekį, lieknina ir stangrina odą
  - Rankos 10-15 minučių,
  - Talija 15-20 minučių,
  - Kojos 10-15 minučių,
2. **Vakuumas ir RF** (RF procedūroms naudojamas specialus gelis) - stangrina odą, stimuliuoja kolageno skaidulų atsinaujinimą
  - Talija 15-20 minučių,
  - Kojos 10-15 minučių,
  - Atgal 10-15 minučių,
  - Rankos 10-15 minučių,
3. **Vėsinanti galvutė** - sutraukia kraujagysles, mažina odos paraudimą
  - Veidas 10-15 minučių,
4. **Didelė RF** (RF procedūroms reikia naudoti specialų gelį) - raukšlių mažinimas, kraujotakos gerinimas, kolageno skaidulų stimuliavimas regeneracijai.
  - Talija 15-20 minučių,
  - Kojos 10-15 minučių,
  - Rankos 10-15 minučių,
5. **Mažoji RF** (RF procedūroms reikia naudoti specialų gelį) - raukšlių mažinimas, kraujotakos gerinimas, kolageno skaidulų stimuliavimas regeneracijai.
  - Veidas 15-20 minučių,
  - Pečių raumenys 10-15 minučių.

### Prietaiso techninė priežiūra

1. Palaikykite įrenginį švarų. Jei reikia, nuvalykite jį minkšta, drėgna šluoste.
2. Prieš gydymą ir po jo galvutes reikia dezinfekuoti. Per didelė dezinfekavimo priemonės koncentracija gali pažeisti galvutes.
3. Nevaldykite jutiklinio skydelio rašikliu ar kitais daiktais, kurie gali pažeisti paviršių.
4. Išjungus prietaisą, jis atvėsta maždaug per 15 minučių. Leiskite komponentams atvėsti.

### Gydymo kontraindikacijos:

1. Širdies stimulatorius arba implantuotas defibriliatorius.
2. Odos vėžys arba ikivėžinės stadijos.
3. Metaliniai implantai kūne.
4. Hipertenzija, diabetas ir širdies ligos.
5. Nėštumas ir žindymas.

6. Atviros žaizdos arba infekcijos.
7. Kūno dalių gydymas

## Pagrindinių problemų sprendimas

Problema	Sprendimo būdas
Įrenginys neįsijungia	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimas Patikrinkite, ar įjungti mygtukai
Galva neveikia	Patikrinkite, ar teisingai prijungta galvutė
Įrenginys perkaito	Sustabdykite darbą ir leiskite įrenginiui atvėsti
Nėra maitinimo šaltinio	Patikrinkite saugiklį

## SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam medicinos personalui, išvengiama nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
  - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
6. Saugumo sumetimais ištraukite kabelį iš lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su prietaisu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

## PASTABA

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir nėra susipažinę su šia įranga, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų susijusių riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.



4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaizdas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekdami apsaugoti aplinką pagal

Direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turėtų būti renkamos atskirai ir perduodamos į elektroninės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus. Todėl nebenaudojami ir seni prietaisai, kuriuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, turėtų būti siunčiami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat gali būti perduodami įmonei ACTIVESHOP Sp. z o.o.

## SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti gabenamas tik originalioje pakuotėje (-) 20 °C - (+) 50 °C temperatūroje. Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė yra ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.