

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dispozitiv pentru sistemul de slăbire corporală Elegante platinum T6




Importator:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Construcția dispozitivului

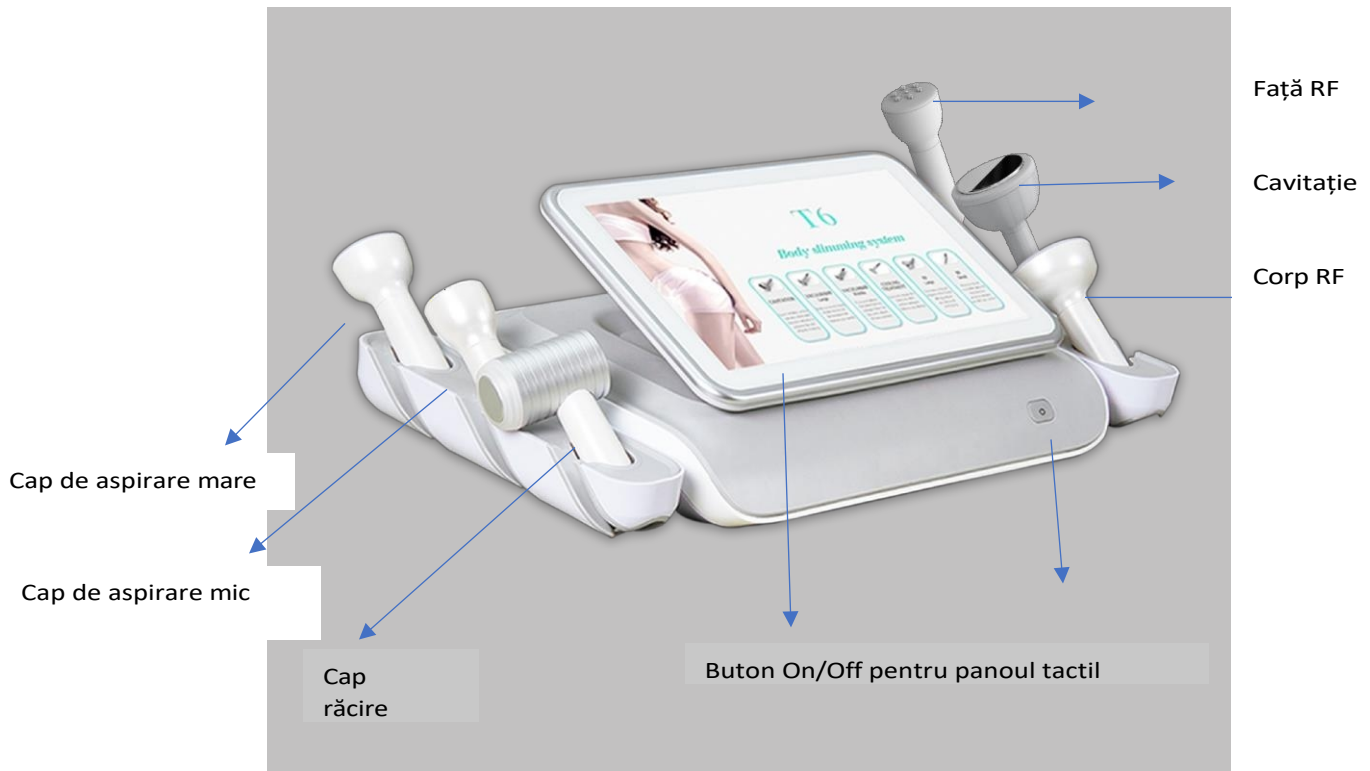

Capete

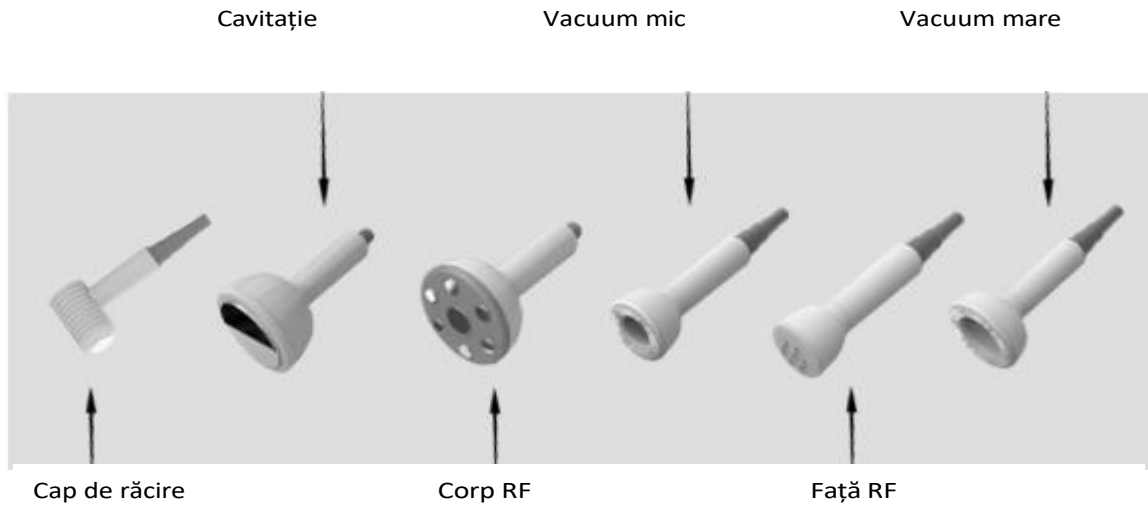

Capete de conectare

1. Cap de răcire



2. Cap de aspirare mare



3. Cap de aspirare mic



4. Cavitație



5. Corp RF



6. Față RF



Date tehnice

Tensiune	220-240V
Putere	95W
Intensitatea curentă	2A
Greutatea brută	15 kg

Dimensiuni




Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectați capetele la unitate și apoi conectați unitatea la sursa de alimentare.
2. Porniți unitatea utilizând butonul O/I de pe spate și apăsați comutatorul de pe partea frontală.
3. Va fi afișat următorul meniu.

4. Apăsați pe pictograma capului corespunzător.



5. Va fi afișat următorul meniu

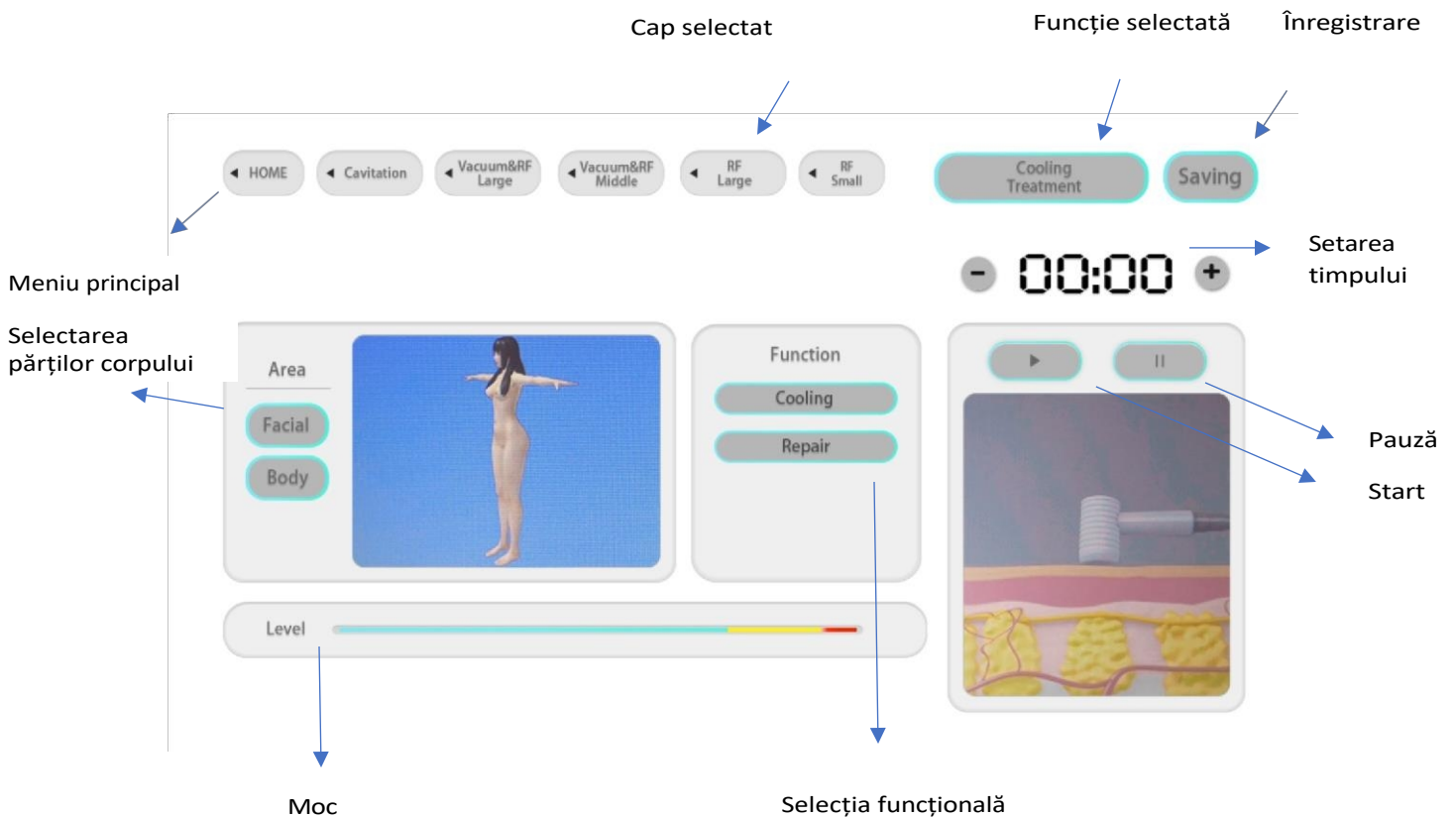

6. Selectați capul, partea corpului, funcția, puterea și timpul de tratament corespunzătoare și apăsați butonul Start. Puterea și timpul de tratament trebuie ajustate individual pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.
7. Dacă doriți să salvați setările date pentru o anumită parte a corpului, apăsați Salvare și apoi Da.
8. Deplasați capul peste partea de corp selectată.

Atenție!

Pentru a evita rănilor, nu țineți capul prea mult timp într-un singur loc, ci mișcați-l în jurul corpului.

Durata recomandată a tratamentelor:

1. **Cavitație** - reduce grăsimea, subțiază și întărește pielea
 - Mâini 10-15 minute,
 - Talia 15-20 de minute,
 - Picioare 10-15 minute,
2. **Vacuum & RF** (utilizați gel special pentru tratamentele RF) - întărește pielea, stimulează regenerarea fibrelor de colagen
 - Talia 15-20 de minute,
 - Picioare 10-15 minute,
 - Înapoi 10-15 minute,
 - Brațe 10-15 minute,
3. **Cap de răcire** - micșorează vasele de sânge, reduce roșeața pielii
 - Fața 10-15 minute,
4. **RF mare** (trebuie utilizat un gel special pentru tratamentele RF) - reducerea ridurilor, îmbunătățirea circulației sângelui, stimularea fibrelor de colagen pentru regenerare
 - Talia 15-20 de minute,
 - Picioare 10-15 minute,
 - Brațe 10-15 minute,
5. **RF mică** (trebuie utilizat un gel special pentru tratamentele RF) - reducerea ridurilor, îmbunătățirea circulației sângelui, stimularea fibrelor de colagen pentru regenerare
 - Fața 15-20 de minute,
 - Umerii 10-15 minute.

Întreținerea aparatului

1. Păstrați unitatea curată. Dacă este necesar, ștergeți cu o cârpă moale, umedă.
2. Capetele trebuie dezinfectate înainte și după tratament. O concentrație prea mare de dezinfectant poate provoca deteriorarea capetelor.
3. Nu utilizați panoul tactil cu stylus sau alte obiecte care pot deteriora suprafața.
4. Aparatul se răcește timp de aproximativ 15 minute după oprire. Lăsați componentele să se răcească.

Contraindicații la tratament:

1. Pacemaker sau defibrilator implantat.
2. Cancer de piele sau stadii precanceroase.
3. Implanturi metalice în organism.
4. Hipertensiune arterială, diabet și boli de inimă.
5. Sarcina și alăptarea.

6. Răni deschise sau infecții.
7. Vindecarea părților corpului

Rezolvarea problemelor de bază

Problema	Metoda de soluționare
Dispozitivul nu pornește	Verificați dacă conexiunea de alimentare este corectă Verificați dacă butoanele sunt pornite
Capul nu funcționează	Verificați dacă capul este conectat corect
Dispozitivul s-a supraîncălzit	Opriți activitatea și lăsați unitatea să se răcească
Nu există sursă de alimentare	Verificați siguranța

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia estetică. Operarea dispozitivului numai de către personal medical calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați sau folosiți unitatea în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
 - a) A intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
 - c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul din priză de fiecare dată când terminați lucrul cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța indicatoare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

NOTĂ

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare, păstrați aparatul la îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu

Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin urmare, aparatele scoase din uz și aparatele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare relevante și pot fi, de asemenea, predate societății ACTIVESHOP Sp. z o.o..

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie să fie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.