

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Zariadenie na chudnutie Elegante platinum T6




Dovozca:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Konštrukcia zariadenia

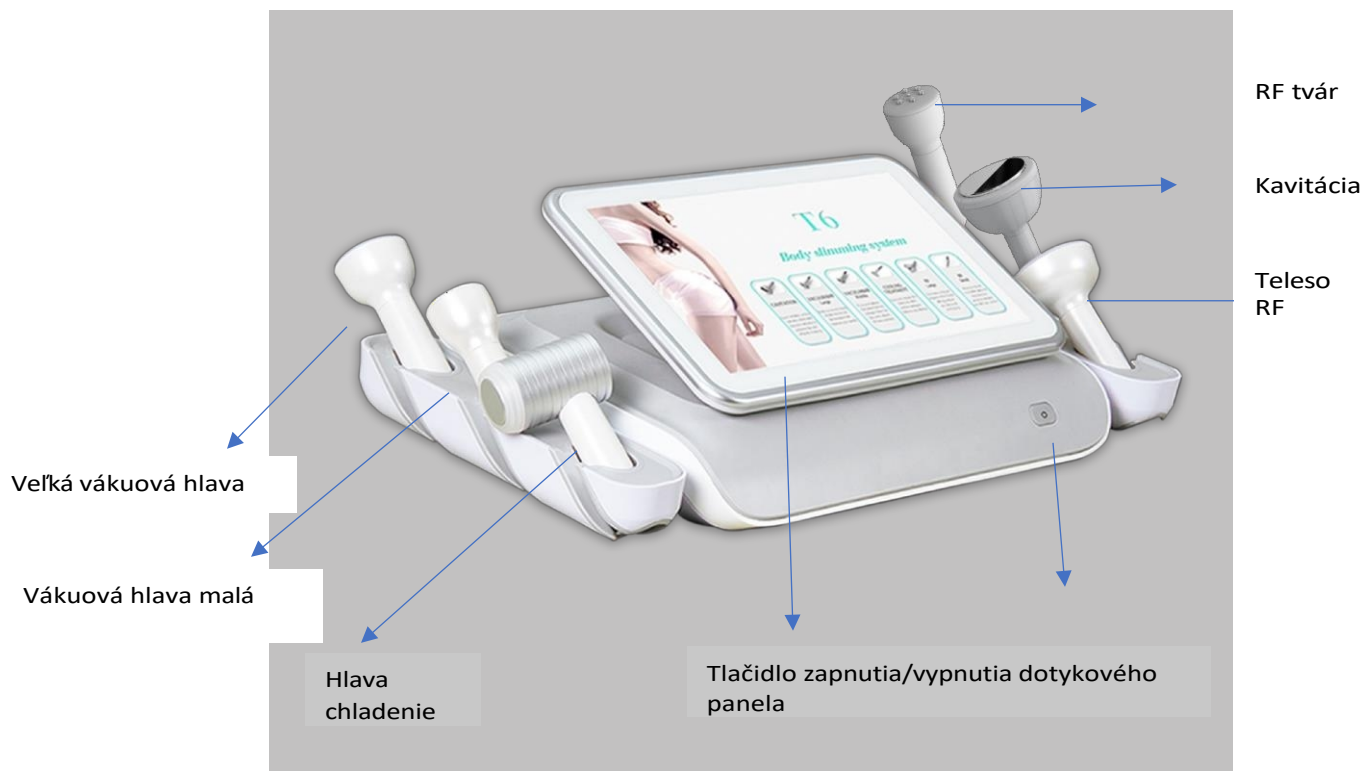


Hlavy

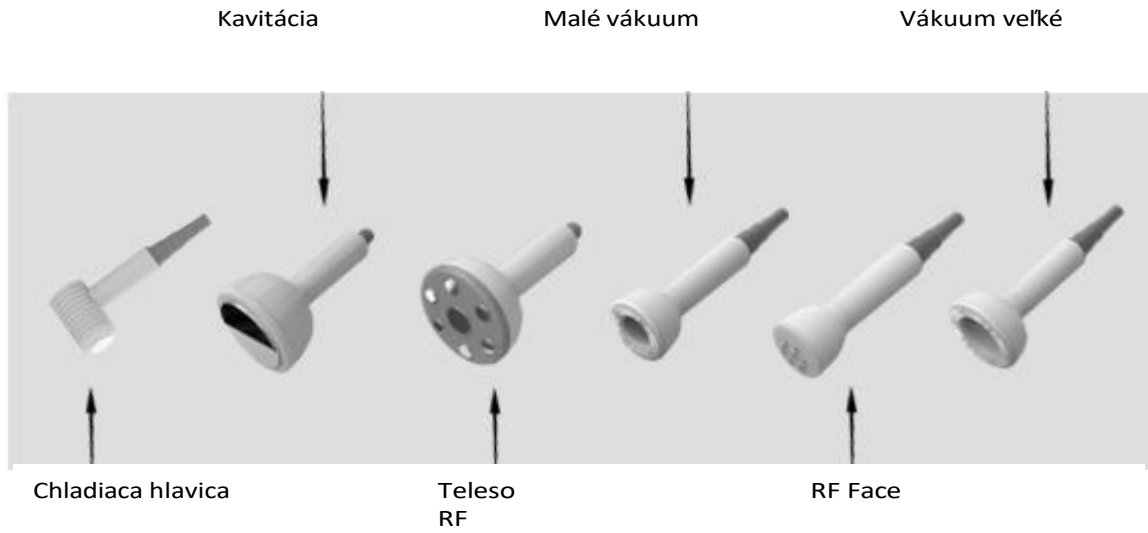

Spojovacie hlavy

1. Chladiaca hlavica

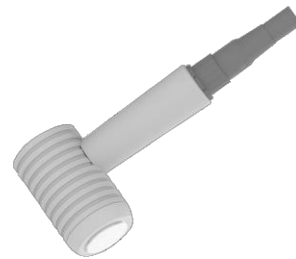

2. Veľká vákuová hlava



3. Vákuová hlava malá



4. Kavítácia



5. Teleso RF



6. RF tvár



Technické údaje

Napätie	220-240V
Napájanie	95W
Súčasná intenzita	2A
Hrubá hmotnosť	15 kg

Rozmery




Návod na použitie:

1. Pripojte hlavy k jednotke a potom pripojte jednotku k zdroju napájania.
2. Zariadenie zapnite pomocou tlačidla O/I na zadnej strane a stlačte spínač na prednej strane.
3. Zobrazí sa nasledujúca ponuka.

4. Stlačte ikonu príslušnej hlavy.



5. Zobrazí sa nasledujúca ponuka

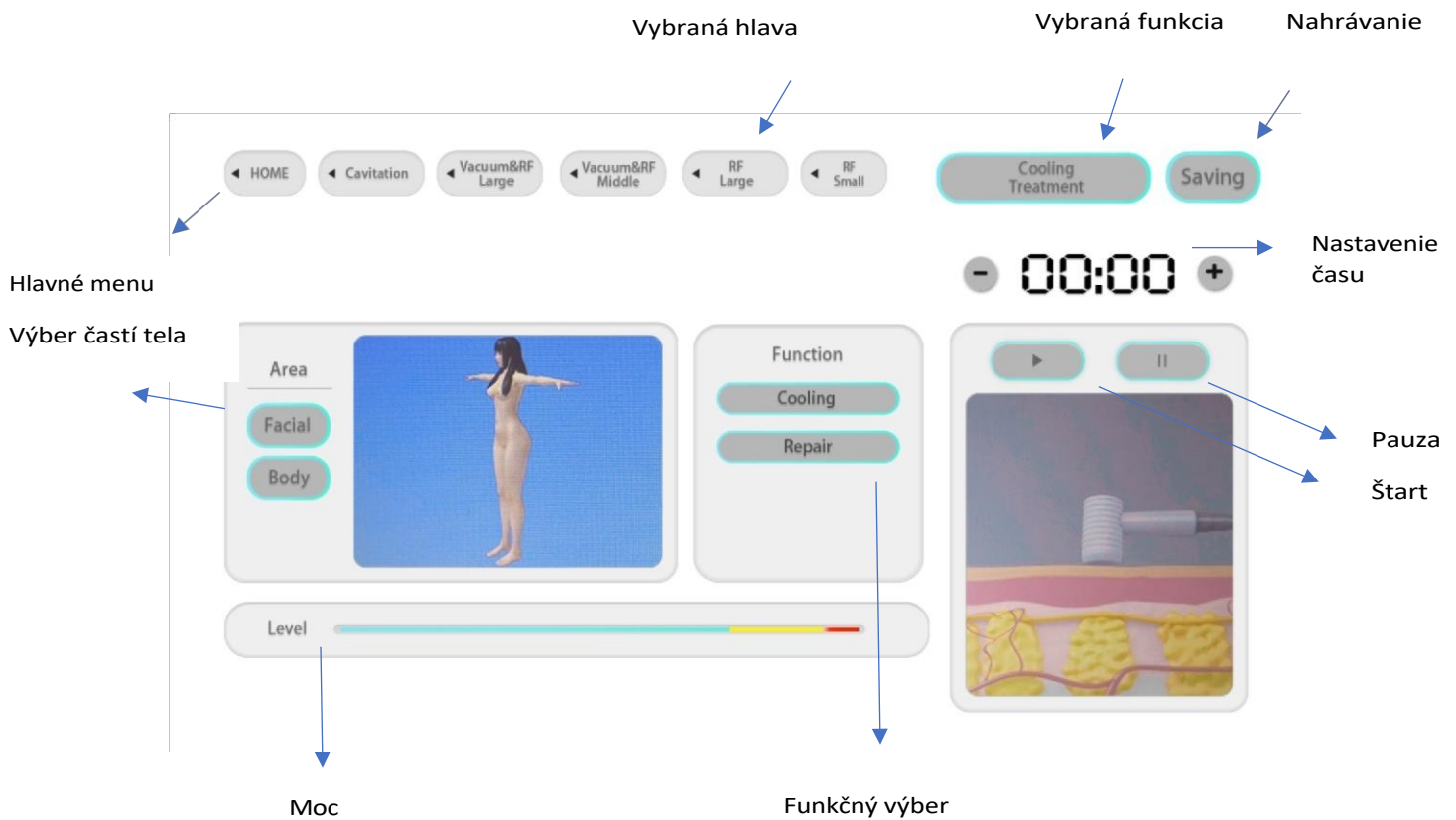

6. Vyberte príslušnú hlavicu, časť tela, funkciu, výkon a čas ošetrenia a stlačte tlačidlo Štart. Výkon a čas ošetrenia by sa mali individuálne nastaviť podľa vašich potrieb.
7. Ak chcete dané nastavenia uložiť pre konkrétnu časť tela, stlačte Uložiť a potom Áno.
8. Presuňte hlavu nad vybranú časť tela.

Pozor!

Aby ste predišli zraneniu, nedržte hlavu príliš dlho na jednom mieste, ale pohybujte ňou okolo tela.

Odporúčané trvanie liečby:

1. **Kavitácia** - redukuje tuk, zoštíhľuje a spevňuje pokožku
 - Ruky 10-15 minút,
 - Talia 15-20 minút,
 - Nohy 10-15 minút,
2. **Vákuum a RF** (pri RF ošetrení používajte špeciálny gél) - spevňuje pokožku, stimuluje regeneráciu kolagénových vlákien
 - Talia 15-20 minút,
 - Nohy 10-15 minút,
 - Späť 10-15 minút,
 - Ruky 10-15 minút,
3. **Chladiaca hlava** - zmenšuje cievy, znižuje začervenanie pokožky
 - Tvár 10-15 minút,
4. **Veľká RF** (na RF ošetrenie treba použiť špeciálny gél) - redukcia vrások, zlepšenie krvného obehu, stimulácia kolagénových vlákien na regeneráciu
 - Talia 15-20 minút,
 - Nohy 10-15 minút,
 - Ruky 10-15 minút,
5. **Malá RF** (na ošetrenie RF treba použiť špeciálny gél) - redukcia vrások, zlepšenie krvného obehu, stimulácia kolagénových vlákien na regeneráciu
 - Tvár 15-20 minút,
 - Ramená 10-15 minút.

Údržba spotrebiča

1. Jednotku udržiavajte v čistote. V prípade potreby ho utrite mäkkou vlhkou handričkou.
2. Hlavice by sa mali pred ošetrením a po ňom dezinfikovať. Príliš vysoká koncentrácia dezinfekčného prostriedku môže spôsobiť poškodenie hlavíc.
3. Nepracujte s dotykovým panelom pomocou stylusov alebo iných predmetov, ktoré by mohli poškodiť povrch.
4. Spotrebič sa po vypnutí chladí približne 15 minút. Nechajte komponenty vychladnúť.

Kontraindikácie liečby:

1. Kardiostimulátor alebo implantovaný defibrilátor.
2. Rakovina kože alebo predrakovinové štádiá.
3. Kovové implantáty v tele.
4. Hypertenzia, cukrovka a srdcové choroby.
5. Tehotenstvo a dojčenie.

6. Otvorené rany alebo infekcie.
7. Liečenie častí tela

Základné riešenie problémov

Problém	Spôsob riešenia
Zariadenie sa nezapne	Skontrolujte, či je pripojenie napájania správne Skontrolujte, či sú tlačidlá zapnuté
Hlava nefunguje	Skontrolujte, či je hlava správne pripojená
Zariadenie sa prehrialo	Prerušte prácu a nechajte zariadenie vychladnúť
Žiadne napájanie	Skontrolujte poistku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným zdravotníckym personálom zabráňuje nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
 - a) Do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť zariadenia, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

POZNÁMKA

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by mal byť spotrebič uchovávaný mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade s smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa mali zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Vyradené a staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto mali posielat' na opätovné spracovanie. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach a môžu sa odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.