

ACTIVESHOP[®]

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Elektrinė kosmetinė kėdutė "Sillon Classic" su 3 varikliais ir lopšiu



Importuotojas:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
Ul. Graniczna 8B, pastatas
DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
A/04/2024 redakcija



***PRIEŠ NAUDODAMI GAMINĮ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ*.**

Šiame vadove pateikiama išsami informacija apie prietaiso veikimą ir techninę priežiūrą. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite pridedamą instrukciją. Naudokite prietaisą taip, kaip aprašyta. Saugokite šią instrukciją ir užtikrinkite, kad su ja susipažintų visi asmenys, kurie gali naudoti prietaisą.

"Sillon" elektrinė kosmetinė kėdė yra profesionali įranga, puikiai tinkanti bet kuriam grožio salonui. Ji idealiai tinka masažams, kosmetinėms ir podiatrinėms procedūroms, taip pat fizioterapijai. Kėdė suprojektuota taip, kad procedūros metu būtų visiškai patogios. Kėdę sudaro keturios dalys ir nuimama pagalvėlė. Abiejose sėdynės pusėse yra rankenos, ant kurių galima pakabinti valdymo pultelį, kad jis visada būtų po ranka.

Produkto svoris: 150 kg

Didžiausia kėdės korpuso keliamoji galia yra 150 kg. Nekelkite didesnio svorio, nei nurodytas svoris, kurį gali išlaikyti kėdė.

Nešokinėkite ant atlošo ir stipriai nespauskite porankių, kad nepažeistumėte gaminio.

Ne daugiau kaip 40 kg


Maksimalus svoris 150 kg

Maksimalus svoris 40 kg



Dėmesio

Pakavimui naudojamas kartonas ir išorinės dėžės, iš viso 10 popieriaus sluoksnių, kad būtų užtikrinta jūsų gaminių apsauga. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, kad ją būtų galima naudoti ateityje, ypač grąžinant gaminius garantiniu laikotarpiu. Saugumo sumetimais kėdę iš kartoninės dėžės pakelti turi du žmonės. Keldami stovėkite iš abiejų kėdės galvos atramos ir kojų atramos pusių. Atminkite, kad kėdę galima pakelti tik nuo galvos ir kojų atramų padėčių, bet ne iš abiejų porankių pusių.

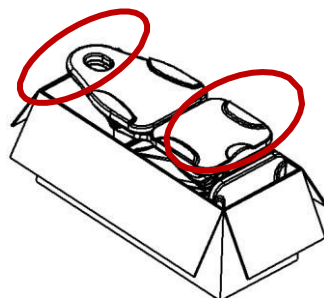

Prieš pradėdami naudoti kėdę, patikrinkite, ar pakuotė nepažeista ir ar nebuvo pažeista gabenant. Jei kilo kokių nors problemų, per 2 dienas nuo įrenginio gavimo praneškite apie tai transporto įmonei arba aptarnaujančiam personalui. Įsitinkite, kad pristatymo metu visi priedai yra sukomplektuoti. Jei pristatymo metu trūksta priedų, laiku susisieki su garantinio aptarnavimo darbuotojais.


Elektrinė kosmetinė kėdė turi būti naudojama uždaroje, sausose patalpose. Patalpos temperatūra turi būti nuo +10° iki -40°, o santykinė oro drėgmė - nuo 30 % iki 75 %. Jei elektrinė kosmetinė kėdė buvo veikiamą žemesnės nei 0 ° temperatūros, prieš naudodami palaukite bent 5 valandas, kad prietaisas spėtų pasiekti kambario temperatūrą.

Prieš naudodami elektrinį kosmetinį krėslą perskaitykite instrukcijas ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitinkite, kad visos pakavimo medžiagos pašalintos.
2. Įsitinkite, kad sėdynė veikia.
3. Pastatykite kėdę ten, kur ji bus naudojama.
4. Įjunkite tinklo kištuką į tinkamą lizdą.


Atkreipkite dėmesį! Vaikams ir nepatyrusiems asmenims draudžiama naudotis šiuo prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi ir negali žaisti šalia elektrinės kosmetinės kėdės. Saugumo sumetimais atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir nepalikite jo be priežiūros. Taip pat atjunkite maitinimo laidą.

Įrenginio matmenys:

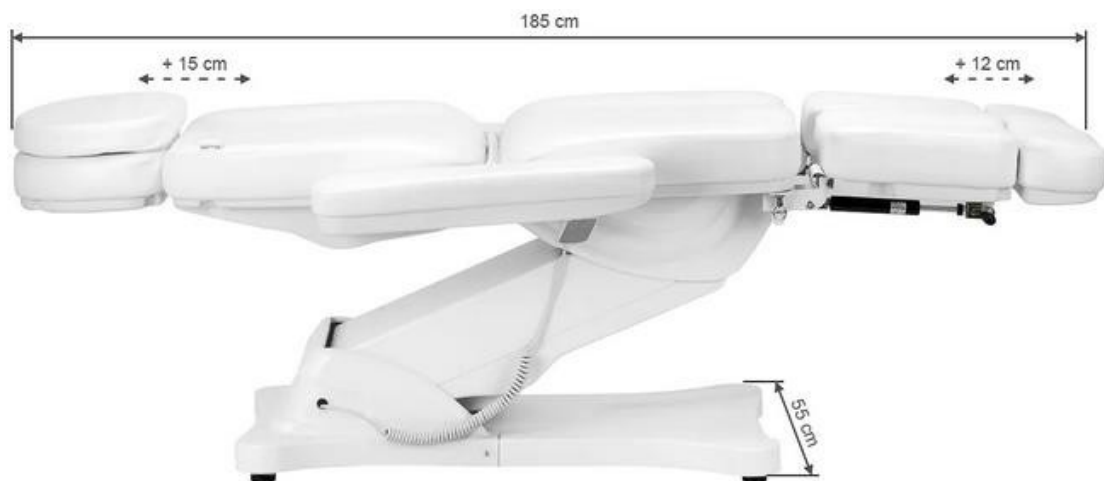



Įrenginio konstrukcija:

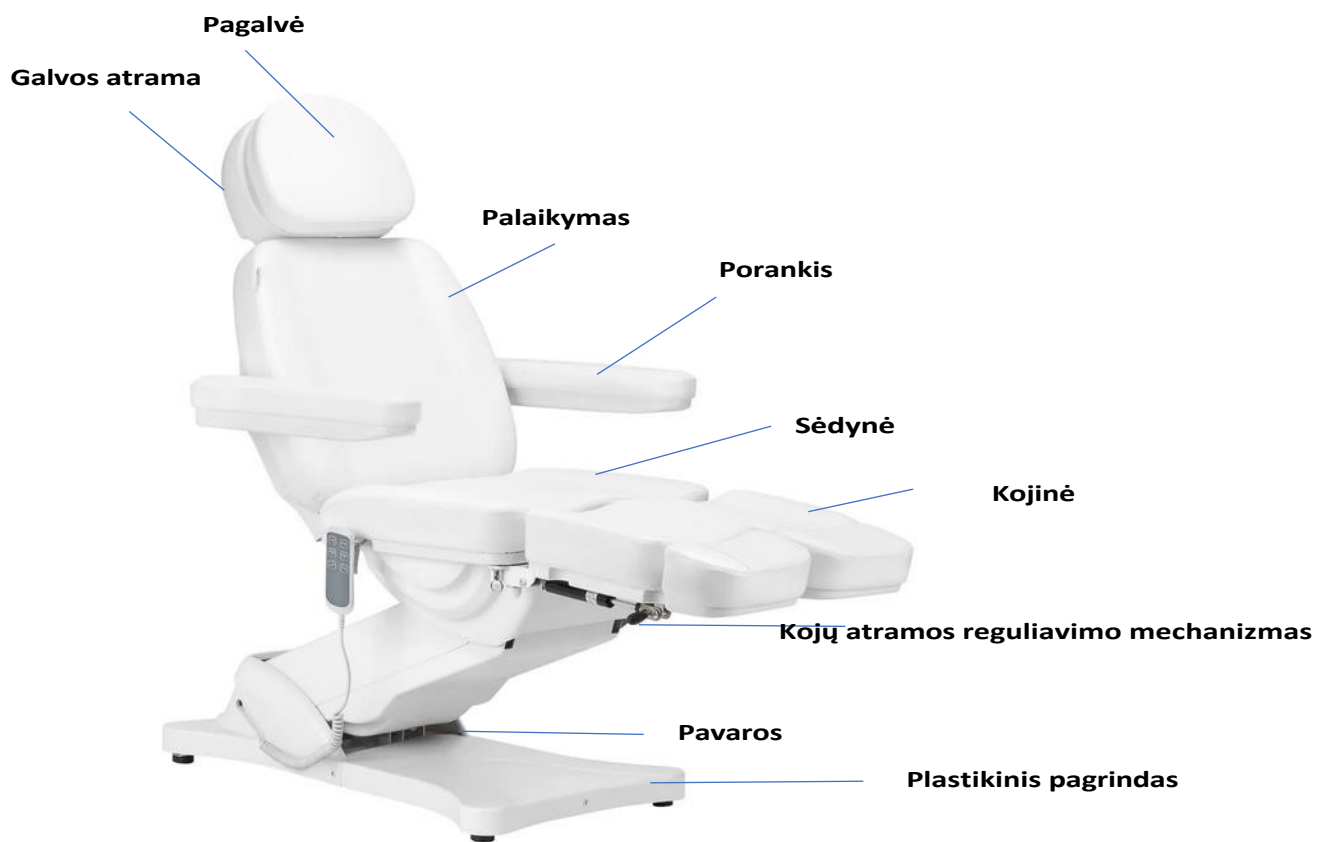

Įspėjimas

1. Kojų atrama nėra pritaikyta išlaikyti visą suaugusio žmogaus svorį.
2. Nesėdėkite tiesiai ant porankio ar kojos atramos.
3. Nekelekitė didesnio svorio, nei gali atlaikyti kėdė.
4. Įsitikinkite, kad atstumas tarp kištukinių lizdų neviršija 2 m.

Dėmesio

1. Saugumo sumetimais visada įjunkite maitinimo laidą į įžemintą kištukinį lizdą.
2. Nepirikiškite maitinimo laido prie įrenginio. Keldami arba traukdami už maitinimo laido galite jį sugadinti. Įsitikinkite, kad avariniu atveju maitinimo laidą galima lengvai ištraukti.
3. Prieš perkeldami elektrinį kosmetinį krėslą, ištraukite maitinimo laidą, kad jis neužstrigtų tarp kai kurių krėslų dalių.
4. Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami jį atjunkite, kėdės nenaudokite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalų maitinimo laidą.
5. Neleiskite, kad nuotolinio valdymo pultą valdytų asmuo, kuris nevykdo gydymo.
6. Po sėdyne nedėkite jokių daiktų.
7. Įsitikinkite, kad aplink sėdynę yra pakankamai laisvos vietos, kad ją būtų galima laisvai sulankstyti ir išskleisti.
8. Įsitikinkite, kad aplink sėdynę nėra aštrių ar kenksmingų daiktų, kurie galėtų pažeisti prietaisą.
9. Nemodifikuokite prietaiso patys. Jei kėdė neveikia tinkamai, nustokite ja naudotis ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.


Įrenginio naudojimas:

1. Maitinimo laidą prijunkite prie išorinio 110V~240V maitinimo šaltinio.

Porankių montavimo būdas:

Sėdynė turi būti horizontalioje padėtyje, kad prie jos būtų galima pritvirtinti porankius. Įstumkite porankį į atlošo šone esančią angą. Porankis turi būti tvirtai pritvirtintas. Pasukite jį į dešinę arba į kairę, kad jis tinkamai įsitvirtintų. Tą patį padarykite ir su kitu porankiu.

Porankis yra statmenai žemei (nepriklausomai nuo sėdynės kampo). Jį galima pasukti 180° kampu.

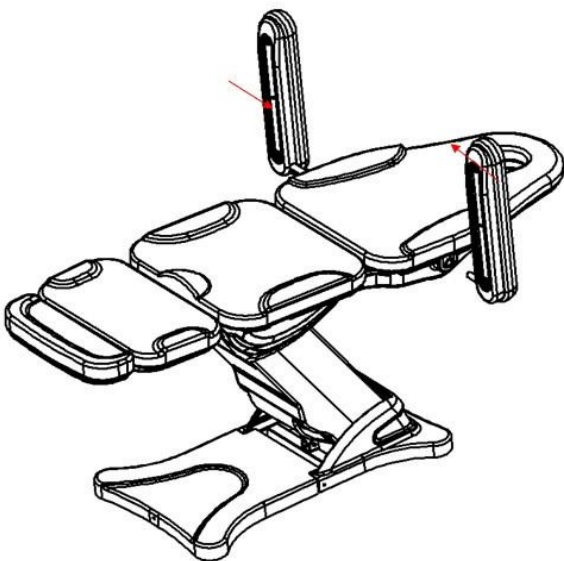

2. Rankinio valdymo funkcija (kėlimo aukštis: lova yra 58 ~ 82 cm nuo žemės)



A B



3. Rankinio valdymo funkcija (nugaros pakėlimo kampas 0-80 °, kojų pakėlimo kampas 0-90 °)




C D




4. Kojų atramos ištraukimo funkcija (kojų atrama, ilgis: 0 ~ 12 cm)

0 ~ 12 cm

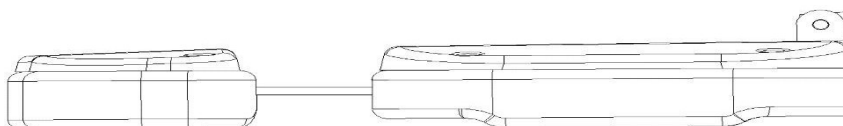

Kiekvieną kojų atramą galima reguliuoti atskirai, todėl kojų padėtį galima keisti nepriklausomai. Pėdų atramos kampas reguliuojamas rankiniu būdu. Mechanizmas, kuriame įrengtas kojų atramos pagrindas, taip pat leidžia pakreipti kojų atramą į šoną. Dėl to kėdė idealiai tinka podiatrinėms procedūroms.

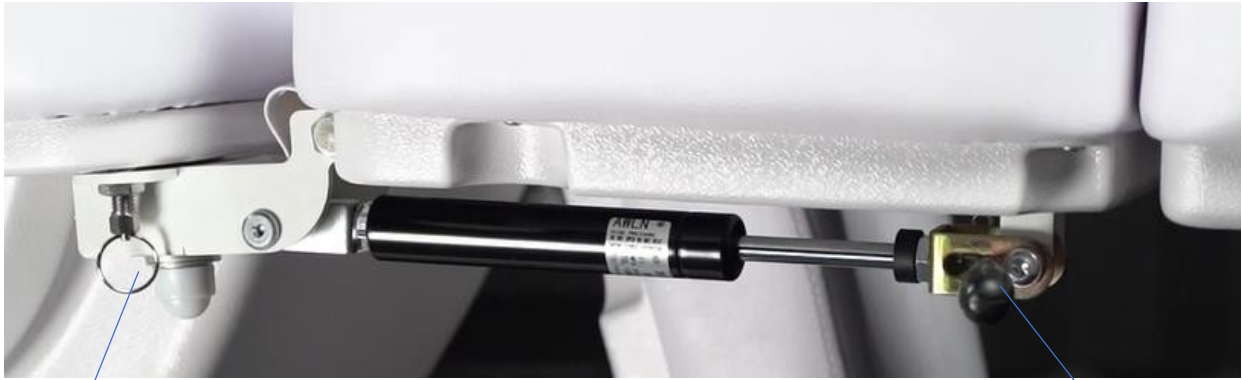

Kojų atramos pakreipimo į šoną mechanizmas

Kojų atramos pakėlimo / nuleidimo svirtis

Norėdami pakelti kojų atramą, patraukite rankenėlę aukštyn ir pakelkite kojų atramą į viršų.

Norėdami pakreipti kojų atramą į šoną, patraukite žemyn pakreipimo mechanizmo ratuką ir pakreipkite kojų atramą į šoną.

5. Lopšio funkcija (kėdės sėdynę galima pasukti kampu - vadinamasis lopšys. Nuleidus atlošą ir pakėlus kojų atramą, sukuriamas plokščias paviršius.



E

F



F



E

Įrenginio valymas ir dezinfekavimas:

- Prieš valydami prietaisą atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Kad kėdės paviršius būtų geros būklės, jį reikia reguliariai valyti. Nepamirškite valyti ir dezinfekuoti kėdės po kiekvieno naudojimo. Rekomenduojama kruopščią dezinfekciją atlikti kartą per mėnesį.

I Metaliniai ir plastikiniai paviršiai

- Norėdami nuvalyti metalinius ir plastikinius paviršius bei valdiklius, nuvalykite juos drėgna šluoste. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar kampams valyti tinka nedidelis šepetėlis. Nenaudokite per daug skysčio prietaisui valyti. Tada dezinfekuokite prietaisą tinkamu skysčiu.

II Nerūdijančio plieno paviršiai

- Geriausiai tinka valyti švelniu ploviklio tirpalu. Stiprioms dėmėms pašalinti galima naudoti amoniaką ir daugumą tirpiklių. Venkite chloro turinčių tirpalų.

III Dažyti arba chromuoti metaliniai paviršiai

- Valymui nenaudokite vandens srovių (dušų, aukšto slėgio vandens patrankų).
- Nevalykite esant aukštai temperatūrai ir didelei drėgmei, taip pat nelaikykite įrenginio tokiomis sąlygomis, kurios gali užteršti skysčiu.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar rūgščių.

IV Sėdynės paviršius

- Tolygiai nuvalykite sėdynės paviršių specialiu odos valikliu ir nušluostykite jį švaria, minkšta šluoste.

Techninė priežiūra

Prieš atlikdami techninę priežiūrą atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

1. remontą turi atlikti patyrę, gamintojo įgalioti darbuotojai. 2. neįgalioto personalo atliekami remonto darbai gali sukelti sužalojimus arba sugadinti įrangą, už kuriuos gamintojas neatsako.
3. Naudokite tik originalias gamintojo patvirtintas atsargines dalis.
4. Nenaudokite elektrinio kosmetinio krėslo ar priedų, jei jie tinkamai neveikia.
5. Visa techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti dokumentuojama.

Pragyvenimo šaltiniai

Kartą per savaitę patikrinkite valdiklius ir jų laidus. Ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius patikrinkite šių elementų būklę ir veikimą:

1. Maitinimo kabelis ir jo tvirtinimas
2. Variklio laidai
3. Valdymo blokas ir jo kabeliai
4. Ar priedai yra pritvirtinti
5. Įprastas užrakto sistemos veikimas

Jei pastebėjote kokių nors defektų, nustokite naudoti įrangą ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Atidaryti arba pakeisti pavaros ir (arba) valdymo bloką gali tik patyrę arba įgalioti darbuotojai.

Jei kuri nors įrenginio dalis yra pažeista, atjunkite maitinimo laidą ir nebenaudokite įrenginio. Tada praneškite apie tai aptarnavimo tarnybai.

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimo metodai
Rankinis valdymas nereaguoja	Patikrinkite, ar sąsaja, jungianti rankinio valdymo liniją, yra laisva (Patikrinkite, ar nėra problemų su spausdintine plokšte), nepamirškite pažymėti pradinę kištuko padėtį.
Variklis nereaguoja	Perjunkite variklio kištuko padėtį

Norėdami pakeisti valdymo bloką ir užsakyti kitas atsargines dalis, kreipkitės į aptarnavimo skyrių, prieš kreipdamiesi apibūdinkite problemą:

1. Modelis
2. Pirkimo data

SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į įrenginį nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad bus neteisingai prijungtas prietaisas gali būti sugadintas ar net sudegti. **DĖMESIO:**
 1. Sugedus maitinimo kabeliui ar esant kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotasis techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
 2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie

įranga, jei prižiūrima arba mokoma, kaip saugiai naudotis įranga, kad būtų suprasta susijusi rizika.

3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros p r i e t a i s u gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Laikykitės taisyklių dėl

išmesti tokio tipo įrangą. Siekiant apsaugoti aplinką

Pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų elektros įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktus. Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti siunčiami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat į ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.