

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Azzurro 803D elektrischer Kosmetikstuhl 3 Motoren



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024




Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese Schritte:


1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz in Ordnung ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl dort auf, wo er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

**Achtung!** Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

#### Abmessungen des Geräts:

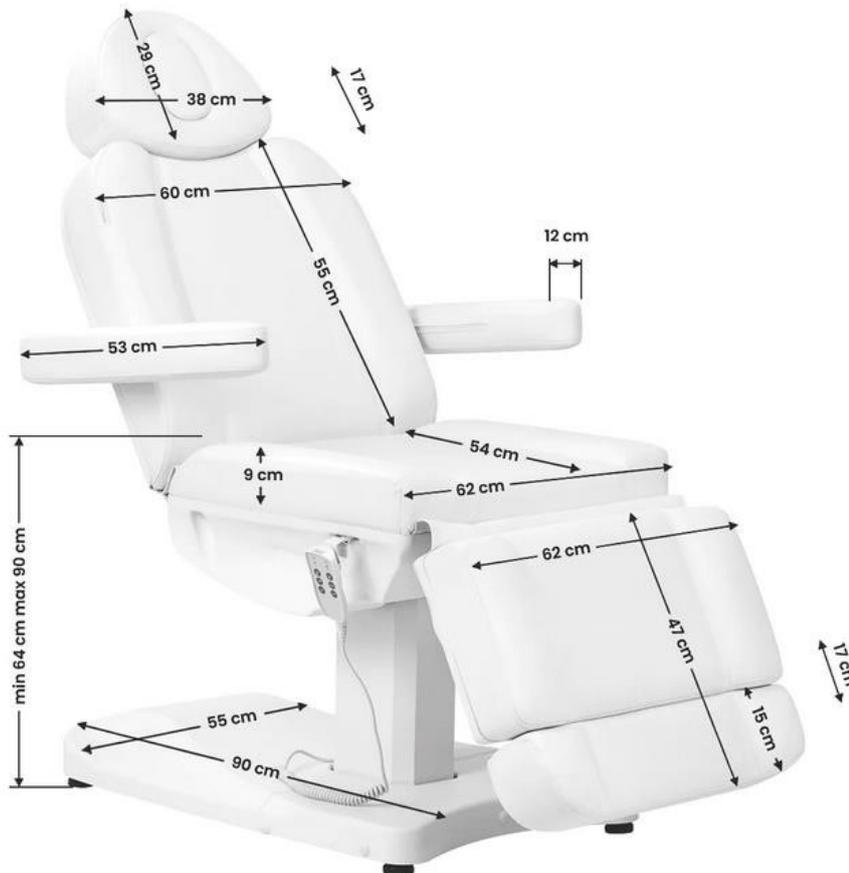

## Konstruktion des Geräts:

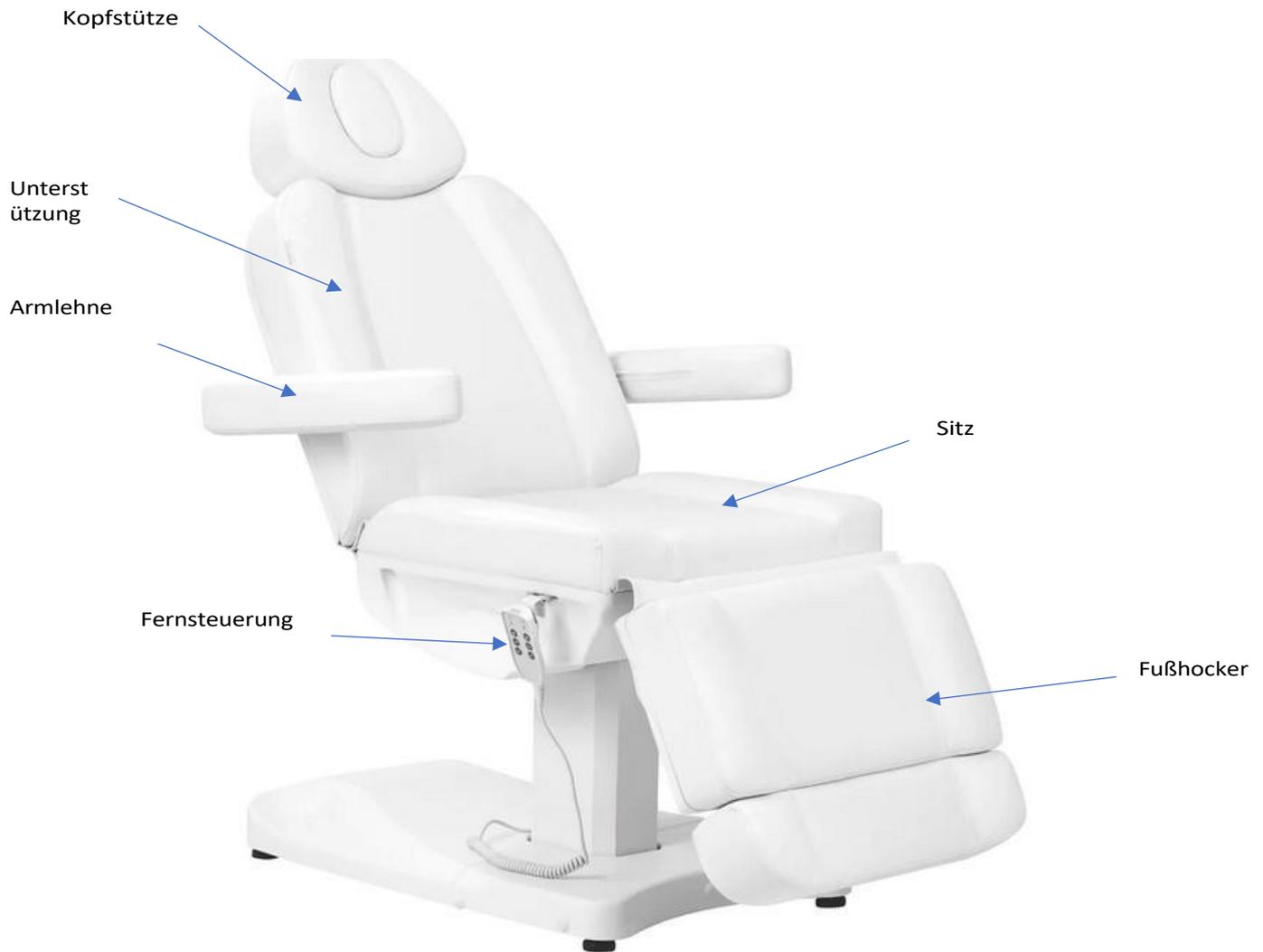

## Warnung:

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne oder die Fußstütze.
3. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

## Achtung


1. Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
2. Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Durch Anheben oder Ziehen am Netzkabel kann dieses beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel im Notfall leicht entfernt werden kann.
3. Bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, entfernen Sie das Netzkabel, damit es nicht zwischen Teilen des Stuhls eingeklemmt wird.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie es sofort ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
5. Lassen Sie die Fernbedienung nicht von der Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
6. Legen Sie keine Gegenstände unter den Sitz.
7. Vergewissern Sie sich, dass um den Sitz herum genügend Freiraum vorhanden ist, so dass er ungehindert ein- und ausgeklappt werden kann.

8. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Sitzes keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
9. Nehmen Sie keine eigenen Veränderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.


Der Stuhl verfügt über eine manuelle Steuerungsmöglichkeit per Fernbedienung sowie über eine Fußsteuerung. Die Höhe des Stuhls, die Position der Rückenlehne und der Fußstütze können nach Bedarf eingestellt werden.

### Funktionen der Fernbedienung:

1. Sitzhöhenverstellung (64-90cm)
2. Einstellung der Rückenlehne
3. Einstellung der Fußstütze

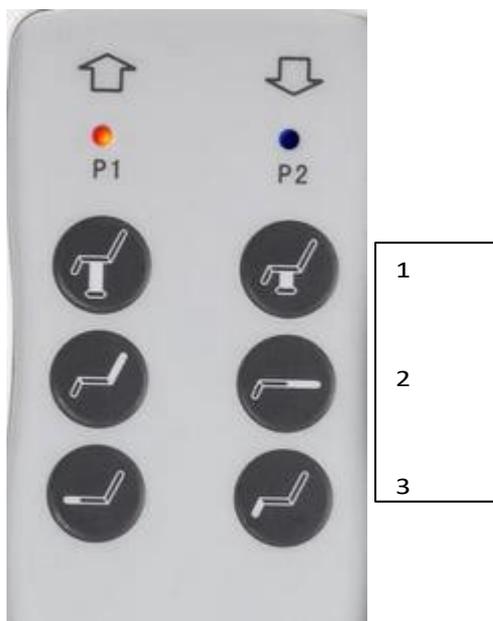


### Funktionen der Fußsteuerung:

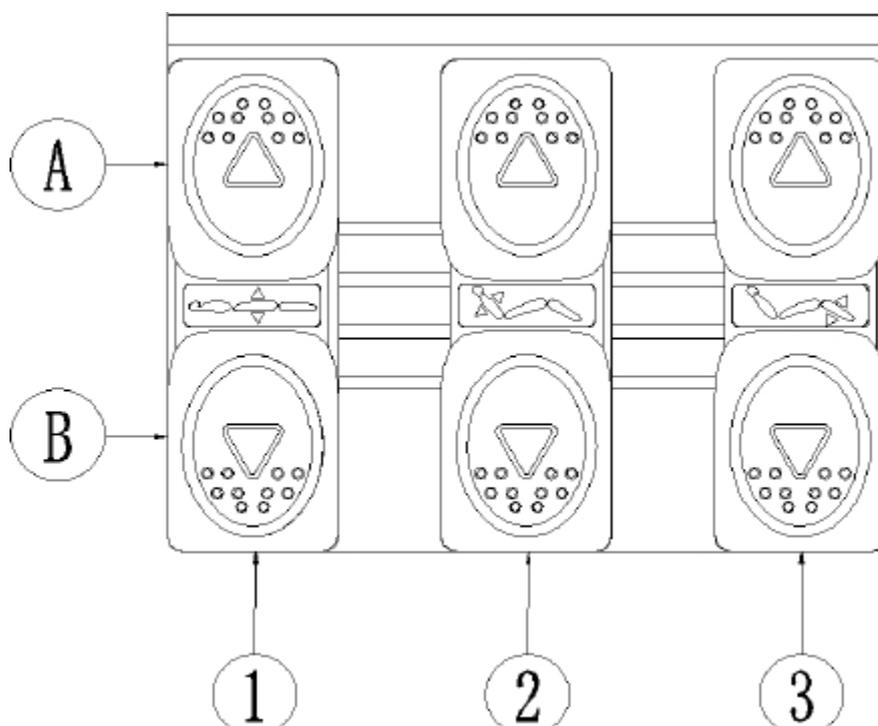

1. Einstellen der Sitzhöhe. Drücken Sie A, um den Sitz anzuheben, oder B, um den Sitz abzusenken.
2. Einstellen der Position der Rückenlehne. Drücken Sie A, um die Rückenlehne anzuheben, oder B, um sie abzusenken.
3. Einstellen der Fußstütze. Drücken Sie A, um die Fußstütze anzuheben, oder B, um die Fußstütze abzusenken.

## Verlängerung der Fußstütze

Der Stuhl bietet außerdem die Möglichkeit, die Fußstütze zu verlängern, was die Behandlung größerer Personen erleichtert und den Komfort erhöht. Die maximale Länge der Fußstützenverlängerung beträgt ca. 17 cm. Um die Fußstütze einzustellen, verwenden Sie den Knopf an der Unterseite der Fußstütze

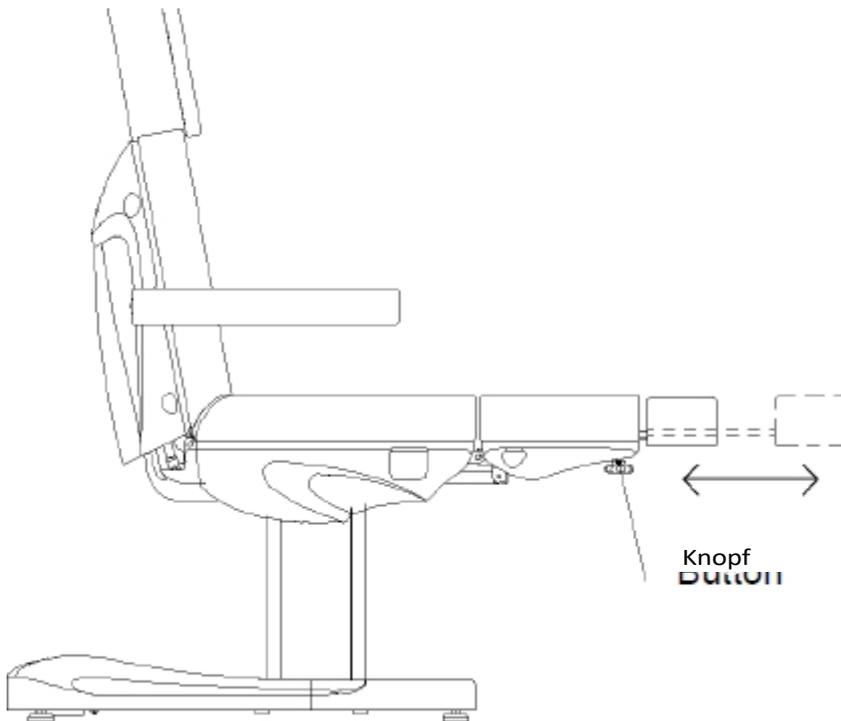


## Einbau der Armlehne:

Schieben Sie die Armlehnen in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte fest angebracht sein. Schieben Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig sitzt. Verfahren Sie mit der anderen Armlehne genauso. Die Armlehne steht senkrecht zum Boden (unabhängig von der Neigung des Sitzes). Sie kann um 180° gedreht werden.

## Einbau der Kopfstütze:

Schieben Sie die Kopfstütze in das Loch an der Oberseite der Sitzlehne. Wenn sich die Kopfstütze in der richtigen Höhe befindet, ziehen Sie die Kurbel an der Rückenlehne fest, um die Kopfstütze zu sichern. Um die Kopfstütze abzusenken oder zu verlängern, schrauben Sie die Kurbel ab, stellen die Kopfstütze ein und ziehen die Kurbel wieder an.

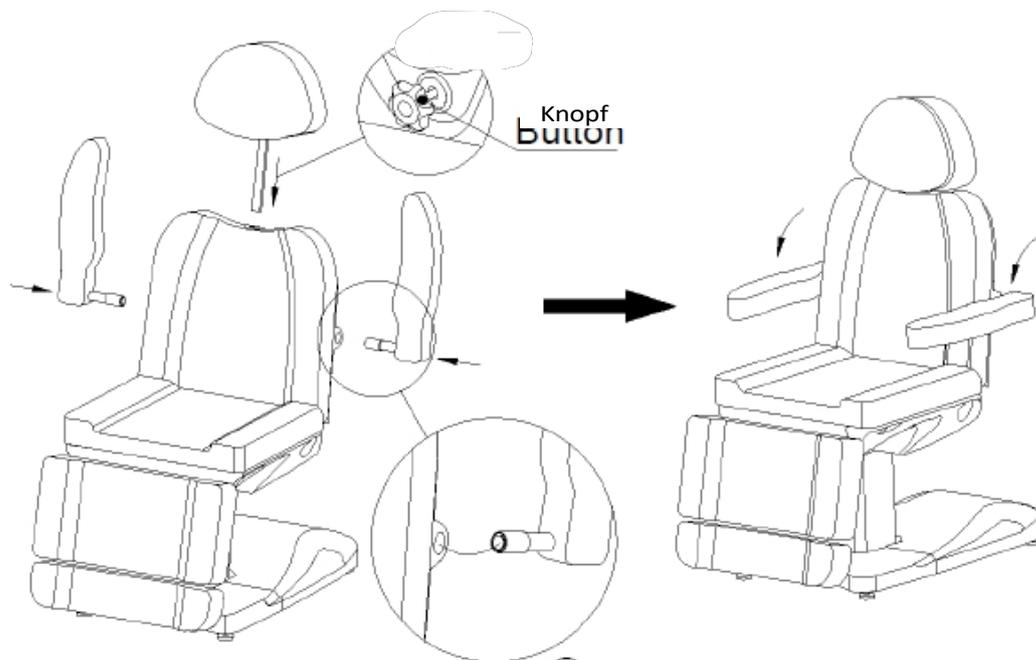

## Reinigung und Desinfektion des Geräts:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

### I Metall- und Kunststoffoberflächen

Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen, eignet sich eine kleine Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

### II Oberflächen aus nichtrostendem Stahl

Am besten funktioniert die Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

### III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zum Reinigen keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruck-Wasserkanonen).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

### IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzoberfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

## Wartung

### Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn es nicht richtig funktioniert.

- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

### Lebensgrundlagen

Überprüfen Sie die Bedienelemente und ihre Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Elemente mindestens einmal alle sechs Monate:

- Netzkabel und dessen Befestigung
- Motorverkabelung
- Schaltkasten und seine Verkabelung
- ob das Zubehör angebracht ist
- Normaler Betrieb des Schließsystems

Wenn Sie einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal darf den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.

Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Benachrichtigen Sie dann den Kundendienst.

### Lösung von Problemen

Problem	Ursache	Lösungsmethode
Keine Reaktion nach Drücken von Tasten auf der Fernbedienung	1. Die Einschalttaste wird aktiviert oder nicht. 2. Prüfen Sie, ob das Pedal bis zum Anschlag durchgedrückt ist. 3. Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist. 4. prüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen ist.	1. Versuchen Sie, das Gerät mit dem Netzschalter neu zu starten. 2. Versuchen Sie, andere Tasten einzuschalten, um zu sehen, ob sie funktionieren. 3. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schließen Sie es wieder an. 4. Ziehen Sie die Stecker ab und schließen Sie sie wieder an.
Das Gerät macht seltsame Geräusche	Lose Schraube	Die Schrauben anziehen

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:

a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,

c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

#### **ANMERKUNGEN:**

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Unterweisung in der sicheren Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

#### **ENTSORGUNG DES GERÄTS**



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an folgenden Stellen abzugeben

Sammlung von Elektronik- und Elektroaltgeräten. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

#### **LAGERUNG UND TRANSPORT**

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.