

ACTIVESHOP[®]


INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de estética eléctrico Azzurro 803D 3 motores



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

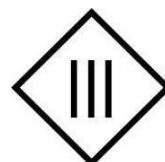


Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y siga estos pasos:


1. Asegúrese de que se han retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el asiento funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.

Dimensiones del dispositivo:

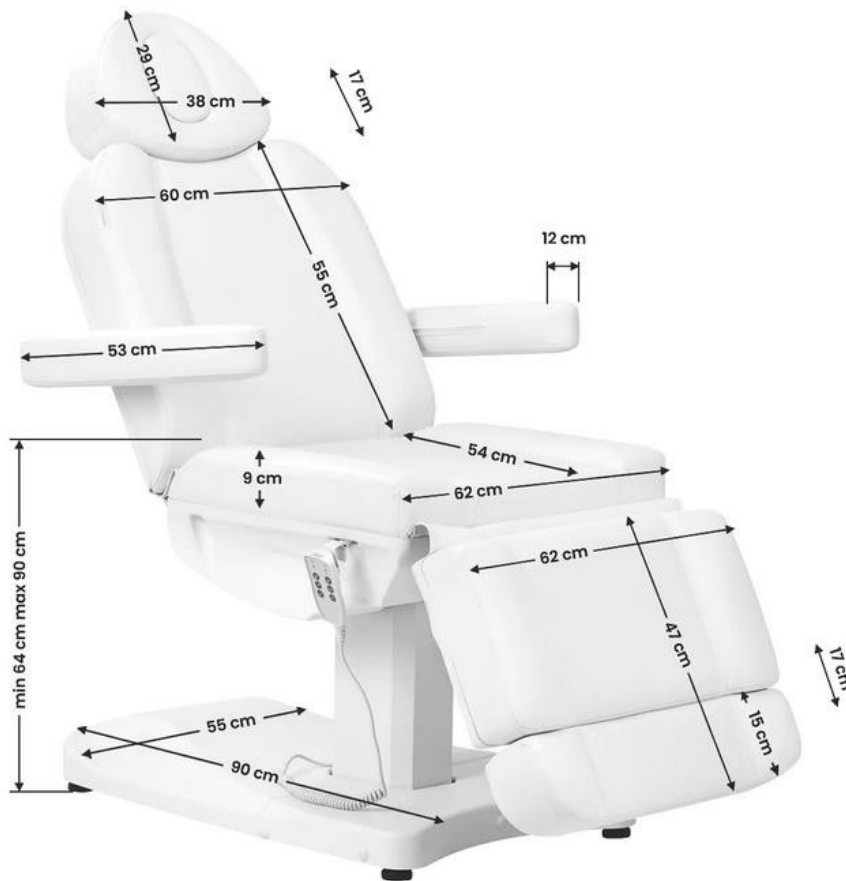

Construcción del dispositivo:

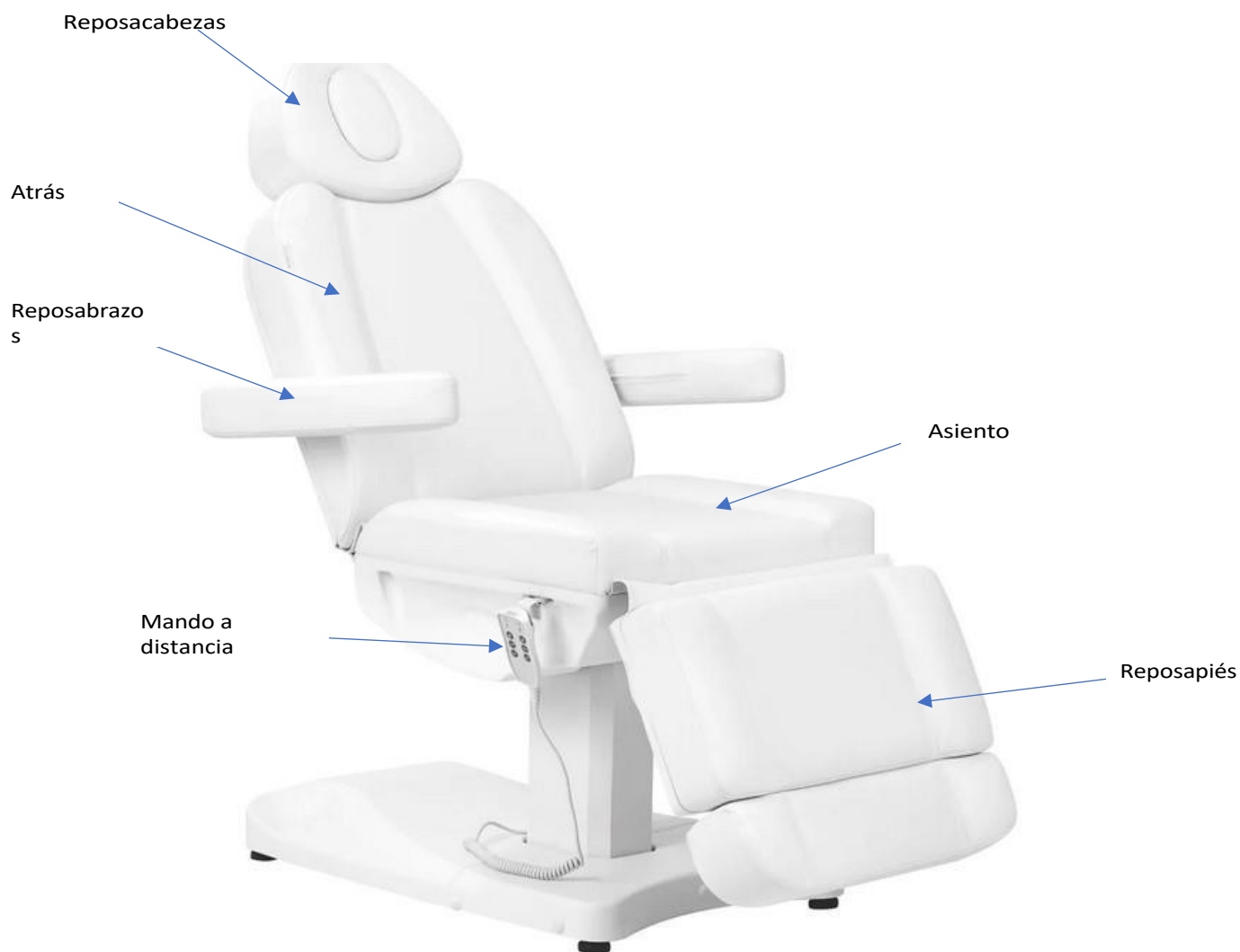

Advertencia:

1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se sienta directamente en el reposabrazos ni en el reposapiés.
3. Asegúrate de que la distancia entre enchufes no supere los 2 metros.

Atención


1. Por razones de seguridad, enchufe siempre el cable de alimentación a una toma con conexión a tierra.
2. No ate el cable de alimentación a la unidad. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.
3. Antes de mover el sillón estético eléctrico, retire el cable de alimentación para que no quede atascado entre algunas partes del sillón.
4. Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice la silla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.
5. No permita que la persona que no realiza el tratamiento controle el mando a distancia.
6. No coloque ningún objeto debajo del asiento.
7. Asegúrate de que hay suficiente espacio libre alrededor del asiento para que se pueda plegar y desplegar libremente.

8. Asegúrese de que no hay objetos punzantes o dañinos alrededor del asiento que puedan dañar el dispositivo.
9. No modifique el aparato usted mismo. Si la silla no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.


La silla tiene una opción de control manual mediante mando a distancia, así como opciones de control de pie. La altura de la silla, la posición del respaldo y el reposapiés pueden ajustarse según las necesidades.

Funciones de control remoto:

1. Ajuste de la altura del asiento (64-90 cm)
2. Ajuste del respaldo
3. Ajuste del reposapiés

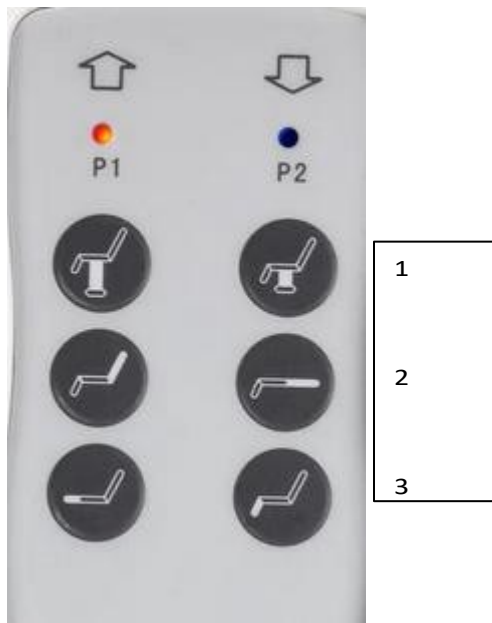


Funciones de pedal:

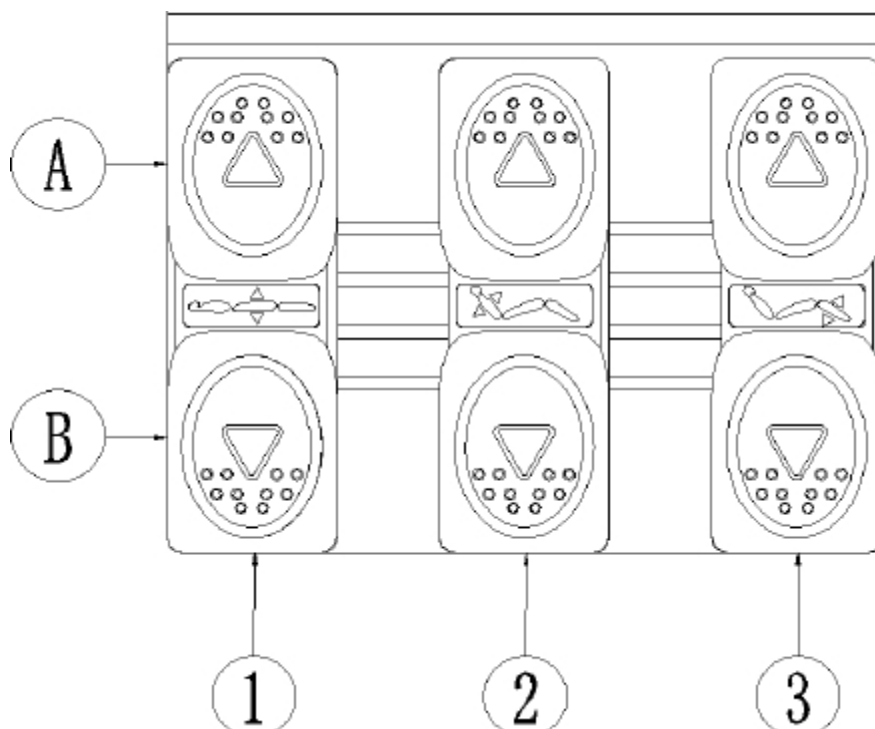

1. Ajuste de la altura del asiento. Pulse A para subir el asiento o B para bajarlo.
2. Ajuste de la posición del respaldo. Pulse A para subir el respaldo o B para bajarlo.
3. Ajuste del reposapiés. Pulse A para subir el reposapiés o B para bajarlo.

Extensión del reposapiés

El sillón también tiene la opción de extender el reposapiés, lo que facilita la realización de tratamientos en personas más altas y mejora la comodidad. La longitud máxima de la extensión del reposapiés es de aproximadamente 17 cm. Para ajustar el reposapiés, utilice el botón situado en la parte inferior del reposapiés.

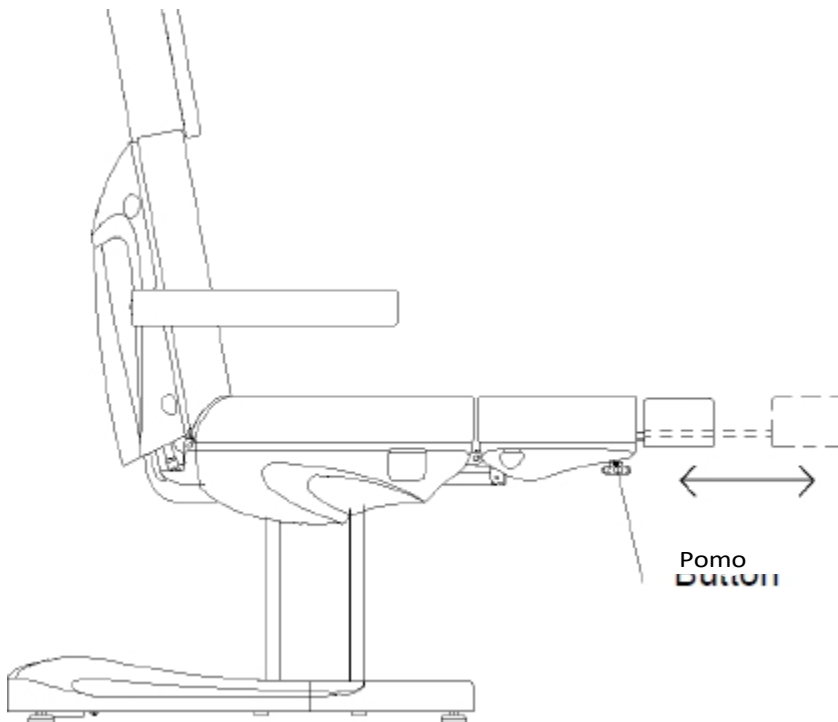


Instalación del reposabrazos:

Deslice los reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar firmemente sujeto. Deslícelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que encaje correctamente. Haga lo mismo con el otro reposabrazos. El reposabrazos está perpendicular al suelo (independientemente del ángulo del asiento). Puede girarse 180°.

Instalación del reposacabezas:

Introduzca el reposacabezas en el orificio situado en la parte superior del respaldo. Cuando el reposacabezas esté a la altura correcta, apriete la manivela del respaldo para fijar el reposacabezas. Para bajar o extender el reposacabezas, desenrosque la manivela, ajuste el reposacabezas y apriete la manivela.

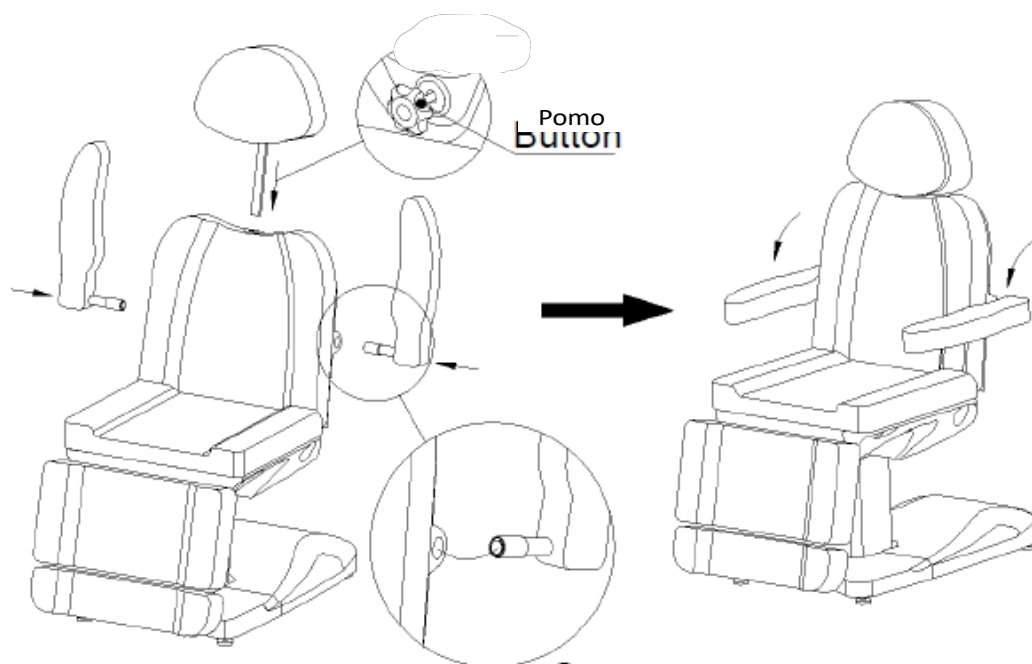

Limpieza y desinfección de la unidad:

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de asiento

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe la unidad antes de realizar el mantenimiento.

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales homologadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón estético eléctrico ni sus accesorios si no funcionan correctamente.

4. Todas las actividades de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medios de subsistencia

Compruebe los mandos y su cableado una vez a la semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:

1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. Caja de control y su cableado
4. Si los accesorios están fijados
5. Funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.

Si alguna pieza del aparato está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Método de solución
No responde al pulsar los botones del mando a distancia	1. El botón de encendido se activa o no. 2. Compruebe que el pedal está pisado al máximo. 3. 3. Compruebe que el aparato está enchufado. 4. Compruebe que todo se ha conectado correctamente.	1. Prueba a reiniciar el botón de encendido. 2. Prueba a encender otros botones a ver si funcionan. 3. Desenchufa el aparato y vuelve a enchufarlo. 4. Desconecta los enchufes y vuelve a conectarlos.
El aparato hace ruidos extraños	Tornillo flojo	Apriete los tornillos

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el aparato ni intentar utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado la carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale la unidad donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

NOTAS:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucción sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o..

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.