

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro 803D elektromos kozmetikai szék 3 motorral



**Importőr:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław,  
Lengyelország  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024




A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az alábbi lépéseket:


1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítottak.
2. Győződjön meg róla, hogy az ülés működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket oda, ahol használni fogják.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

**Megjegyzés!** Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

#### Készülék méretei:

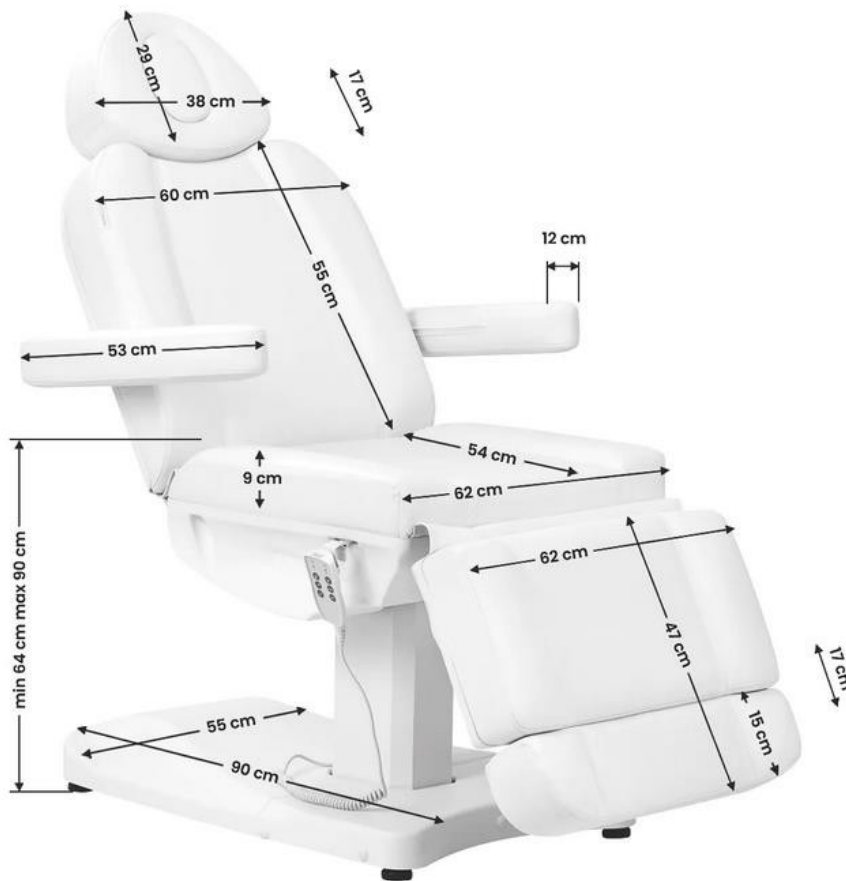

## A készülék felépítése:

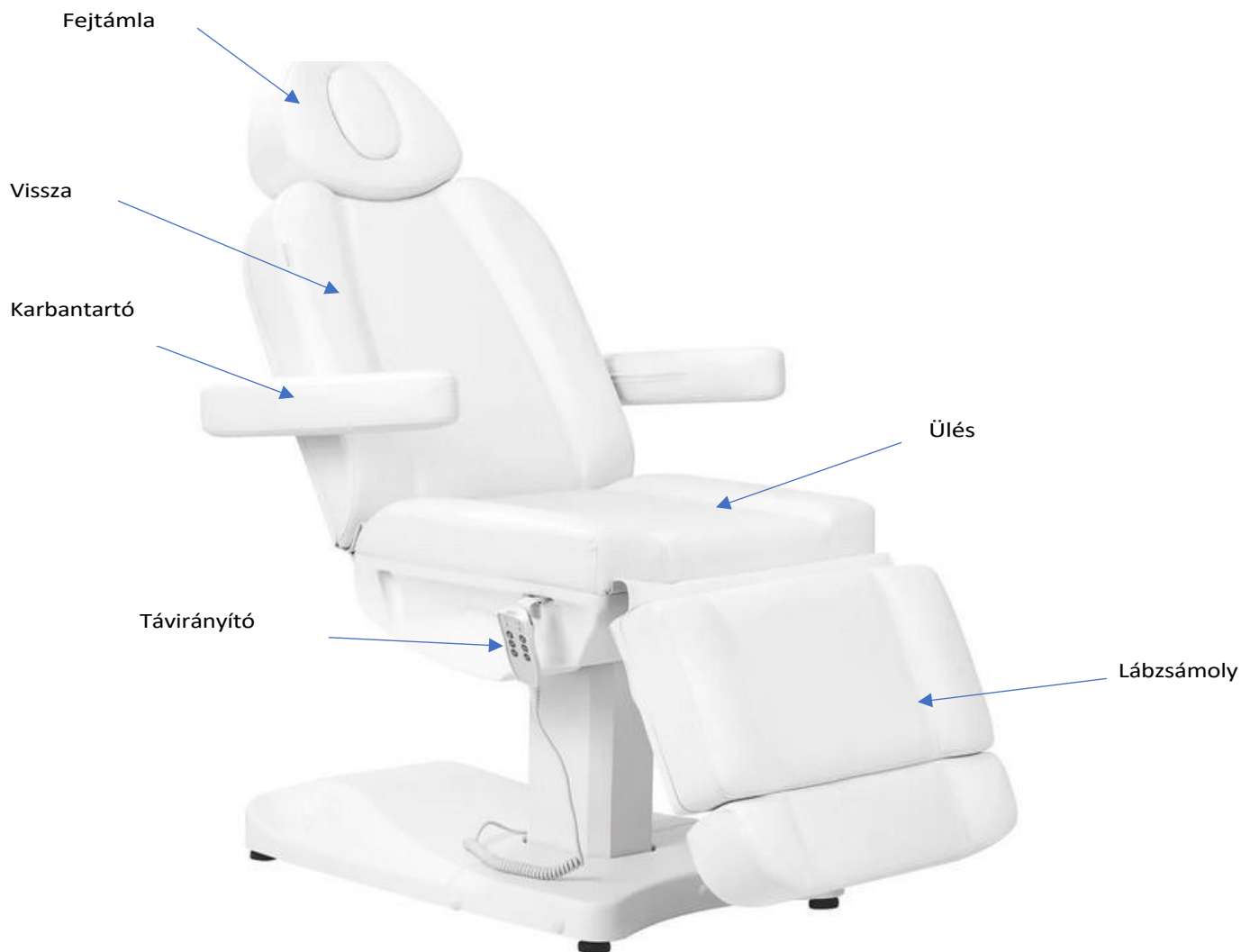

## Figyelmeztetés:

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára vagy a lábtartóra.
3. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzatok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

## Figyelem


1. Biztonsági okokból a tápkábelt mindig földelt konnektorba dugja.
2. Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vészhelyzetben könnyen eltávolítható legyen.
3. Az elektromos kozmetikai szék mozgatása előtt távolítsa el a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
4. Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti t á p k á b e l t használja.
5. Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a távirányítót.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az ülés alá.
7. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül elegendő szabad tér van, hogy szabadon össze- és kihajtható legyen.

8. Győződjön meg róla, hogy az ülés körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
9. Ne módosítsa a készüléket saját maga. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközpontoz.


A szék távirányítóval történő kézi vezérléssel, valamint lábvezérlési lehetőséggel is rendelkezik. A szék magassága, a háttámla és a lábtartó pozíciója igény szerint állítható.

#### Távirányító funkciók:

1. Ülés magasság beállítása (64-90cm)
2. Háttámla beállítása
3. Lábtartó beállítása

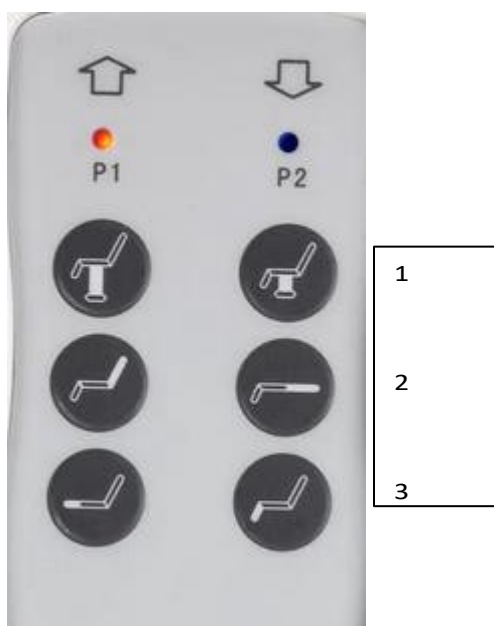


#### Lábvezérlő funkciók:

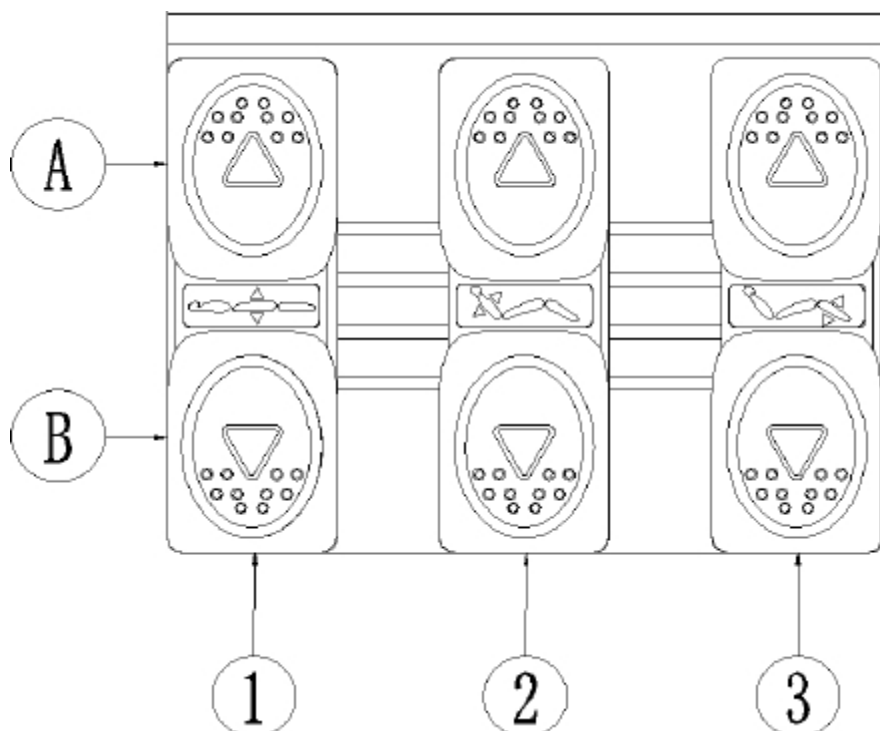

1. Az ülés magasság beállítása. Nyomja meg az A gombot az ülés megemeléséhez vagy a B gombot az ülés leengedéséhez.
2. A háttámla pozíciójának beállítása. Nyomja meg az A gombot a háttámla megemeléséhez vagy a B gombot a háttámla leengedéséhez.
3. A lábtartó beállítása. Nyomja meg az A gombot a lábtartó felemeléséhez vagy a B gombot a lábtartó leengedéséhez.

## Lábtartó hosszabbítás

A szék lábtartójának meghosszabbítására is van lehetőség, ami megkönnyíti a magasabb emberek kezelését, és javítja a kényelmet. A lábtartó meghosszabbításának maximális hossza körülbelül 17 cm. A lábtartó beállításához használja a lábtartó alján található gombot.

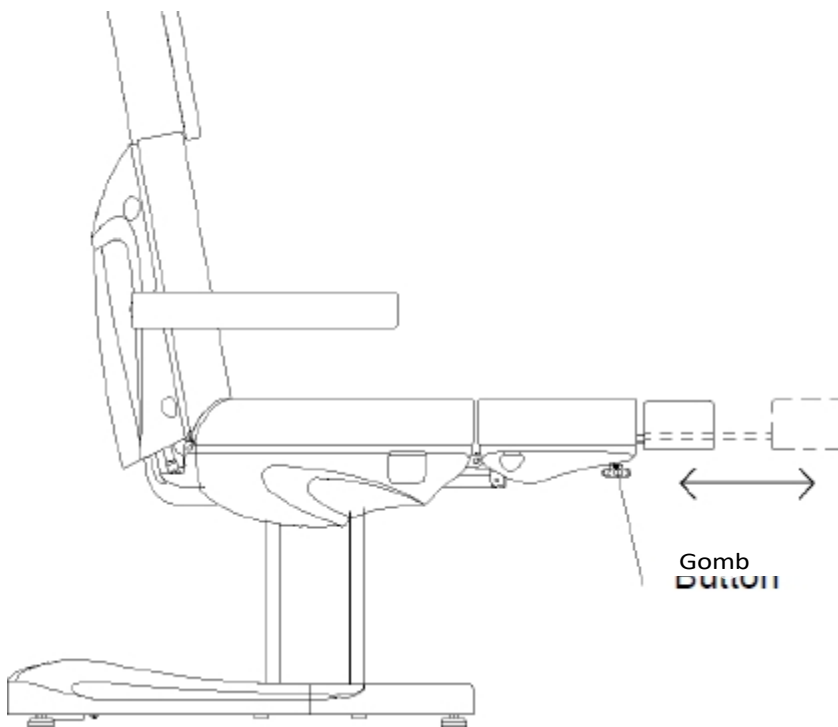


## Karbantartó felszerelése:

Csúsztassa a kartámaszokat a háttámla oldalán található lyukba. A kartámasznak szilárdan kell rögzülnie. Csúsztassa jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön. Ugyanígy járjon el a másik kartámasszal is. A kartámasz merőlegesen áll a talajra (függetlenül az ülés szögétől). Ez 180°-kal elforgatható.

## A fejtámla felszerelése:

Csúsztassa a fejtámlát az üléstámla tetején található lyukba. Amikor a fejtámla a megfelelő magasságban van, húzza meg a háttámlán lévő kurblit a fejtámla rögzítéséhez.

A fejtámla leengedéséhez vagy kinyújtásához csavarja ki a kurblit, állítsa be a fejtámlát, majd húzza meg a kurblit.

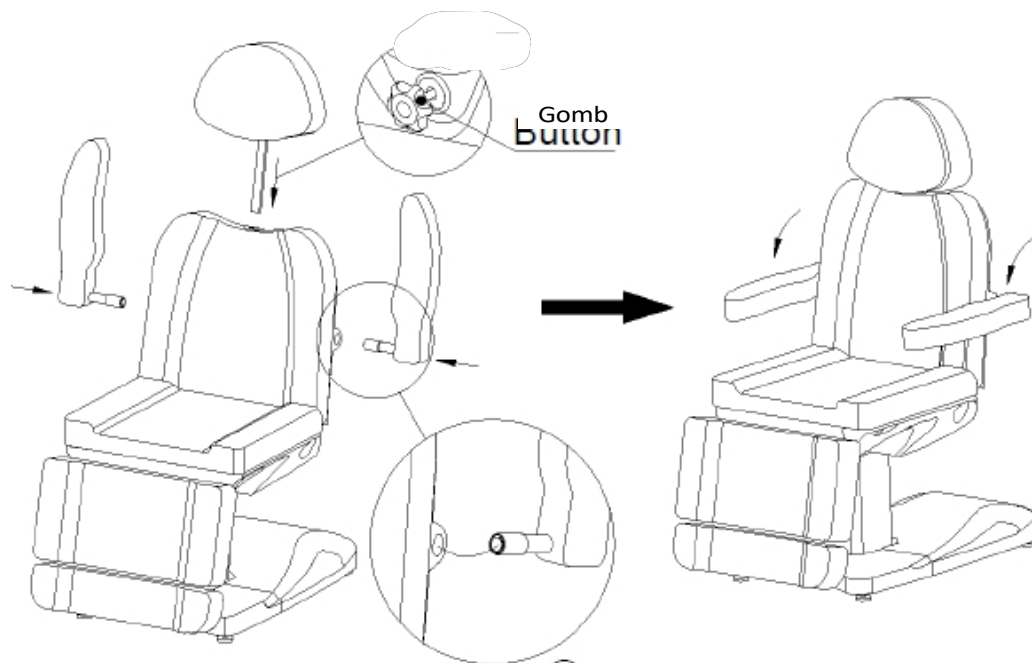

### **A készülék tisztítása és fertőtlenítése:**

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

#### **I Fém és műanyag felületek**

A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

#### **II Rozsdamentes acélfelületek**

A tisztítás enyhe mosószeres oldattal a legjobb. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

#### **III Festett vagy krómozott fémfelületek**

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

#### **IV Ülőfelület**

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét egy speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

### **Karbantartás**

#### **Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.**

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.

4. Minden karbantartási és javítási tevékenységet dokumentálni kell.

### Megélhetés

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok vezetékeit. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. Tápkábel és annak rögzítése
2. A motor kábelezése
3. Vezérlődoboz és kábelezése
4. A tartozékok rögzítve vannak-e
5. A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlő egységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki. Ha a készülék bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a készülék használatát. Ezután értesítse a szervizt.

### Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldási módszer
Nincs válasz a távirányító gombjainak megnyomása után	1. A bekapcsológomb aktiválódik vagy sem. 2. Ellenőrizze, hogy a pedál maximálisan le van-e nyomva. 3. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva. 4. Ellenőrizze, hogy minden megfelelően van-e csatlakoztatva.	1. Próbálja meg újraindítani a bekapcsológombot. 2. Próbáljon meg más gombokat bekapcsolni, és nézze meg, hogy működnek-e. 3. Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra. 4. Húzza ki a dugókat, és csatlakoztassa újra.
A készülék furcsa hangokat ad ki	Laza csavar	Húzza meg a csavarokat

### BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célok kivételével más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

- a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
- c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

## **MEGJEGYZÉSEK:**

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.

2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek tartózkodnak.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

## **A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA**



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt

az elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és a következő helyeken kell átadni

elektronikai és elektromos berendezések hulladékának begyűjtése. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Sp. z o.o. vállalatnál kell leadni.

## **TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS**

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.