

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia estetica elettrica Azzurro 803D 3 motori



**Importatore:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024

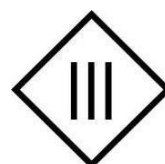


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni e seguire i seguenti passaggi:


1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che il sedile sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nel luogo in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.

**Nota!** I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

#### Dimensioni del dispositivo:

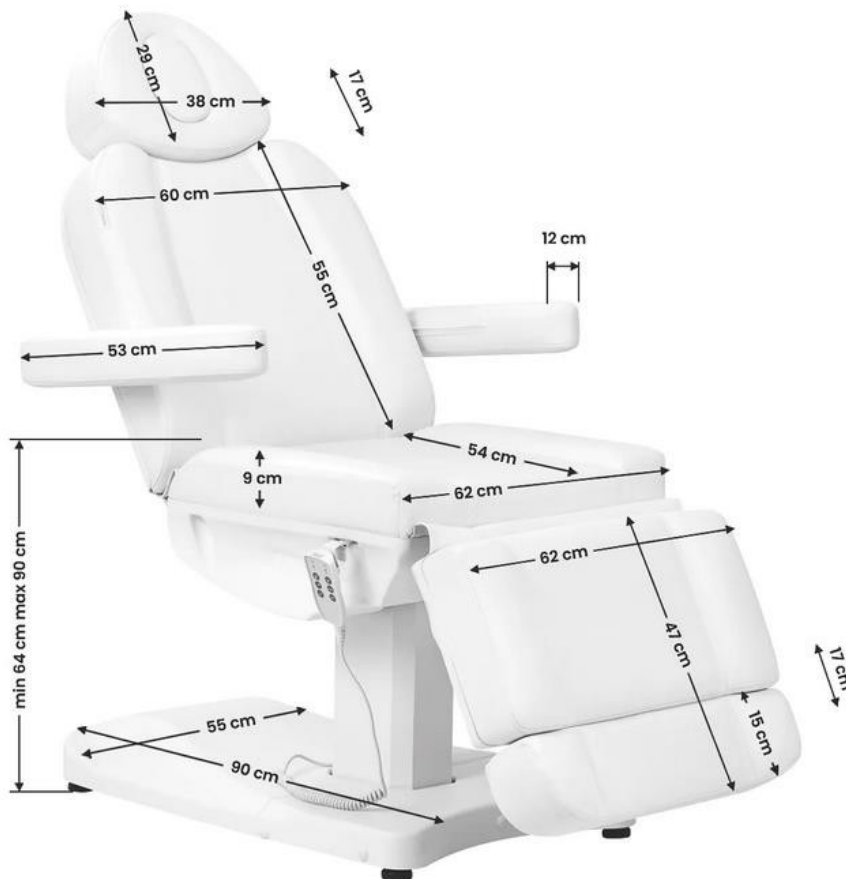

## Costruzione del dispositivo:

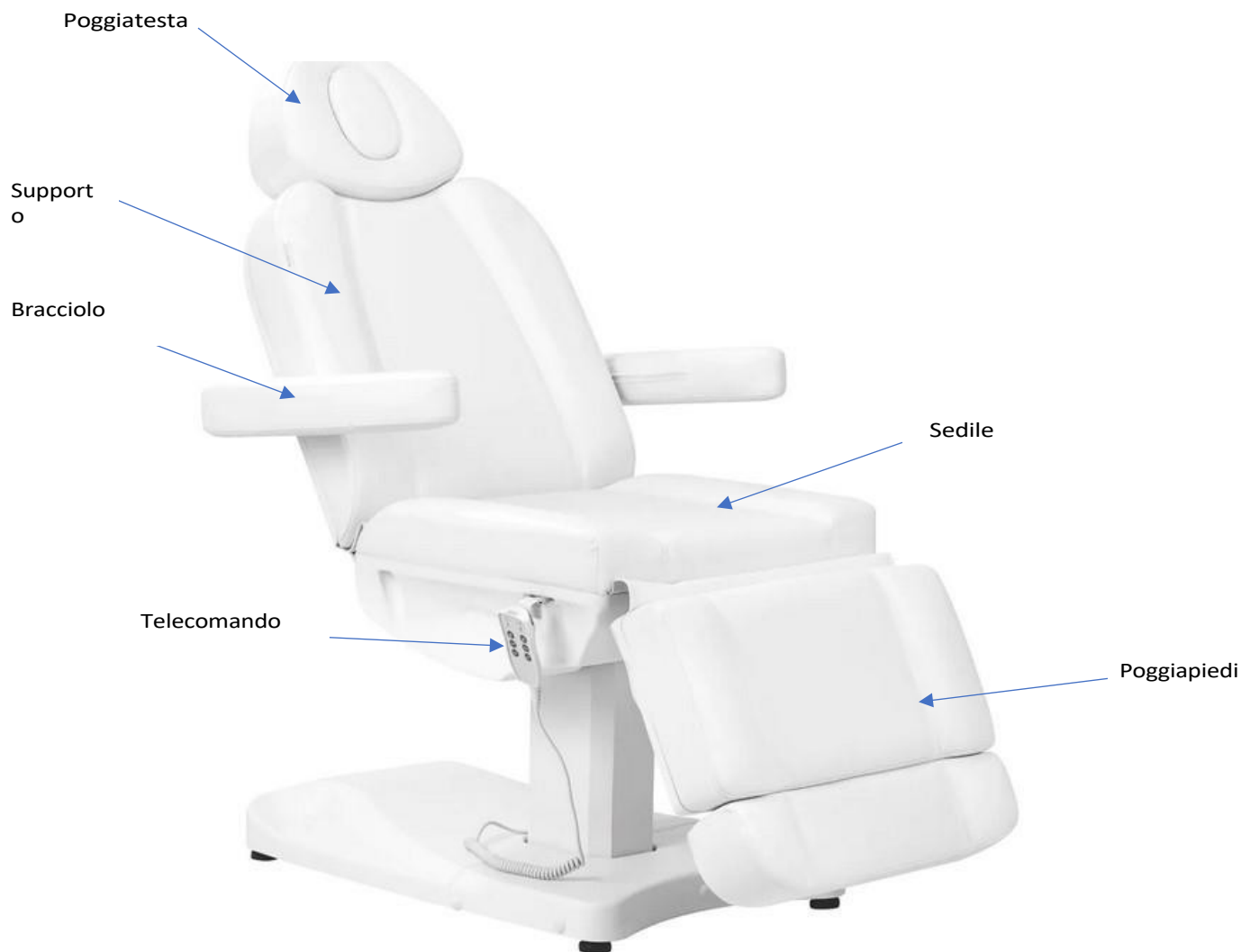

## Attenzione:

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo o sul poggiapiedi.
3. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

## Attenzione


1. Per motivi di sicurezza, collegare sempre il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
2. Non legare il cavo di alimentazione all'unità. Sollevando o tirando il cavo di alimentazione si rischia di danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
3. Prima di spostare la poltrona elettrica, rimuovere il cavo di alimentazione per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.
5. Non lasciare che la persona che non esegue il trattamento controlli il telecomando.
6. Non collocare oggetti sotto il sedile.
7. Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio intorno al sedile in modo che possa essere piegato e dispiegato liberamente.

8. Assicurarsi che intorno al sedile non vi siano oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
9. Non modificare il dispositivo da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.


La poltrona dispone di un'opzione di controllo manuale tramite telecomando e di un'opzione di controllo a pedale. L'altezza della poltrona, la posizione dello schienale e del poggiatesta possono essere regolati a piacere.

#### Funzioni del telecomando:

1. Regolazione dell'altezza del sedile (64-90 cm)
2. Regolazione dello schienale
3. Regolazione del poggiatesta

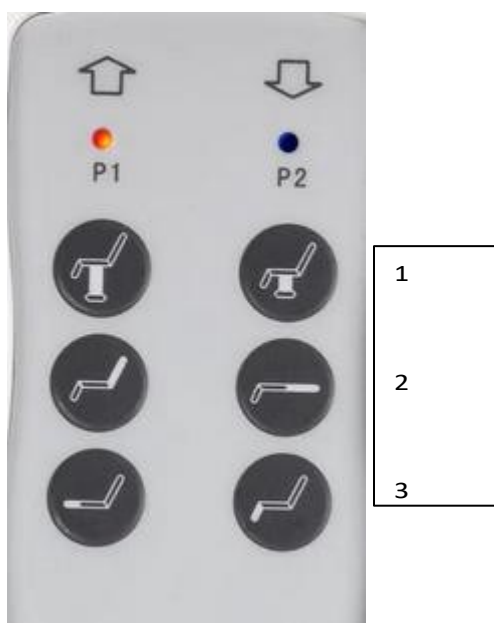


#### Funzioni di controllo a pedale:

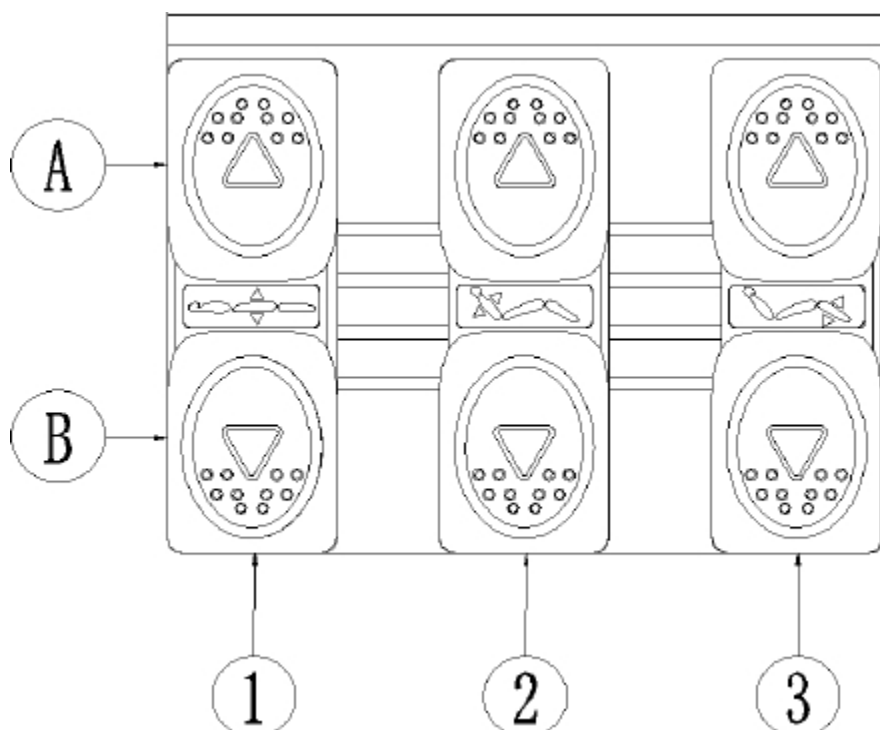

1. Regolazione dell'altezza del sedile. Premere A per alzare il sedile o B per abbassarlo.
2. Regolazione della posizione dello schienale. Premere A per alzare lo schienale o B per abbassarlo.
3. Regolazione del poggiatesta. Premere A per alzare il poggiatesta o B per abbassarlo.

## Estensione del poggiatesta

La poltrona dispone anche di un'opzione di estensione del poggiatesta, che facilita l'esecuzione di trattamenti su persone più alte e migliora il comfort. La lunghezza massima dell'estensione del poggiatesta è di circa 17 cm. Per regolare il poggiatesta, utilizzare la manopola sul lato inferiore del poggiatesta.

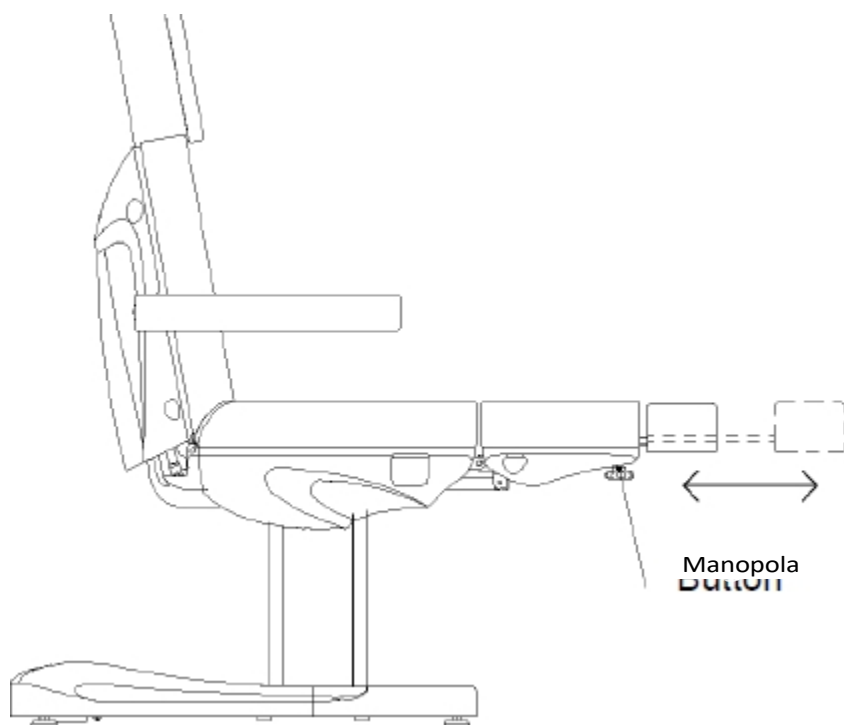


## Installazione del bracciolo:

Far scorrere i braccioli nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Farlo scorrere a destra o a sinistra in modo che si inserisca correttamente. Procedere allo stesso modo con l'altro bracciolo. Il bracciolo è perpendicolare al suolo (indipendentemente dall'angolo del sedile). Può essere ruotato di 180°.

## Installazione del poggiatesta:

Far scorrere il poggiatesta nel foro situato nella parte superiore dello schienale. Quando il poggiatesta è all'altezza corretta, stringere la manovella sullo schienale per fissare il poggiatesta. Per abbassare o estendere il poggiatesta, svitare la manovella, regolare il poggiatesta e serrare la manovella.

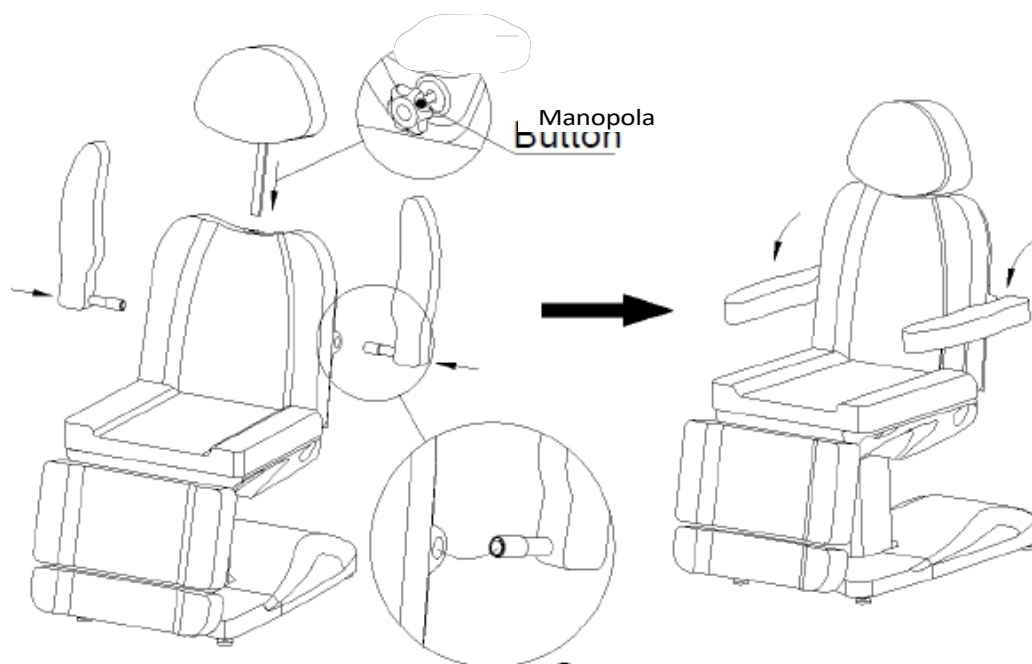

### **Pulizia e disinfezione dell'unità:**

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'unità.

Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

#### **I Superfici in metallo e plastica**

Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

#### **II Superfici in acciaio inox**

La pulizia migliore è quella con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

#### **III Superfici metalliche verniciate o cromate**

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni ad alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

#### **IV Superficie del sedile**

- Pulire uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per la pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

### **Manutenzione**

#### **Prima della manutenzione, scollegare l'unità.**

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.

4. Tutte le attività di manutenzione e riparazione devono essere documentate.

### Mezzi di sussistenza

Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:

1. Cavo di alimentazione e relativo attacco
2. Cablaggio del motore
3. Scatola di controllo e relativo cablaggio
4. Se gli accessori sono collegati
5. Funzionamento normale del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchiatura e contattare un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di controllo. Se una parte dell'apparecchio è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'uso. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

### Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodo di soluzione
Nessuna risposta dopo aver premuto i pulsanti del telecomando	1. Il pulsante di accensione si attiva o meno. 2. Verificare che il pedale sia premuto al massimo. 3. Controllare che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente. 4. Controllare che tutto sia stato collegato correttamente.	1. Provare a riavviare con il pulsante di accensione. 2. Provare ad attivare altri pulsanti e vedere se funzionano. 3. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo. 4. Scollegare le spine e ricollegarle.
Il dispositivo emette strani rumori	Vite allentata	Serrare le viti

### MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
  - a) il fluido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
  - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o l'involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

#### **NOTE:**

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

#### **SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere smaltiti nei centri di riciclaggio.

gli apparecchi elettrici devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti seguenti

raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o..

#### **STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.